

La Soluzione in uno spray

The solution is a spray

PRIMA DI OGNI MEDICAZIONE...

VULNOMED®

Detergente spray da applicare su
ferite, piaghe, ustioni, eritemi

Spray detergent to be applied on wounds,
sores, burns and rashes

VULNOMED è una soluzione salina isotonica nebulizzata sterile
a base di argento cloruro e aloe vera per la detersione,
l'irrigazione e l'idratazione della cute.

VULNOMED is a sterile isotonic saline spray solution based
on Silver chloride and Aloe vera for the cleansing,
irrigation and hydration of the skin.



Aloe Vera è nota per le sue proprietà cicatrizzanti,
riepitelizzanti, antisettiche.

Aloe Vera is known for its healing, restorative
and antiseptic properties.



L'argento Cloruro previene la contaminazione microbica
della medicazione e mantiene l'ambiente della lesione
libero da batteri esogeni.

Silver Chloride prevents microbial contamination
of the dressing and keeps the wound environment free
from exogenous bacteria.



produced by

eurofarm®
ADVANCED MEDICAL DEVICES

La Soluzione in uno spray

The solution is a spray

VULNOMED®

Detergente spray da applicare su ferite, piaghe, ustioni, eritemi
Spray detergent to be applied on wounds, sores, burns and rashes



VULNOMED è una soluzione salina isotonica nebulizzata sterile a base di Argento Cloruro e Aloe Vera per la detersione, l'irrigazione e l'idratazione della cute.

È indicata per ferite acute e croniche, per lesioni dermatologiche di varia eziologia, per superfici cutanee integre o lese. Permette una completa ed accurata detersione della cute lesa e della zona limitrofa.

Può essere utile nello sbrigliamento del tessuto necrotico crostoso.

VANTAGGI

La presenza di un leggero tensioattivo e l'azione meccanica dello spray consentono una completa detersione della cute lesa senza alcun danno al tessuto neoformato.

L'Argento Cloruro previene la contaminazione microbica della medicazione e mantiene l'ambiente della lesione libero da batteri esogeni.

L'Aloe Vera è nota per le sue proprietà cicatrizzanti, riepitelizzanti, antisettiche.

Il prodotto non contiene conservanti né gas propellenti dannosi per l'ozono.

PRESENTAZIONE

Bomboletta in alluminio pressurizzato contenente 125 ml di soluzione spray.

FORMULAZIONE

Decylglucoside, Sodio Cloruro, Estratto di Aloe Vera, Argento Cloruro, acqua depurata.

MODALITÀ D'USO

Spruzzare la soluzione direttamente sulla zona da trattare ed asportare eventuali impurità con garza sterile. Ripetere il trattamento, se necessario, due / tre volte al giorno, prima di ogni medicazione. Lo speciale erogatore consente l'applicazione del prodotto in qualunque posizione, a 360°.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Non bruciare né perforare nemmeno dopo l'uso. Conservare in luogo fresco, ben ventilato e lontano da fonti di combustione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire, in caso di ingestione consultare il medico. Non mescolare con altri liquidi.

VULNOMED is a sterile isotonic saline spray solution based on Silver Chloride and Aloe Vera for the cleansing, irrigation and hydration of the skin. It is indicated for acute and chronic wounds, dermatological lesions of varying etiology, intact or injured skin surfaces. It allows a complete and thorough cleansing of the damaged skin and the neighboring area. It may be useful in the debridement of the crusty necrotic tissue.

ADVANTAGES

The presence of a mild surfactant and the mechanical action of the spray allow a complete cleansing of the injured skin without damaging the newly formed tissue. Silver Chloride prevents microbial contamination of the dressing and keeps the wound environment free from exogenous bacteria.

Aloe Vera is known for its healing, restorative and antiseptic properties. The special dispenser allows the application of the product in any position. The product contains no preservatives or propellants harmful to the ozone.

PRESENTATION

Pressurized aluminum canister containing 125 ml of spray solution.

FORMULATION

Decyl Glucoside, Sodium Chloride, extract of Aloe Vera, Silver Chloride, purified water.

HOW TO USE

Spray the solution directly on the area to be treated and remove any impurities with sterile gauze. Repeat the treatments, if required, two/three times daily, before each dressing. The product can be applied in any position (360°).

WARNINGS

Pressurized container. Do not burn or pierce even after use. Keep container in a cool, well-ventilated area away from sources of ignition.


Keep away from children. Avoid contact with eyes. Do not swallow. If swallowed, seek medical advice. Do not mix with other liquids.



CODICE	CONTENUTO
501815	125 ml

produced by
eurofarm®
ADVANCED MEDICAL DEVICES

EUROFARM S.p.A.
Zona Industriale - Piano Tavola - 95032 - Belpasso - CT - ITALY
www.eurofarm-spa.com - tel. +39 095 391346

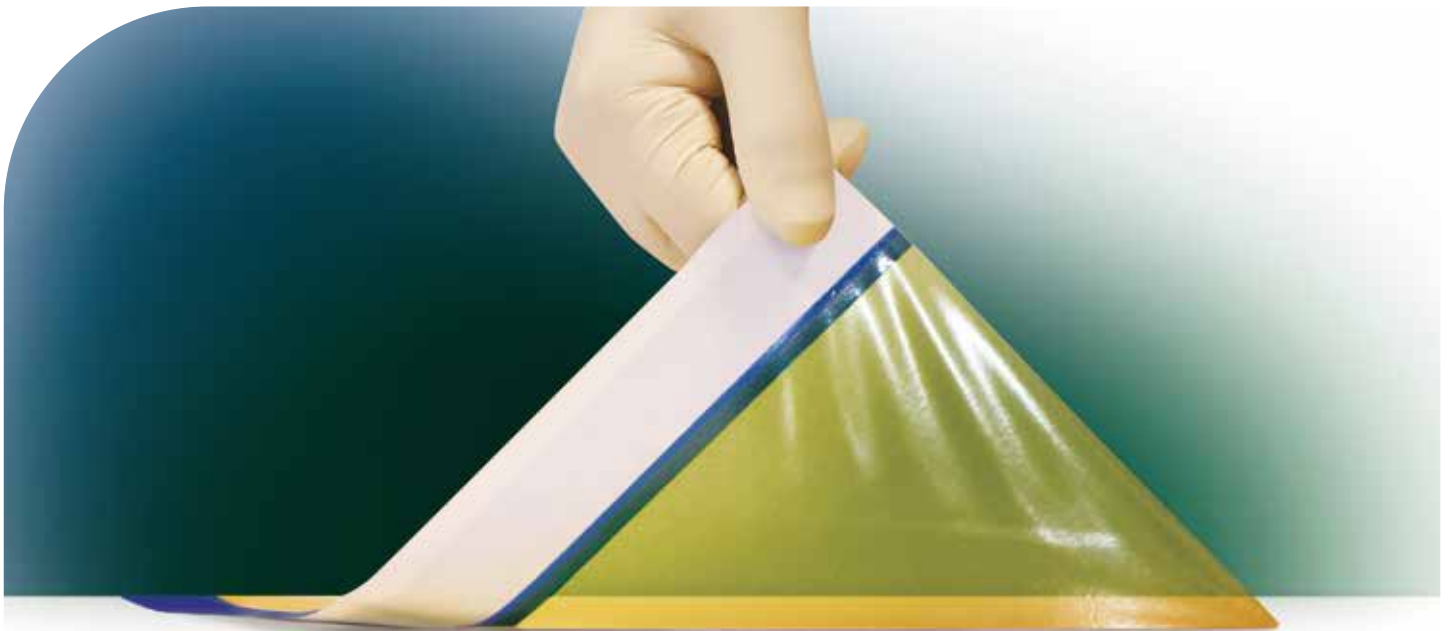

Euroderm incise



Telo chirurgico da incisione
sterile, adesivo, trasparente
Sterile, adhesive and transparent
surgical incise drape

Euroderm incise iodine



Telo chirurgico da incisione sterile, adesivo,
trasparente a rilascio di molecole di iodio
Antimicrobial, sterile and adhesive incise
drape with iodine





Euroderm incise

Il telo chirurgico da incisione Euroderm Incise è un film trasparente di poliuretano adesivo sterile, antistatico, non riflettente che rende chiaramente visibile l'area di incisione. Euroderm incise è latex free.

The surgical incise drape Euroderm Incise is a transparent film of sterile polyurethane adhesive, anti-static, non-reflective which makes clearly visible the incision area. Euroderm Incise is latex free.

Proprietà

- Conformabile, flessibile ed elastico: la flessibilità e la conformabilità del film lo rendono adatto anche alle aree di intervento più difficili.
- Perfetta aderenza: il telino aderisce saldamente alla pelle che circonda la zona di incisione per tutta la durata dell'intervento evitando quindi l'uso di gancetti.
- Sottile ma resistente: il film è estremamente resistente allo strappo ma può essere nettamente inciso con il bisturi.
- Crea un area d'incisione sterile: il film impermeabile ai liquidi e ai batteri protegge da eventuali contaminazioni.

Vantaggi

- Impedisce il passaggio di fluidi e batteri anche a secco.
- Aderisce perfettamente alla cute per tutta la durata dell'intervento.
- Ipoallergenico.
- Permeabilità al vapore acqueo e gas.
- Evita il distacco.
- Trasparente.
- Può essere inciso con il bisturi.
- Flessibile e conformabile.
- Ampia disponibilità di formati.

Indicazioni

- Indicato per tutti gli interventi chirurgici: Ortopedici • Neurochirurgici • Addominali • Plastici Cardiaci e toracici • Oftalmici • Pediatrici

Features


- Conformable, flexible and elastic: the flexibility and conformability of the film makes it suitable for the most difficult areas of intervention.
- Perfect adhesion: the drape adheres firmly to the skin surrounding the incision area for the whole duration of the intervention, thus avoiding the use of hooks.
- Thin but strong: the film is very strong and tear-resistant but can be clearly incised with a surgical scalpel.
- The film creates a sterile incision area: the drape guarantees a sterile surgical area and protects it from contamination.

Benefits

- Adheres to the edge of the wound.
- Avoid lateral migration of bacteria into the wound.
- Non-reflective surface that provides perfect visibility of the incision area.
- Ideal in cases where the manipulation is required during surgery (hip prosthesis).
- Liquids and bacteria proof.
- Wide range of sizes.

Indications

- Recommended for all surgeries: Orthopaedics • Neurosurgery • Abdominal surgery • Plastic surgery • Cardiac and thoracic surgery • Ophthalmic surgery Paediatric surgery

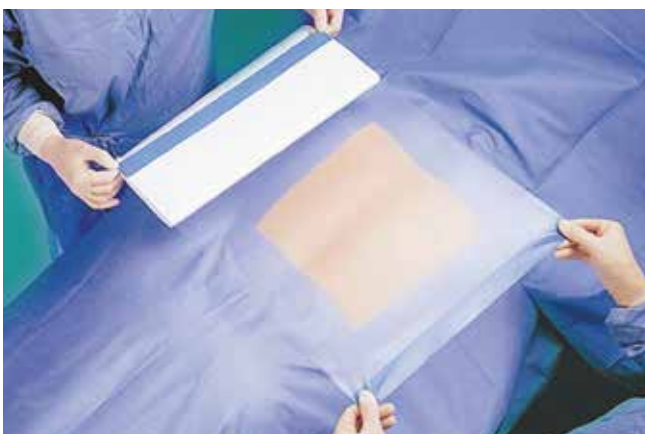

articolo item no.	○ misure size	→ area adesiva adhesive area	○ conf. pkg.
717710	cm 10 x cm 24	cm 10 x cm 18	10 pz/pcs
717715	cm 15 x cm 26	cm 15 x cm 20	10 pz/pcs
717730	cm 30 x cm 26	cm 30 x cm 20	10 pz/pcs
717740	cm 40 x cm 34	cm 40 x cm 28	10 pz/pcs
717742	cm 42 x cm 42	cm 42 x cm 36	10 pz/pcs
717744	cm 44 x cm 26	cm 44 x cm 20	10 pz/pcs
717745	cm 45 x cm 55	cm 45 x cm 49	10 pz/pcs
717750	cm 50 x cm 90	cm 50 x cm 84	10 pz/pcs
717760	cm 60 x cm 52	cm 60 x cm 46	10 pz/pcs
717770	cm 70 x cm 80	cm 70 x cm 74	10 pz/pcs
717780	cm 80 x cm 60	cm 80 x cm 54	10 pz/pcs
717790	cm 90 x cm 80	cm 90 x cm 74	10 pz/pcs

Telo chirurgico da incisione sterile, adesivo, trasparente
Sterile and adhesive surgical incise drape

Euroderm incise iodine

Il telo chirurgico da incisione Euroderm Incise Iodine rispetta le medesime indicazioni e ha le stesse proprietà dell'Euroderm Incise con l'aggiunta di una continua azione antimicrobica ad ampio spettro grazie al rilascio graduale delle molecole di iodio per oltre 7 ore dall'applicazione. Il film impermeabile ai liquidi ed ai batteri (per questi ultimi anche a secco), ma permeabile ai gas ed al vapore acqueo, protegge da eventuali contaminazioni e lascia respirare la pelle, impedendo così l'accumulo di umidità sotto il telino. Un aspetto critico di tutti gli interventi chirurgici è la prevenzione di infezioni, Euroderm Incise Iodine riduce l'ingresso di microorganismi nella ferita ed evita le migrazioni laterali di batteri verso la ferita stessa. Studi effettuati sull'efficacia di Euroderm Incise Iodine sui ceppi Staphylococcus Aureus (11000 UFC/ml), su Pseudomonas Aeruginosa (10200 UFC/ml) e su Candida Albicans (11000 UFC/ml), evidenziano un abbattimento totale della carica microbica.

Euroderm Incise Iodine è latex free.


Euroderm Incise Iodine respects the same indications and has the same properties of Euroderm Incise. Euroderm Incise Iodine provides continuous antimicrobial broad-spectrum action by the gradual release of iodine molecules for over 7 hours of application. The film is liquid and bacteria proof (also in dry conditions) but it is permeable to gases and water vapour, protecting the area from contamination and leaves the skin to breathe, thereby preventing the accumulation of moisture under the drape. A critical aspect of all surgical interventions is the prevention of infections; Euroderm Incise Iodine reduces the entry of microorganisms into the wound and prevents lateral migration of bacteria into the wound itself. Studies on the effectiveness of Euroderm Incise Iodine on Staphylococcus Aureus (11000 CFU/ml) of Pseudomonas Aeruginosa (10200 CFU/ml) and Candida Albicans (11000 CFU/ml), showed a total reduction of bacteria. Euroderm Incise Iodine is latex free.

Proprietà e vantaggi

- Evita la migrazione laterale dei batteri verso la ferita.
- Impermeabile ai liquidi e ai batteri.
- Azione battericida ad ampio spettro.
- Superficie non riflettente che rende perfettamente visibile l'area di incisione.
- Ampia disponibilità di formati.
- Flessibile e conformabile.

Features and benefits

- Adheres to the edge of the wound.
- Avoid lateral migration of bacteria into the wound.
- Non-reflective surface that provides perfect visibility of the incision area.
- Ideal in cases where the manipulation is required during surgery (hip prosthesis).
- Liquids and bacteria proof.
- Wide range of sizes.

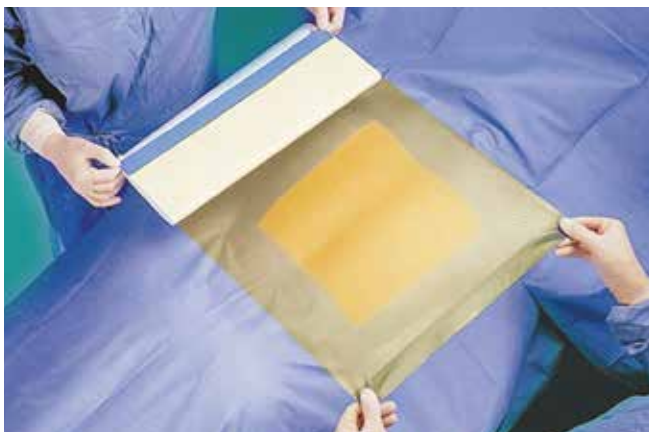

articolo item no.	⊙ misure size	→ area adesiva adhesive area	⊙ conf. pkg.
717910	cm 10 x cm 24	cm 10 x cm 18	10 pz/pcs
717915	cm 15 x cm 26	cm 15 x cm 20	10 pz/pcs
717930	cm 30 x cm 26	cm 30 x cm 20	10 pz/pcs
717940	cm 40 x cm 34	cm 40 x cm 28	10 pz/pcs
717942	cm 42 x cm 42	cm 42 x cm 36	10 pz/pcs
717944	cm 44 x cm 26	cm 44 x cm 20	10 pz/pcs
717945	cm 45 x cm 55	cm 45 x cm 49	10 pz/pcs
717950	cm 50 x cm 90	cm 50 x cm 84	10 pz/pcs
717960	cm 60 x cm 52	cm 60 x cm 46	10 pz/pcs
717970	cm 70 x cm 80	cm 70 x cm 74	10 pz/pcs
717980	cm 80 x cm 60	cm 80 x cm 54	10 pz/pcs
717990	cm 90 x cm 80	cm 90 x cm 74	10 pz/pcs

traspirante
breathable



conformabile
conformable



ipoallergenico
hypo-allergenic



latex free



Euroderm incise iodine

Risultati dei test di verifica di efficacia Outcomes efficacy verification test

ceppo stock	soluzione solutions	periodo di contatto (minuti) contact period (minutes)	ceppo UFC/ml stock UFC/ml	risultati UFC/unità outcomes UFC/unit
staphylococcus aureus ATCC 25923	± 10.000 UFC/ml	15	11000	<10
		30	11000	<10
		60 fino 300 - 60 to 300	11000	<10

Tasso di riduzione dopo 15 minuti: 100% • Reduction rate after 15 minutes: 100%

ceppo stock	soluzione solutions	periodo di contatto (minuti) contact period (minutes)	ceppo UFC/ml stock UFC/ml	risultati UFC/unità outcomes UFC/unit
pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	± 10.000 UFC/ml	15	10200	1000
		30	10200	80
		60 fino 300 - 60 to 300	10200	<10

Tasso di riduzione dopo 15 minuti: 90,20% • Reduction rate after 15 minutes: 90,20%

Tasso di riduzione dopo 30 minuti: 99,20% • Reduction rate after 30 minutes: 99,20%


Tasso di riduzione dopo 60 minuti: 100% • Reduction rate after 60 minutes: 100%

ceppo stock	soluzione solutions	periodo di contatto (minuti) contact period (minutes)	ceppo UFC/ml stock UFC/ml	risultati UFC/unità outcomes UFC/unit
candida albicans ATCC 10231	± 10.000 UFC/ml	15	11000	2000
		30	11000	<10
		60 fino 300 - 60 to 300	11000	<10

Tasso di riduzione dopo 15 minuti: 81,80% • Reduction rate after 15 minutes: 81,80%


Tasso di riduzione dopo 30 minuti: 100% • Reduction rate after 30 minutes: 100%

Effetto battericida • Bactericide effect

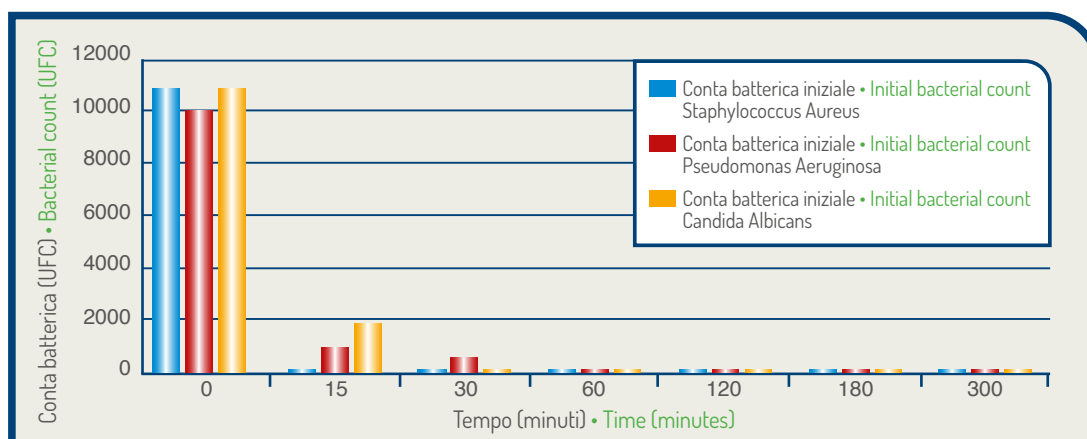




Eurocell[®] hydro

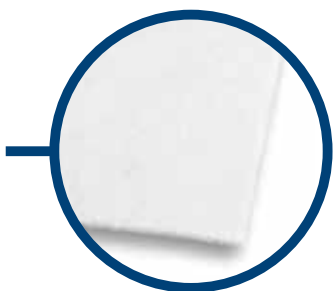

Medicazione idroattiva sterile in fibre di carbossimetilcellulosa

Sterile hydroactive dressing of carboxymethylcellulose fibers

Eurocell[®] hydro roll

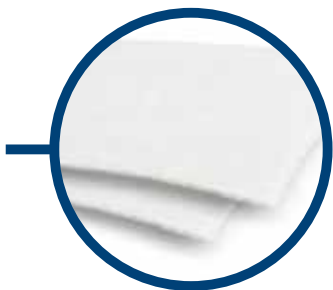

Medicazione idroattiva sterile in fibre di carbossimetilcellulosa in rotolo

Sterile hydroactive ribbon dressing of carboxymethylcellulose fibers





Eurocell[®] hydro / Eurocell[®] hydro roll

Eurocell Hydro è una medicazione per ferite altamente assorbente e conformabile che incorpora la tecnologia super gelificante a base di carbossimetilcellulosa (CMC).

A contatto con gli essudati della ferita, la CMC forma un gel cristallino che aiuta a mantenere un ambiente umido per facilitare il processo di guarigione delle ferite e contribuisce alla rimozione del tessuto non vitale dalla ferita, senza danneggiare il tessuto neoformato.

È indicato per la gestione di ferite acute e croniche, parziali e a tutto spessore, moderatamente o fortemente essudanti e per il controllo del sanguinamento minore nelle ferite superficiali.

Eurocell Hydro può essere lasciato in situ fino a 7 giorni dove clinicamente indicato (eccetto che per le ustioni nel qual caso la medicazione può essere lasciata in situ fino a 14 giorni).

Destinazione d'uso:

- Ulcere agli arti inferiori, da pressione (stadio II-IV) e ulcere del piede diabetico.
- Ferite chirurgiche (ad esempio post-operatorie, ferite lasciate guarire per seconda intenzione e zone di prelievo cutaneo).
- Ustioni superficiali e ustioni a spessore parziale.
- Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni).
- Assorbimento dell'essudato nelle ulcere oncologiche (es. tumori cutanei vegetanti, metastasi cutanee e sarcomi di Kaposi).

Eurocell Hydro is a highly absorbent, conformable and wet integral wound dressing incorporating with the Carboxymethyl Cellulose (CMC) super gelling technology.

On contact with the wound exudates, CMC forms a crystal clear gel which helps to keep a moist environment to support the wound healing process and aid in the removal of nonviable tissue from the wound, without damaging newly formed tissue.

Eurocell Hydro CMC dressing is designed for the management of moderate to heavily exuding partial and full-thickness chronic wounds and it is indicated for acute wounds, it controls minor bleeding in superficial wounds. Eurocell Hydro CMC Dressing can be left in place up to 7 days where clinically indicated (except for burns where it can be left in place up to 14 days).

Intended use:

- Leg ulcers, pressure ulcers (stage II-IV) and diabetic ulcers.
- Cavity wounds.
- Surgical wounds.
- Superficial and partial thickness burns.
- Traumatic wounds.
- Exudates absorption in oncology wounds (eg. Fungating cutaneous tumors, cutaneous metastases and Kaposi's sarcomas).



medicazione idroattiva
hydroactive dressing

media essudazione
moderate exudate



alta essudazione
heavy exudate

Medicazione idroattiva sterile in fibre di carbossimetilcellulosa

Sterile hydroactive dressing of carboxymethylcellulose fibers

Test comparativi hanno dimostrato che la medicazione per ferite Eurocell Hydro possiede delle eccellenti prestazioni rispetto alle medicazioni in CMC di riferimento del settore. Ciò in termini di:


- **Assorbenza, in quanto assorbe elevati livelli di essudati durante l'uso.**
- **Capacità di ritenzione dei fluidi, in quanto trattiene gli essudati anche sotto compressione.**
- **Resistenza, in quanto anche bagnata rimane integra quando viene rimossa dal letto della ferita.**

Comparison testing has demonstrated that Eurocell Hydro CMC wound dressing has an excellent performance over the leading gelling dressing in:

- **Absorbency, capacity to absorb high levels of exudates during use.**
- **Fluid Retention, capacity to retain exudate under compression.**
- **Wet Strength, to remain intact when being removed from the wound bed.**

Analisi comparative

Performance bench tests

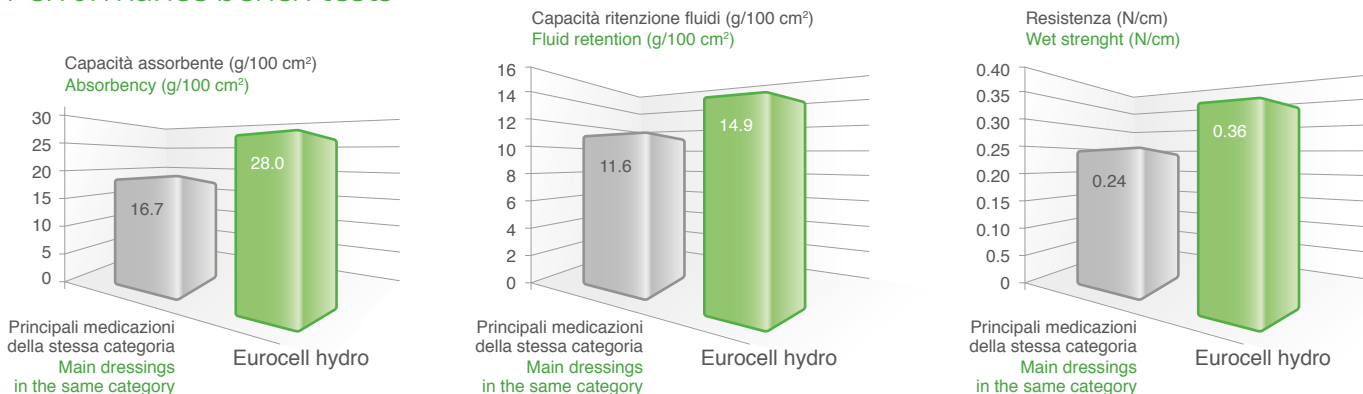

Eurocell Hydro ideale per ferite superficiali e a spessore parziale

Eurocell Hydro ideal for superficial and partial thickness wounds

articolo [item no.](#) [♀](#) misure [size](#) [♀](#) conf. [pkg.](#)


895005	cm 5 x cm 5	10 pz/pcs
895010	cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
895012	cm 10 x cm 20	5 pz/pcs
895015	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs

Eurocell Hydro roll ideale per ferite cavarie

Eurocell Hydro roll CMC roll ideal for cavity wounds

articolo [item no.](#) [♀](#) misure [size](#) [♀](#) conf. [pkg.](#)

895630	cm 2,5 x cm 45	5 pz/pcs
--------	----------------	----------

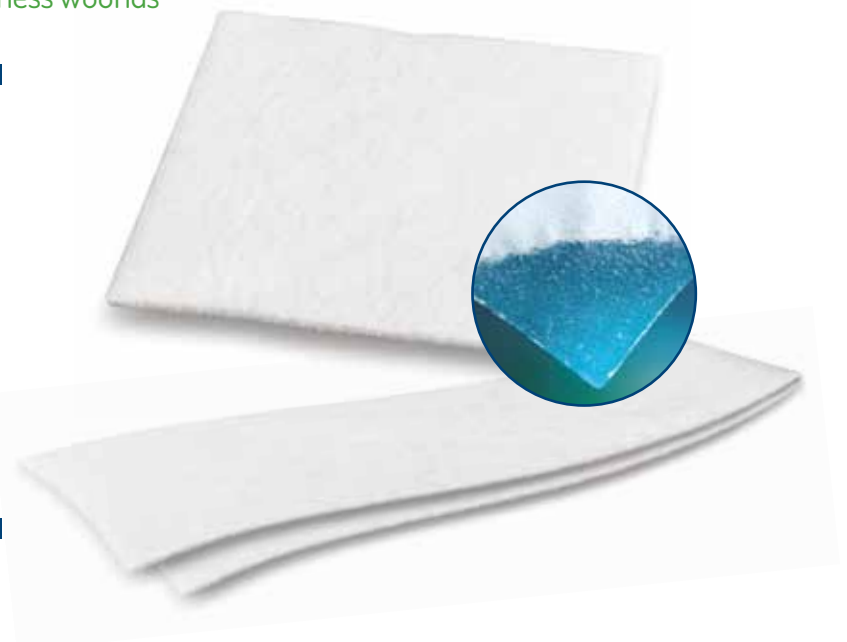


Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com





Eurosorb

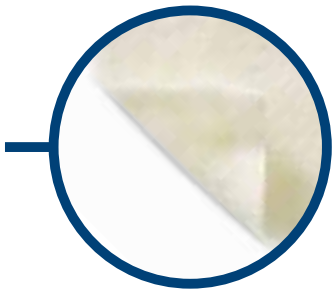

Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente, in placca
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent fibres in single swab

Eurosorb roll



Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente, in rotolo
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent fibres in ribbon





Eurosorb

Eurosorb è una medicazione primaria sterile conformabile in compressa, soffice ed altamente assorbente composta da fibre di alginato di calcio gelificante. A contatto con l'essudato, Eurosorb forma un gel biocompatibile che mantiene un ambiente umido fisiologico, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione del tessuto di granulazione. Eurosorb può assorbire una quantità di essudato fino a 10 volte il suo peso. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e alla quantità di essudato.

Eurosorb è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Il vantaggio è che può essere rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residuo di alginato. Non causa traumi al tessuto neoformato, non aderisce alla ferita, non rilascia gli essudati assorbiti preservando la pelle dalla macerazione, non necessita di essere irrigato. Eurosorb è latex free.

Eurosorb is a primary dressing in single swab made of 100% calcium alginate, sterile, soft and highly absorbent fibres. In contact with exudate, Eurosorb turns into a biocompatible gel, which maintains a moist wound healing environment. Promotes the healing process and the formation of newly formed tissue.

Eurosorb can absorb exudates up to 10 times its weight and can remain in situ up to 7 days, depending on the patient's condition and the amount of exudates.

Eurosorb is an integral alginate absorbing exudates between and within its fibres. The advantage is that it can be removed in one piece and the structure of Eurosorb reduces to the minimum the risk of release of alginate fibres into the wound and does not cause trauma to newly formed tissue, does not adhere to the wound bed and does not release exudates, preventing the risk of skin maceration. Eurosorb is latex free.



articolo	item no.	♀	misure	size	♀	conf.	pkg.
----------	----------	---	--------	------	---	-------	------

501505			cm 5 x cm 5			10 pz/pcs	
--------	--	--	-------------	--	--	-----------	--

501510			cm 10 x cm 10			10 pz/pcs	
--------	--	--	---------------	--	--	-----------	--

501515			cm 15 x cm 15			5 pz/pcs	
--------	--	--	---------------	--	--	----------	--

501520			cm 10 x cm 20			5 pz/pcs	
--------	--	--	---------------	--	--	----------	--



latex free



facile da rimuovere
easy to remove

media essudazione
moderate exudate



alta essudazione
heavy exudate

Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent fibres

Eurosorb roll

Eurosorb roll è una medicazione primaria sterile conformabile in rotolo, soffice ed altamente assorbente composta da fibre di alginato di calcio gelificante. A contatto con l'essudato, Eurosorb roll forma un gel biocompatibile che mantiene un ambiente umido fisiologico, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione del tessuto di granulazione. Eurosorb roll può assorbire una quantità di essudato fino a 10 volte il suo peso. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e alla quantità di essudato. Eurosorb roll è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Il vantaggio è che può essere rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residuo di alginato. Non causa traumi al tessuto neoformato, non aderisce alla ferita, non rilascia gli essudati assorbiti, preservando la pelle dalla macerazione, non necessita di essere irrigato. Eurosorb roll è latex free.

Eurosorb roll is a primary dressing in ribbon made of 100% calcium alginate, sterile, soft and highly absorbent fibres. In contact with exudate, Eurosorb roll turns into a biocompatible gel, which maintains a moist wound healing environment. Promotes the healing process and the formation of newly formed tissue. Eurosorb roll can absorb exudates up to 10 times its weight and can remain in situ up to 7 days, depending on the patient's condition and the amount of exudates.

Eurosorb roll is an integral alginate absorbing exudates between and within its fibres. The advantage is that it can be removed in one piece and the structure of Eurosorb roll reduces to the minimum the risk of release of alginate fibres into the wound and does not cause trauma to newly formed tissue, does not adhere to the wound bed and does not release exudates, preventing the risk of skin maceration. Eurosorb roll is latex free.

articolo item no.  misure size  conf.pkg.


501630

cm 2.5 x cm 30

5 pz/pcs



media essudazione
moderate exudate

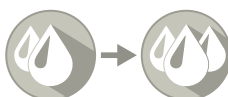

alta essudazione
heavy exudate

facile da rimuovere
easy to remove



latex free



Eurosoorb – Eurosoorb roll

Medicazione primaria sterile, conformabile e altamente assorbente
Primary dressing sterile, soft and highly absorbent fibres

Indicazioni

- Per ferite da moderatamente a molto essudanti quali: ulcere degli arti inferiori, ulcere da decubito e sedi di trapianto cutaneo, ulcere da pressioni.
- Eurosoorb roll è indicato per lesioni cavarie iperessudanti.

Controindicazioni

- Non usare Eurosoorb su ferite asciutte, ustioni di 3° grado ed impianti chirurgici.

Proprietà e vantaggi

- Altamente assorbente.
- Rilascia ioni di calcio sulla ferita.
- Riduce il rischio di macerazione cutanea.
- Si trasforma in un gel che non aderisce alla ferita e blocca la migrazione laterale dell'essudato.
- Mantiene l'ambiente umido favorendo la guarigione della lesione.
- Facile da rimuovere.
- Rimane integro alla rimozione.
- Trattiene l'essudato anche sotto bendaggio occlusivo.

Indications


- Eurosoorb is indicated for the treatment of Pressure ulcers, Leg ulcers, Cavity wounds, Skin donor sites.
- Eurosoorb roll is indicated for cavity wounds.

Contraindications

- Do not use on Surgical implantation, Third degree burns, Dry wounds.

Property and benefits

- High Absorbency.
- High wet strength.
- Retains Exudate
- Turns into a gel that will not stick to the wound.
- Maintains a 'Moist Wound Healing' environment.
- Donates calcium to the wound.
- Longer wear time between dressings.
- One-piece removal.
- Minimal residues in the wound bed.
- Reduce risk of maceration.
- Reduce trauma during a dressing change.
- Reduce requirement for debridement.
- Optimum wound healing conditions.
- Helps to stop minor bleeding.

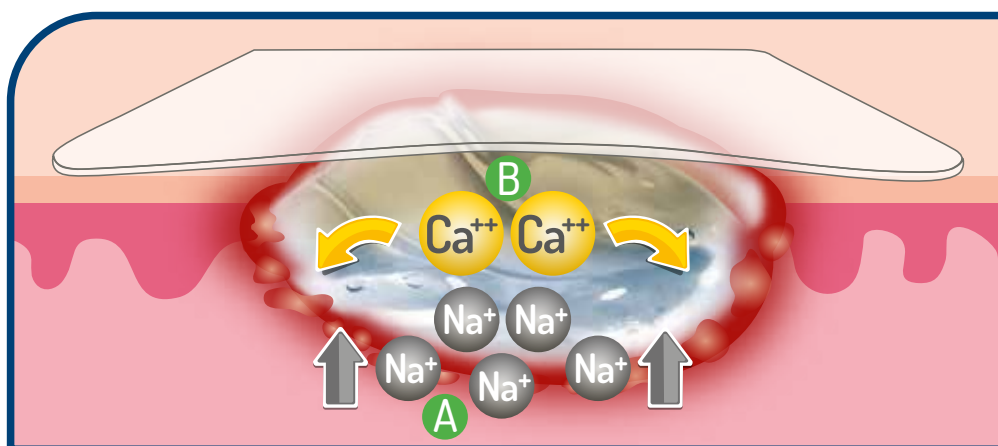

A • Assorbimento dell'essudato in eccesso dalla ferita nel bendaggio


Absorbs exudate

B • Formazione del gel mediante lo scambio di ioni

Gel formation by ion exchange




Silvermed

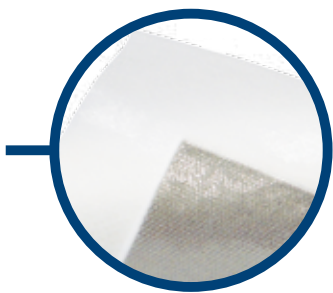

Medicazione idroattiva all'argento
micronizzato con bordo adesivo

Hydro-activated micronized silver dressing
with adhesive border


Silvermed sb

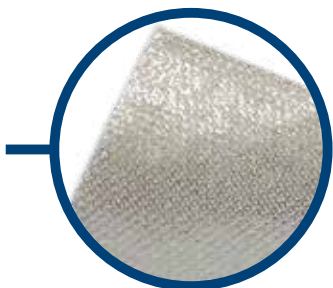

Medicazione idroattiva all'argento
micronizzato senza bordo adesivo

Hydro-activated silver micronized dressing
without adhesive border



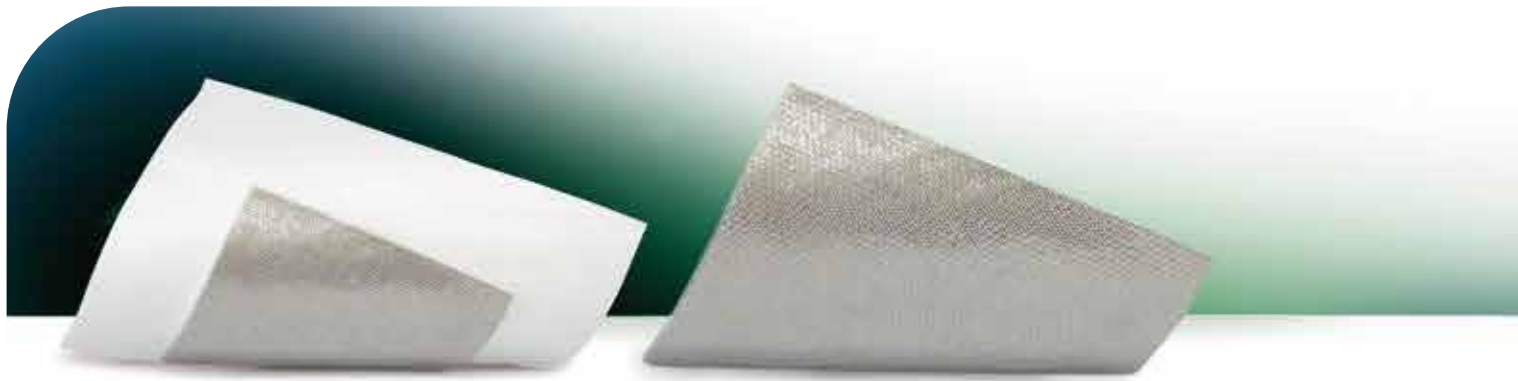

Silvermed

Medicazione sterile, adesiva, assorbente, non aderente con compressa centrale in argento, pronta all'uso. La compressa svolge un'azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell'argento micronizzato per la cicatrizzazione in ambiente umido. L'argento è idroattivato in maniera controllata dall'essudato. Gli ioni argento vengono rilasciati proporzionalmente alla quantità di essudato ed alla carica batterica direttamente nel letto della ferita.

Crea l'ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Silvermed è latex free.

Silvermed is a ready for use sterile island dressing with a central absorbent and non-adherent pad with silver ions. The pad has an antibacterial effect that uses silver advanced technology to promote healing in a moist controlled environment. Silver is hydro-activated in a controlled manner by exudate. Silver ions are released in proportion to the amount of exudate and bacterial burden directly into the wound bed. It creates a moist environment ideal for a rapid healing and acts as a barrier to bacterial penetration, preventing infection to the wound; Thanks to its metallic silver micronized and non-adherent layer it does not stick to the wound, making dressing change atraumatic. Silvermed does not release silver residues. Silvermed is latex free.



articolo	item no.	♀	misure	size	♀	conf.	pkg.
----------	----------	---	--------	------	---	-------	------

892063			cm 10 x cm 10			5 pz/pcs	
--------	--	--	---------------	--	--	----------	--

892066			cm 10 x cm 20			3 pz/pcs	
--------	--	--	---------------	--	--	----------	--

Altri formati disponibili su richiesta. [Other formats available on request.](#)

Indicazioni

Ustioni di grado intermedio, ferite e ulcere infette, ulcere da decubito, erosioni superficiali da sovrainfezioni, ulcere granuleggianti, zone di prelievo cutaneo, dermoabrasioni in genere.

Indicated for

Infected wounds, dry to minimal drainage wounds, partial thickness pressure ulcers, first and second degree burns, infected wounds and ulcers, skin erosion caused by over-infection, granulating ulcers, skin donor areas, dermabrasions in general.



latex free



argento micronizzato
micronized silver



bassa essudazione
low exudate



ipoallergenico
hypo-allergenic



facile da rimuovere
easy to remove

Medicazione idroattiva all'argento micronizzato

Hydro-activated silver micronized dressing

Silvermed sb

Medicazione sterile, senza bordo adesivo, assorbente, all'argento micronizzato, pronta all'uso. Svolge un'azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell'argento micronizzato per la cicatrizzazione in ambiente umido. L'argento è idroattivato in maniera controllata dall'essudato. Gli ioni argento vengono rilasciati proporzionalmente alla quantità di essudato ed alla carica batterica direttamente nel letto della ferita. Crea l'ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Silvermed sb è latex free.

Sterile dressing, without adhesive border, absorbent and non-adherent pad with silver ions. The pad has an antibacterial effect that uses silver advanced technology to promote healing in a moist controlled environment. Silver is hydro-activated in a controlled manner by exudate. Silver ions are released in proportion to the amount of exudate and bacterial burden directly into the wound bed. It creates a moist environment ideal for a rapid healing and acts as a barrier to bacterial penetration, preventing infection to the wound; Thanks to its metallic silver micronized and non-adherent layer it does not stick to the wound, making dressing change atraumatic. Silvermed sb does not release silver residues. Silvermed sb è latex free.

articolo	item no.	♀ misure	size	♀ conf.	pkg.
----------	----------	----------	------	---------	------

892070		cm 5 x cm 5		25 pz/pcs	
--------	--	-------------	--	-----------	--

892073		cm 10 x cm 10		5 pz/pcs	
--------	--	---------------	--	----------	--

892076		cm 10 x cm 20		3 pz/pcs	
--------	--	---------------	--	----------	--

Altri formati disponibili su richiesta. [Other formats available on request.](#)



facile da rimuovere
easy to remove



ipoallergenico
hypo-allergenic



bassa essudazione
low exudate



argento micronizzato
micronized silver



latex free



Silvermed – Silvermed sb

Medicazione idroattiva all'argento micronizzato
Hydro-activated silver micronized dressing

Proprietà e vantaggi

- Permeabile ad aria e vapore acqueo.
- Ipoallergenica.
- Morbida.
- Cambi atraumatici.
- Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna.
- Pronta all'uso e non necessita di attivazione.
- Stimola la formazione del tessuto di granulazione e la conseguente riepitelizzazione.
- Riduce la presenza di tessuti devitalizzati.
- Protegge la lesione da contaminazioni batteriche esogene.
- Mantiene la lesione nelle condizioni ottimali di umidità.

Controindicazioni

- Non usare su pazienti con nota sensibilità all'argento e su pazienti che devono essere sottoposti a risonanza magnetica.

Features

- Antimicrobial effect of silver reduces risk of infection.
- Prophylaxis against infection especially for wounds at high risk of infection.
- Biocompatible and complying to ISO 10993.


Property and benefits


- Permeable to air and water vapor.
- Hypoallergenic.
- Soft.
- Atraumatic change.
- Dressing adapts to any anatomical part of the body.
- It is ready to use and does not require any activation.
- It stimulates the formation of granulation tissue and consequently re-epithelialization.
- It reduces the amount of devitalized tissue.

Contraindications

- There are no absolute contraindications for using Silvermed.
- Do not use for individuals with known sensitivity to any of the dressing components.
- Due to presence of antimicrobial silver ions, the experience with neonates/small babies is limited.
- Do not use on patients who are undergoing MRI.

Silvermed e Silvermed sb stimolano il processo di guarigione
Silvermed and Silvermed sb stimulates the healing process

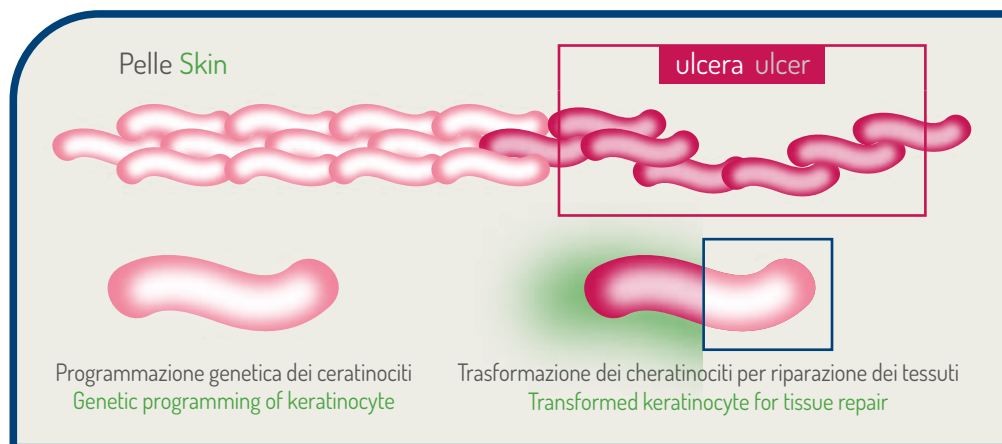

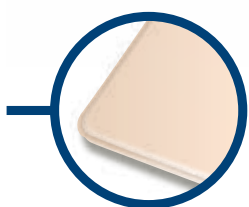


Euroderm foam

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare non adesiva



Euroderm foam plus sacral

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata per regione sacrale

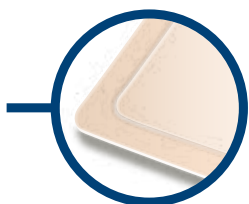

Euroderm foam plus

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare con bordo adesivo



Euroderm foam plus concave

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata per gomito e zone morfologicamente simili




Euroderm foam heel

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare conformata per tallone e zone morfologicamente simili



Euroderm foam cavity

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare cavitaria

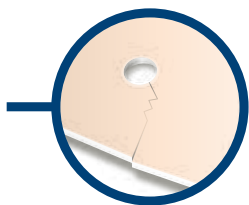

Euroderm foam tracheo

Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare per tracheostomia






Euroderm foam

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata con intera superficie idroattiva. Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente che garantisce l'assorbimento controllato dell'essudato, da un film esterno in poliuretano traspirante che evita la macerazione dell'area perilesionale e da un film in poliuretano perforato che non aderisce alla ferita consentendo la rimozione indolore e senza traumi. La medicazione si conforma perfettamente al letto della lesione promuovendo l'ambiente ideale per il processo di guarigione. L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di PU permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita. La particolare struttura "a bordo piatto" facilita l'applicazione di una medicazione secondaria di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano - Euroderm o Euroderm roll - o benda coesiva) e garantisce un'ulteriore protezione dalla fuoriuscita di liquidi. In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l'uso in combinazione con Hydromed gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni. La frequenza di cambio è legata alla tipologia della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche. Euroderm foam è latex free.

Indicazioni: Ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio, ferite post operatorie, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, lesioni con cute perilesionale particolarmente fragile e delicata, siti di prelievo cutaneo.



articolo	♀ misure	♀ conf.
893010	cm 10 x cm 10	10 pz
893012	cm 10 x cm 20	5 pz
893015	cm 15 x cm 15	5 pz
893020	cm 20 x cm 20	3 pz
892910	cm 10 x cm 10	5 pz

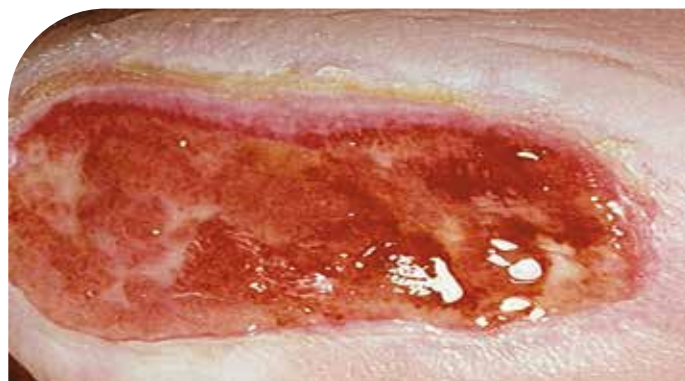

latex free



ipoallergenico

media essudazione



alta essudazione

Euroderm foam plus

Medicazione sterile con bordo adesivo ipoallergenico in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura stratificata che ne garantisce la permanenza anche su aree di difficile applicazione consentendo la rimozione atraumatica. La combinazione della schiuma con il film esterno in poliuretano rende Euroderm foam plus eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione. I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno del tampone in schiuma che si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo. Non usare su lesioni che presentano una cute perilesionale fragile. Euroderm foam plus può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare (garze, alginati, CMC), sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni. La frequenza di cambio è legata alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.


Euroderm foam plus è latex free.

Indicazioni: ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio, ferite chirurgiche, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutanee.

articolo	♀ misure	♀ conf.
893110	cm 10 x cm 10	10 pz
893112	cm 10 x cm 20	5 pz
893115	cm 15 x cm 15	5 pz
893118	cm 18 x cm 18	3 pz
893120	cm 20 x cm 20	3 pz



media essudazione

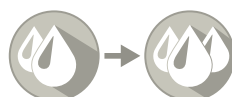

alta essudazione

ipoallergenico



latex free





Euroderm foam hell

Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul tallone e zone morfologicamente simili.

Medicazione composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente, da un film di poliuretano traspirante impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore e da un film in poliuretano perforato che a contatto con la ferita non aderisce consentendo la rimozione indolore.

Euroderm foam heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi su tessuti fragili.

L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore invece crea l'effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort e protezione al paziente.

Euroderm foam heel è latex free.

Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione in pazienti con scarsa mobilità.



articolo	♀ misure	♀ conf.
----------	----------	---------

893060	cm 12 x cm 13	3 pz
--------	---------------	------



latex free



ipoallergenico

media essudazione



alta essudazione

Euroderm foam tracheo

Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata con taglio e foro centrale per l'innesto di canule per tracheostomia o drenaggio.

È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno della schiuma. La medicazione si conforma perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente.


L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.


Euroderm foam tracheo è latex free.

Indicazioni: Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

articolo	♀ misure	♀ conf.
893040	cm 8,5 x cm 8,5	10 pz
893035	cm 6,5 x cm 6,5	10 pz

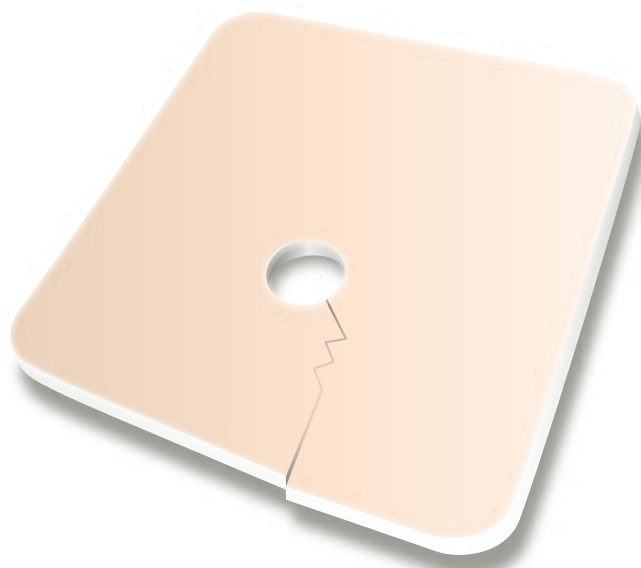

media essudazione

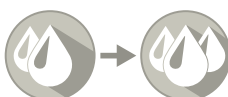

alta essudazione

ipoallergenico



latex free



Euroderm foam plus sacral

Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata che associa alle caratteristiche di Euroderm foam la praticità di una conformazione che si adatta alla regione sacrale.

La medicazione è composta da un film di poliuretano adesivo, impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile all'aria, da uno strato assorbente di Poliuretano idrocellulare, da uno strato di Poliuretano perforato che non aderisce alla ferita e consente una rimozione indolore e senza trauma.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Euroderm foam plus sacral può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavarie, in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose in combinazione con Hydromed gel.

La medicazione può rimanere in situ fino a 5 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.


Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.

Euroderm foam plus sacral è latex free.

Indicazioni: Ulcere da pressione nell'area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.

articolo misure conf.

893150 cm 22 x cm 22 3 pz

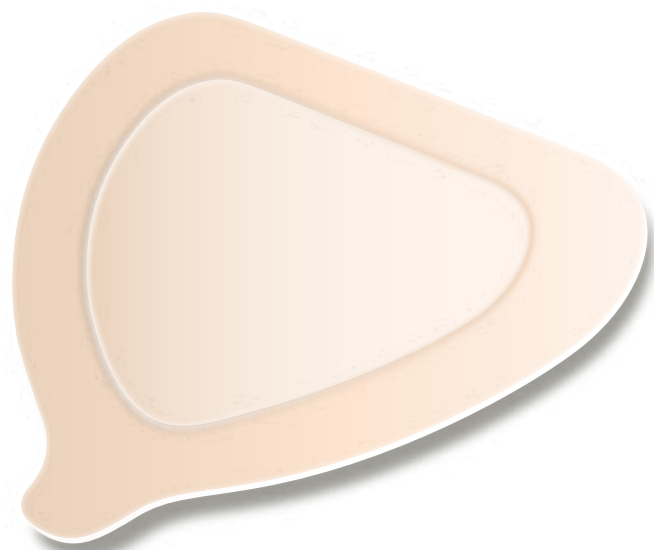

media essudazione



alta essudazione

ipoallergenico



latex free



Medicazione in schiuma di poliuretano idrocellulare

Euroderm foam plus concave

Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata la cui conformazione si adatta al tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili. La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Non usare la medicazione in combinazione con agenti ossidanti quali acqua ossigenata e ipoclorati.

Euroderm foam plus concave può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e, in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed gel.

La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni; si consiglia comunque una frequente ispezione.

Il cambio della medicazione è legato alle tipologie della lesione, alla quantità di essudato ed alle condizioni cliniche.

Euroderm foam plus concave è latex free.

Indicazioni: Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione in pazienti con scarsa mobilità, ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.


articolo

♀ misure

♀ conf.

893140

cm 18 x cm 16,5 3 pz

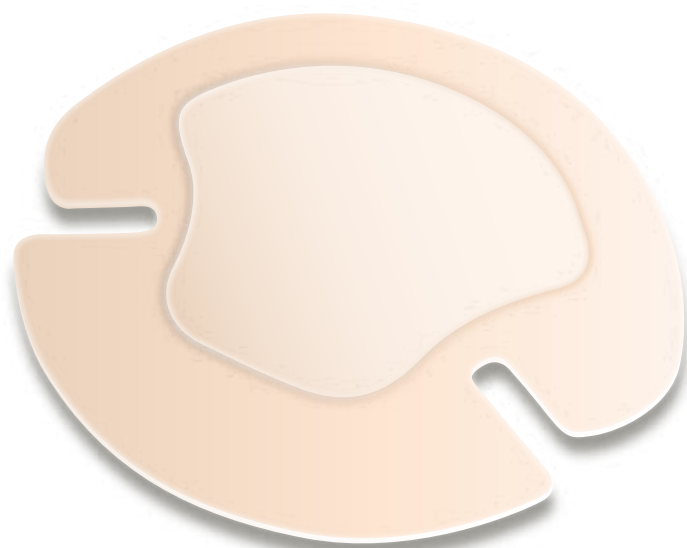

media essudazione



alta essudazione


ipoallergenico



latex free



Il sistema d'elezione per il trattamento di lesioni cutanee da moderatamente ad altamente essudanti

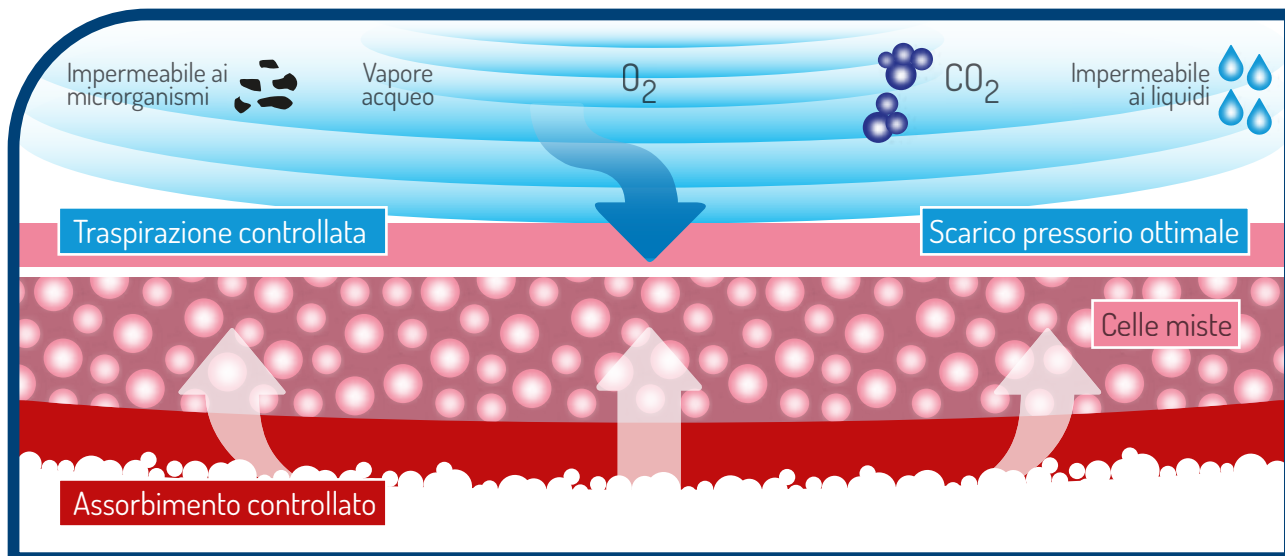

Euroderm foam cavity

Medicazione sterile, cavitaria, non adesiva, in schiuma di poliuretano con intera superficie idroattiva, altamente assorbente, per media o alta produzione di essudato.

Euroderm foam cavity si conforma perfettamente alla sede della lesione ed alle diverse sedi anatomiche del corpo con eccellente comfort per il paziente, non aderisce alla superficie della ferita.

Il prodotto presenta una buona conformabilità e morbidezza. Inoltre, lo spessore della schiuma crea l'effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione e contrasta le eventuali forze di frizione.

Euroderm foam cavity è latex free,

Indicazioni: Da utilizzare per il trattamento di ferite cavitare quali siti di prelievo cutaneo, lesioni da decubito, ferite da escissione di fistole e ascessi, ulcere venose, ulcere diabetiche, ferite da trauma e post-operatorie, ferite deiscenti.

Euroderm foam cavity può essere applicato mediante una medicazione secondaria di fissaggio.

In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l'uso in combinazione con Hydromed gel.

articolo	♀ misure	♀ conf.
----------	----------	---------

893205	Ø cm 5	10 pz
--------	--------	-------

893210	Ø cm 10	5 pz
--------	---------	------

893212	cm 7,5 x cm 10	3 pz
--------	----------------	------



latex free




ipoallergenico



media
essudazione



alta
essudazione

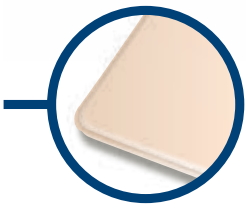


Euroderm foam

Multilayered hydrocellular polyurethane foam with full hydroactive area



Euroderm foam plus sacral

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the sacral area

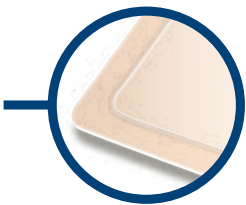

Euroderm foam plus

Multilayered hydrocellular polyurethane foam with adhesive border



Euroderm foam plus concave

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for anatomical areas




Euroderm foam heel

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for anatomical areas



Euroderm foam cavity

Non-adhesive polyurethane foam dressing for cavity wound

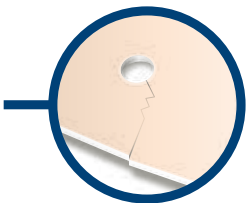

Euroderm foam tracheo

Key-hole apertured hydrocellular polyurethane foam for tracheostomy





Euroderm foam

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam and of a breathable polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable. Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the wound-bed maintaining the optimal moist wound environment for healing process. The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.

The distinctive "flat-edged" design facilitates the applications of a secondary fixation dressing (tape, polyurethane film – Euroderm or Euroderm roll – or cohesive bandage) and provides an additional protection against leakage. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.


Euroderm foam reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving excellent patient comfort and protection. For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.

The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical condition, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, vascular ulcers, 1st and 2nd degree burns, wounds on fragile skin, donor sites.



item no.	size	pkg.
893010	cm 10 x cm 10	10 pcs
893012	cm 10 x cm 20	5 pcs
893015	cm 15 x cm 15	5 pcs
893020	cm 20 x cm 20	3 pcs
892910	cm 10 x cm 10	5 pcs

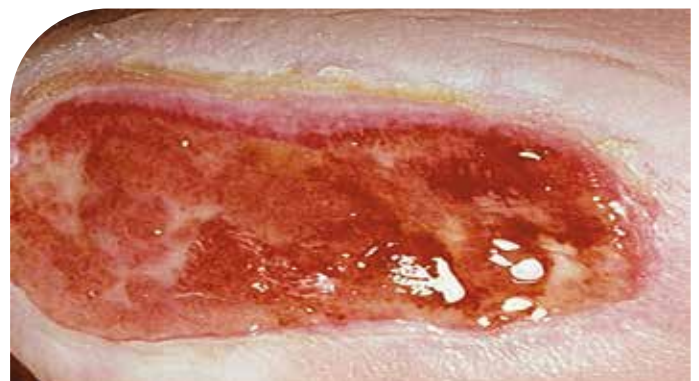

latex free



hypo-allergenic

moderate exudate



heavy exudate

Multilayered hydrocellular polyurethane foam

Euroderm foam plus

Multilayered hydrocellular polyurethane foam combining the features of Euomed foam with an adhesive border which grants an effective fixation, even on difficult-to-dress areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent foam pad.


Fluids are uniformly distributed into polyurethane foam pad which, thus, perfectly conforms to the wound-bed maintaining the optimal moist wound environment for healing process. The high absorption of the foam dressing provides superior fluids management for a longer period of time. This minimizes discomfort for the patient and results more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect. Euroderm foam plus reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do not use to dress wounds with a fragile periwound area. Euroderm foam plus can be used as a secondary dressing in combination with cavitory dressing (gauzes or alginates – Eurosorb roll), or in combination with compressive bandages for the treatment of arterial and venous stasis leg ulcers. For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, vascular ulcers, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

item no.	size	pkg.
893110	cm 10 x cm 10	10 pcs
893112	cm 10 x cm 20	5 pcs
893115	cm 15 x cm 15	5 pcs
893118	cm 18 x cm 18	3 pcs
893120	cm 20 x cm 20	3 pcs



moderate exudate

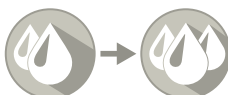

heavy exudate

hypo-allergenic



latex free





Euroderm foam heel

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam for the management of wounds on the heel or any similar anatomical areas.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Euroderm foam heel is non-adhesive. This allows an atraumatic and pain free dressing removal causing minimal distress to the patient, even on fragile tissues.

The high absorption of the foam dressing provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results more cost effective.

The thickness of the foam ensures a cushioning effect.

Euroderm foam heel reduces pressure over the heel area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving excellent patient comfort and protection. It needs a secondary fixation dressing (tape, polyurethane films – Euroderm or Euroderm roll- or cohesive bandage).

For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. The dressing can stay in place for up to 7 days. The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with partial ability to move.



item no.	size	pkg.
893060	cm 12 x cm 13	3 pcs



latex free



hypo-allergenic

moderate exudate



heavy exudate

Euroderm foam tracheo

“Key-hole” apertured hydrocellular polyurethane foam designed to fit neatly around the tracheostomy or the drainage tube.

Foam dressing consisting of an highly absorbent soft polyurethane foam layer and of a breathable polyurethane film which is water and bacteria impermeable but vapour permeable.

Fluids are uniformly distributed into the foam dressing which, thus, perfectly conforms to the tracheostomy or drainage tube assuring superior fluid management for a longer period of time.



This minimized discomfort for the patient and results more cost effective

The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Fluids management around tracheostomy and drainage sites.

item no.	size	pkg.
893040	cm 8,5 x cm 8,5	10 pcs
893035	cm 6,5 x cm 6,5	10 pcs

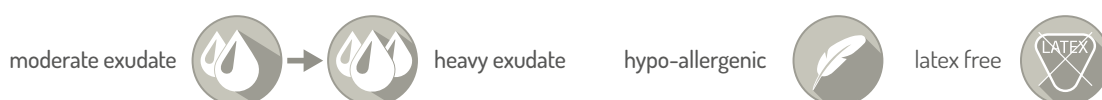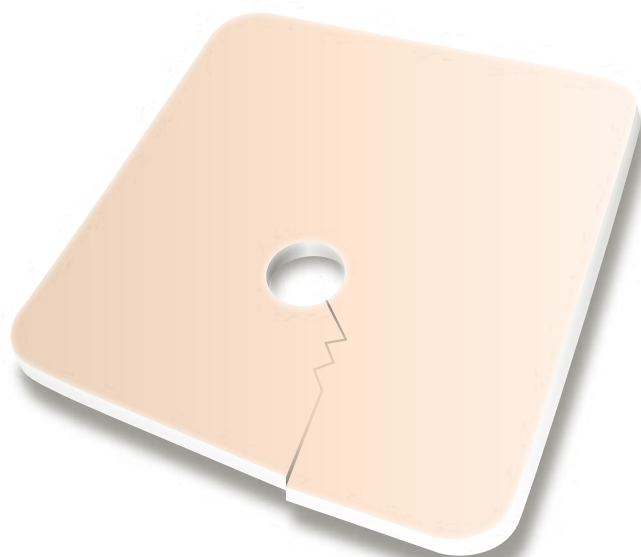

Euroderm foam plus sacral

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the sacral area. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad.

The adhesive polyurethane top layer acts as barrier against external contaminations and fluids, therefore making Euroderm foam plus sacral well suited for wounds of the sacral area where a waterproof covering is recommended.

The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction' strengths and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results more cost effective. The thickness of the foam ensures a cushioning effect.

Euroderm foam plus sacral reduces pressure over the sacral area, thereby reducing friction and sheer stresses and giving excellent patient comfort and protection.


Euroderm foam plus sacral can be used as a secondary dressing in combination with cavitory dressing (gauzes or alginates – EuroSorb Roll) and for the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel.

The dressing can stay in place for up to 5 days; anyhow a frequent inspection of the wound is recommended. The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.

Indications: Pressure ulcers of the sacral area, stage I-IV pressure ulcers, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

item no.	size	pkg.
----------	------	------

893150	cm 22 x cm 22	3 pcs
--------	---------------	-------

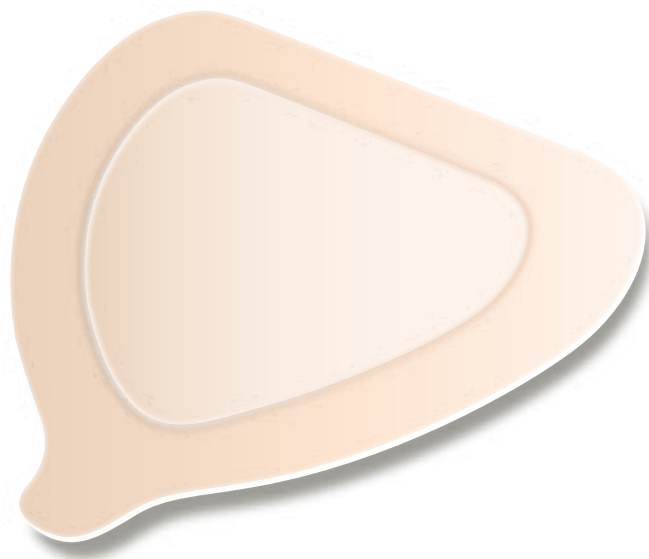

moderate exudate



heavy exudate

hypo-allergenic



latex free



Multilayered hydrocellular polyurethane foam

Euroderm foam plus concave

Multilayered hydrocellular shaped polyurethane foam with adhesive border combining the features of Euroderm foam with the ease of an anatomical design well suited for the management of wounds on the heel or on any similar anatomical areas. Foam dressing consisting of an hypoallergenic semi-permeable adhesive polyurethane top layer and of a soft highly absorbent shaped foam pad. The anatomical design prevents accidental removals of the dressing caused by friction' strengths and provides superior fluid management for a longer period of time. This minimized discomfort for the patient and results more cost effective. The thickness of the foam ensures cushioning effect.

Euroderm foam plus concave reduces pressure over the wound area, thereby reducing friction and shear stresses and giving excellent patient comfort and protection. Do not use to dress wounds with a fragile periwound area. Euroderm foam plus concave can be used as a secondary dressing in combination with cavitory dressing (gauzes or alginates – EuroSorb Roll), or in combination with compressive bandages for the treatment of arterial and venous stasis leg ulcers.


For the treatment of necrotic or fibrinous wounds it is advisable to use it in combination with Hydromed gel. The dressing can stay in place for up to 7 days.

The frequency of change results from the clinical conditions, the type of wound and the quantity of exudates.


Indications: Diabetic foot ulcers, stage I-IV pressure ulcers, prevention of pressure ulcers on a patient with partial ability to move, surgical wounds, 1st and 2nd degree burns and donor sites.

item no.	size	pkg.
----------	------	------

893140	cm 18 x cm 16,5	3 pcs
--------	-----------------	-------

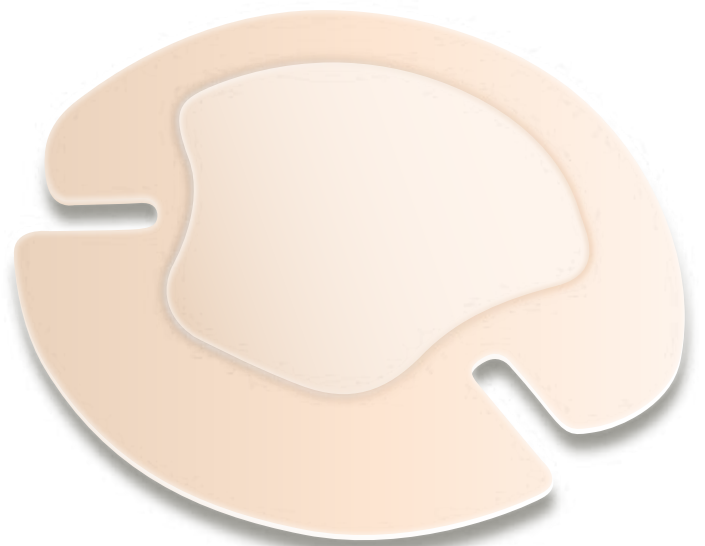

moderate exudate

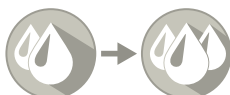

heavy exudate


hypo-allergenic



latex free



The best method for management of wounds from light high exudate

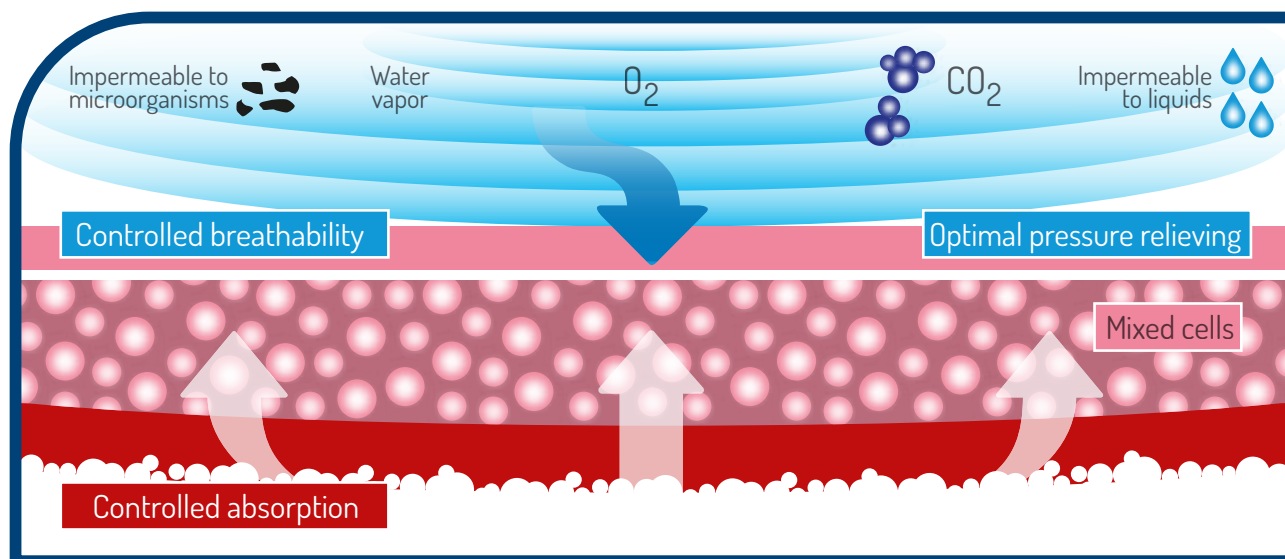

Euroderm foam cavity

Sterile, non-adhesive polyurethane foam dressing composed by an hydroactive surface.

It is highly absorbent, for medium or high level of exudate.

Euroderm cavity foam conforms perfectly to the cavity wound and to the different anatomical part of the body with excellent comfort for the patient, it does not adhere to the wound surface.

The product has a good conformability and softness.

Furthermore, the thickness of the foam creates the bearing effect, which reduces the pressure on the lesion and avoid friction.

Euroderm foam cavity is latex free.

Indicazioni: To be used for the treatment of cavity wounds such as skin donor sites, pressure ulcers, wounds after excision of fistulas and abscesses, venous ulcers, diabetic ulcers, trauma and postoperative wounds, dehiscent wounds. Euroderm foam cavity can be applied using a secondary fixation dressing.

In the occurrence of necrotic or fibrinous tissue injury, it is recommended to use in combination with Hydromed gel.

item no.	size	pkg.
893205	Ø cm 5	10 pcs
893210	Ø cm 10	5 pcs
893212	cm 7,5 x cm 10	3 pcs



latex free



hypo-allergenic




moderate exudate




heavy exudate



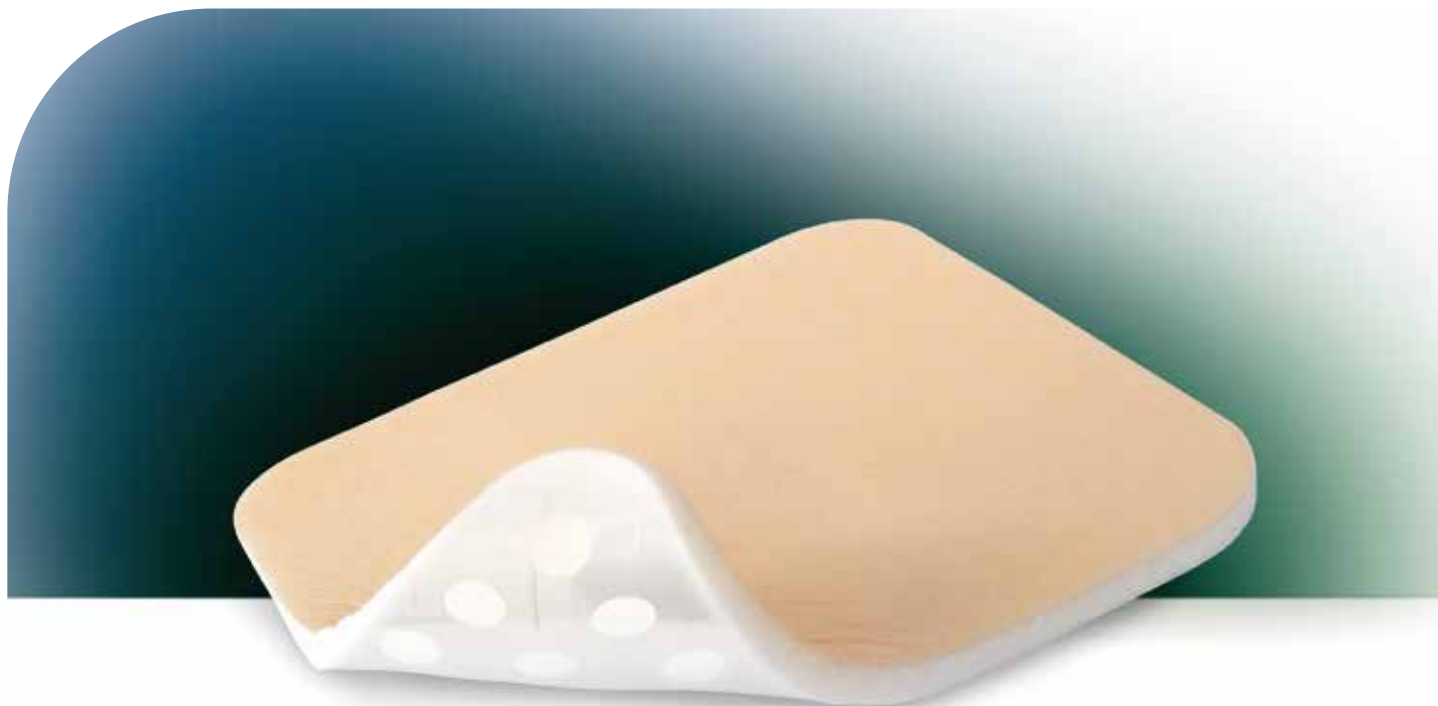


Euroderm foam silicone

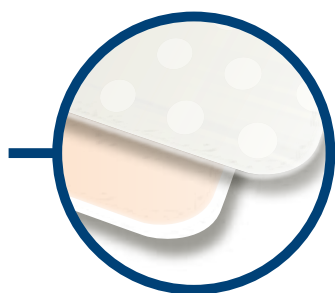

Medicazione sterile altamente assorbente, non adesiva, in schiuma di poliuretano e morbido gel di silicone

Highly absorbent dressing made of polyurethane foam and soft silicone gel

Euroderm foam plus silicone

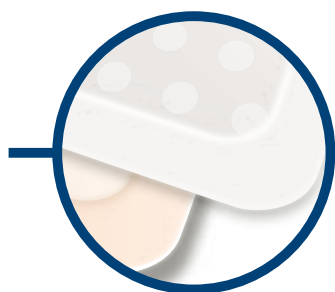

Medicazione sterile altamente assorbente, con bordo adesivo, in schiuma di poliuretano e morbido gel di silicone

Highly absorbent dressing made of polyurethane foam and soft silicone gel with adhesive border





Euroderm foam silicone

Medicazione sterile altamente assorbente e atraumatica, non adesiva, in schiuma di poliuretano compresa tra un foglio superiore di poliuretano e uno strato sagomato in morbido gel di silicone in contatto con la ferita. La medicazione è composta da un film di poliuretano traspirante, impermeabile ai liquidi ed ai batteri ma permeabile ai gas e al vapore acqueo, con rilevante capacità traspirante e funzione di barriera alle contaminazioni esterne, da uno strato in schiuma di PU ad elevata capacità assorbente per media o alta produzione di essudato, mentre lo strato di contatto con la ferita è in morbido gel di silicone, per evitare l'adesione alla ferita e consentire la rimozione senza dolore e senza traumi e il trasferimento degli essudati allo strato di schiuma assorbente. La combinazione della schiuma e del film esterno in poliuretano con lo strato interno di silicone, rende Euroderm foam silicone eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione. Lo strato assorbente grazie all'esclusiva struttura a celle di dimensioni miste, garantisce un assorbimento controllato dell'essudato, in quanto questo, una volta assorbito, viene trattenuto e uniformemente distribuito all'interno della schiuma anche sotto pressione, evitando così che l'essudato si accumuli e si sposti verso il tessuto circostante, senza deformarsi. La schiuma in poliuretano espleta anche un effetto cuscinetto. Il film esterno ipoallergenico in poliuretano, grazie alla sua elevata traspirabilità, consente l'evaporazione degli essudati assorbiti aumentando la capacità di gestione dei fluidi da parte della schiuma in generale ed evita la macerazione dell'area perilesionale. L'impermeabilità del film impedisce all'acqua di penetrare all'interno consentendo di bagnare la medicazione una volta applicata. Il film in gel di silicone a contatto con la ferita previene l'adesione della schiuma alla ferita, consente la rimozione senza provocare dolore o traumi e consente il trasferimento dell'essudato dalla ferita alla schiuma prevenendo la macerazione della pelle. Euroderm foam silicone si conforma perfettamente al letto della lesione ed alle diverse sedi anatomiche del corpo con eccellente comfort per il paziente. I bordi della medicazione non si arrotolano ed il prodotto presenta una buona conformabilità e morbidezza. Inoltre, lo spessore della schiuma crea l'effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione e contrasta le eventuali forze di frizione. Euroderm foam silicone è latex free.

Destinazione d'uso: Da utilizzare per la prevenzione di ulcere da pressione dal I al IV stadio e ulcere venose agli arti inferiori, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo, lesioni da decubito e ferite non infette con media o alta produzione di essudato in fase di granulazione o di riepitelizzazione. Euroderm Foam può essere applicato mediante una medicazione secondaria di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano - Euroderm o Euroderm Roll - o benda coesiva). In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l'uso in combinazione con Hydromed Gel.



latex free



ipoallergenico
hypoallergenic

media essudazione
moderate exudate



alta essudazione
high exudate

Medicazione sterile in schiuma di poliuretano e morbido gel di silicone Highly absorbent dressing made of polyurethane foam and soft silicone gel

Euroderm foam silicone is an highly absorbent dressing made of polyurethane foam with polyurethane top sheet and perforated soft silicone gel wound contact layer. The dressing does not adheres to wound bed thereby minimizing disruption of healing tissue. The outer surface is made of breathable polyurethane film, which is waterproof, bacteria proof and viral barrier, while the wound contact layer is perforated soft silicone gel layer to prevent adherence to the wound, allow painless and atraumatic removal allowing the passage of exudates to the absorbent foam layer.

Advantages

- Perforated silicone film, allow free passage of wound exudate to the foam so prevents skin maceration.
- Excellent Absorption capacity
- Gentle soft Silicone gel allows painless removal.
- Provides a cushioning effect.
- Maintains moist wound Optimal MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate)
- Long wear time and minimal patient trauma.
- High fluid handling capacity.
- Cost effective

Indications:

For the management of moderate to heavily exuding partial to full thickness wounds including:

- Suitable for use on fragile skin.
- Stage I - IV pressure ulcers, neuropathic (diabetic), Venous and Arterial leg ulcers.
- Diabetic foot ulcers.
- Suitable for use with compression.
- First/Second degree burns.
- Skin tears.
- Surgical wounds.
- Donor sites.

Contraindications

Do not use Euroderm foam silicone dressings with oxidizing agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide, as these can break down the absorbent polyurethane component of the dressing.


Precaution

In case of infection, Euroderm foam silicone still can be used but under medical supervision and with antimicrobial conjunctive therapy.

Frequency of Change

The interval between dressing changes will normally be determined by the degree of exudate produced but the dressing may be left undisturbed for several days on clean lightly exuding wounds.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
893310		cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
893312		cm 10 x cm 20	5 pz/pcs
893315		cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
893320		cm 20 x cm 20	3 pz/pcs

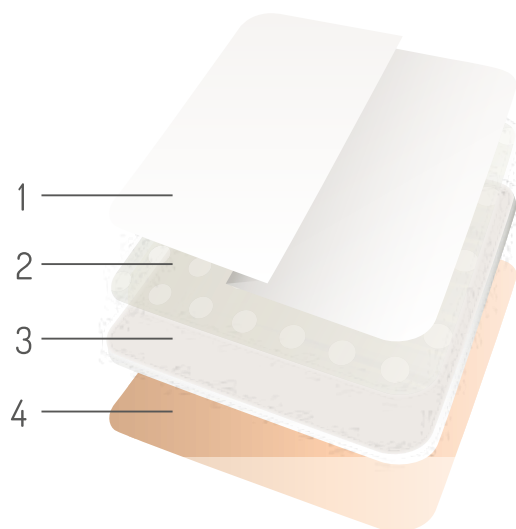

- 1 - Carta protettiva - Release Liner
- 2 - Film di gel in silicone perforato - Perforated silicone Gel Layer
- 3 - Schiuma di poliuretano - Polyurethane Foam
- 4 - Film di poliuretano - Polyurethane Film

Euroderm foam plus silicone

Medicazione sterile con uno strato perforato adesivo in morbido gel di silicone che si estende oltre il perimetro della compressa in schiuma di poliuretano idrocellulare ad elevata capacità assorbente. Questo facilita il fissaggio senza nastro adesivo o mediante una medicazione secondaria e consente la rimozione senza traumi della medicazione. La struttura è completata dallo strato più esterno della medicazione in doppia lamina di non tessuto in poliuretano dalle proprietà antibatteriche, antivirale e impermeabile con rilevante capacità traspirante e con funzione di barriera alle contaminazioni esterne.

La combinazione della schiuma in poliuretano con lo strato adesivo in morbido gel di silicone e il film esterno in doppia lamina di non tessuto in poliuretano rende Euroderm foam plus silicone eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione.

Lo strato assorbente grazie all'esclusiva struttura a celle di dimensioni miste della schiuma in poliuretano, garantisce un assorbimento controllato dell'essudato, in quanto questo, una volta assorbito, viene trattenuto e uniformemente distribuito all'interno della schiuma anche sotto pressione, evitando così che l'essudato si accumuli e si sposti verso il tessuto circostante senza deformarsi. Inoltre espleta anche un effetto cuscinetto.


Il film esterno ipoallergenico in doppia lamina di non tessuto in poliuretano, grazie alla sua elevata traspirabilità, consente l'evaporazione degli essudati assorbiti aumentando la capacità di gestione dei fluidi da parte della schiuma in generale.

Lo strato adesivo perforato in morbido gel di silicone a contatto con la ferita consente: la rimozione senza provocare dolore o traumi, il trasferimento dell'essudato dalla ferita alla schiuma prevenendo la macerazione della pelle.

Euroderm foam plus silicone si conforma perfettamente al letto della lesione ed alle diverse sedi anatomiche del corpo con eccellente comfort per il paziente.

Inoltre, lo spessore della schiuma crea l'effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione e contrasta le eventuali forze di frizione garantendo un assorbimento verticale dei fluidi.

Euroderm foam plus silicone è latex free.

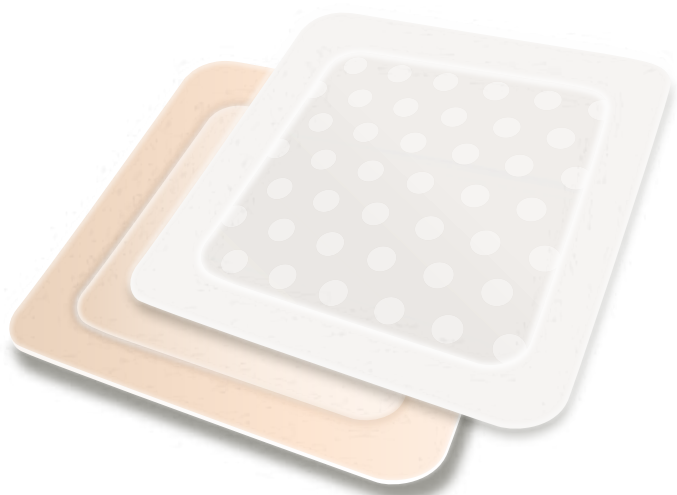

Destinazione d'uso: Da utilizzare per la prevenzione di ulcere da pressione dal I al IV stadio, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo, lesioni da decubito e ferite non infette con media o alta produzione di essudato in fase di granulazione o di riepitelizzazione.

Euroderm foam silicon plus può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare (garze o alginati - Eurosorb Roll), sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere e, in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed Gel.

media essudazione
moderate exudate



alta essudazione
high exudate

ipoallergenico
hypoallergenic



latex free



Medicazione sterile in schiuma di poliuretano e morbido gel di silicone Highly absorbent dressing made of polyurethane foam and soft silicone gel

Euroderm foam plus silicone is an absorbent, polyurethane foam dressing laminated with perforated soft silicone gel wound contact layer. This island adhesive dressing allows easy fixation without the use of traditional adhesive tapes or fixation dressing and provides an atraumatic-dressing removal. The outermost layer of the dressing is made of a bi-laminate polyurethane, which is waterproof, bacteria proof and virus proof.

Features

- The soft Silicone gel layer allows atraumatic dressing removal.
- The perforated silicone film allows free passage of wound exudate to the foam so prevents skin maceration.
- High absorption capacity polyurethane foam also provides a cushioning effect.
- Highly breathable top sheet allows evaporation of absorbed exudates, thus enhances fluid handling capacity of the dressing.
- Being waterproof, the top layer prevents strike through and allows showering while the dressing is in place.

Indications:

Euroderm foam plus silicone is suitable for dressing many types of exuding wounds including leg and pressure ulcers, surgical incisions and traumatic wounds resulting in skin loss, also may be used under compression bandaging.

Contraindications

Do not use Euroderm foam plus silicone dressings with oxidizing agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide, as these can break down the absorbent polyurethane component of the dressing.

Precaution

In case of infection, Euroderm foam plus silicone still can be used but under medical supervision and with antimicrobial conjunctive therapy.

Frequency of Change

The interval between dressing changes will normally be determined by the degree of exudate produced but the dressing may be left undisturbed for several days on clean lightly exuding wounds.

How we supply it

Euroderm foam plus silicone is supplied individually wrapped in heat sealable pouch, sterilized by ethylene oxide.


articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf.pkg.
----------	----------	---------------	-------------

893410		cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
--------	--	---------------	-----------

893412		cm 10 x cm 20	5 pz/pcs
--------	--	---------------	----------

893415		cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
--------	--	---------------	----------


893420		cm 20 x cm 20	3 pz/pcs
--------	--	---------------	----------

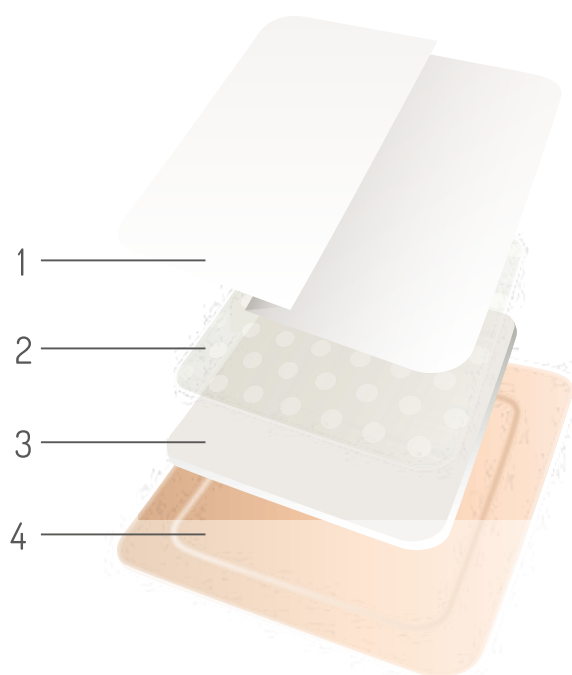


- 1 - Carta protettiva - Release Liner
- 2 - Film di gel in silicone perforato - Perforated silicone Gel Layer
- 3 - Schiuma di poliuretano - Polyurethane Foam
- 4 - Film di poliuretano - Polyurethane Film

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com



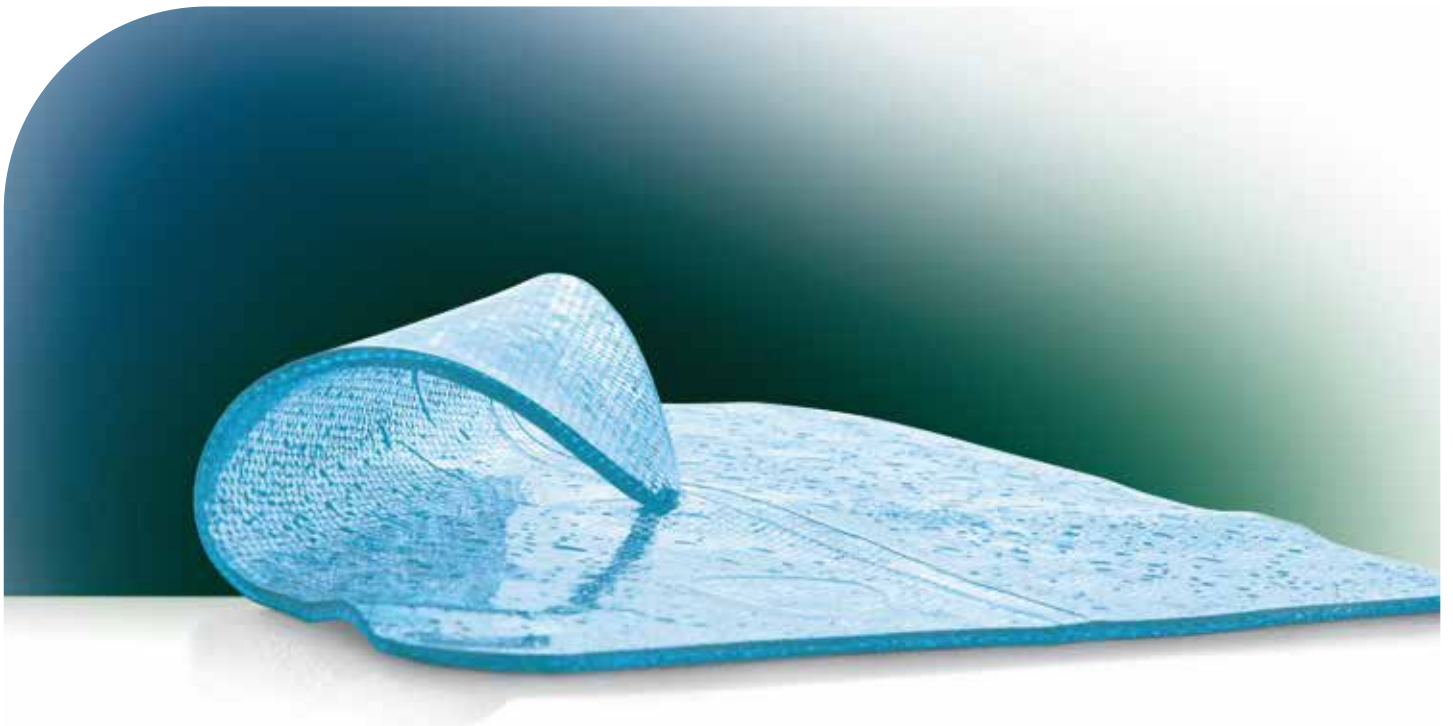

Hydromed

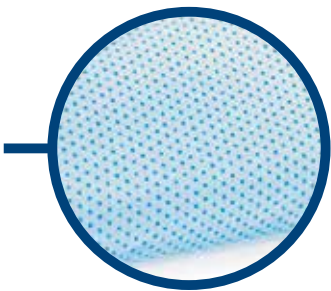

Medicazione sterile in gel ad alto contenuto d'acqua

Sterile dressing with high water content gel

Hydromed gel



Gel amorfo idrofilo sterile trasparente costituito da acqua, alginato di calcio, carbossimetilcellulosa

Sterile transparent amorphous gel suitable for the removal of necrotic tissue






Hydromed

Hydromed è una medicazione in gel sterile trasparente con un contenuto di acqua superiore al 70%. Hydromed crea un ambiente umido che contribuisce ad una cicatrizzazione ottimale, riduce sensibilmente la sintomatologia dolorosa, stimola l'angiogenesi. Applicato sulla lesione, dona un immediato effetto rinfrescante e lenitivo, favorisce un rapido sbrigliamento delle necrosi secche e l'idratazione delle escare, assorbe e trattiene gli essudati. Hydromed è permeabile al vapore acqueo, al gas ed alle piccole molecole proteiche ma impermeabile ai batteri, pertanto riduce notevolmente il rischio di infezione da contaminazione esterna. Hydromed viene rimosso in maniera atraumatica e senza rilascio di residui. La compressa non aderisce alla cute sottostante perché altamente idratante e protettiva ed ha un effetto cuscinetto. Ciò favorisce il processo di granulazione e riepitelizzazione senza danneggiare i tessuti. Può essere utilizzato nelle ustioni di I e II grado, per il trattamento di lesioni con fondi necrotici e fibrinosi. Hydromed è latex free.

Hydrogel dressing designed to manage pain, moisture and protease activity in low exudate or sloughy wounds as absorb quickly and locally. This reduces the risk of periwound maceration. Suitable for: 1st and 2nd degree burns, abrasions,dermabrasions,radiodermatitis,tirpid wounds and ulcers with fibrinous or necrotic bases. Refreshing. Unlike typical sheet hydrogels, hydromed absorb quicly and locally. This reduces the risk of periwound maceration. Hydromed is latex free.

articolo **item no.** misure **size** conf. **pkg.**

892013	cm 10 x cm 10	5 pz/pcs
892015	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
892017	cm 20 x cm 20	3 pz/pcs

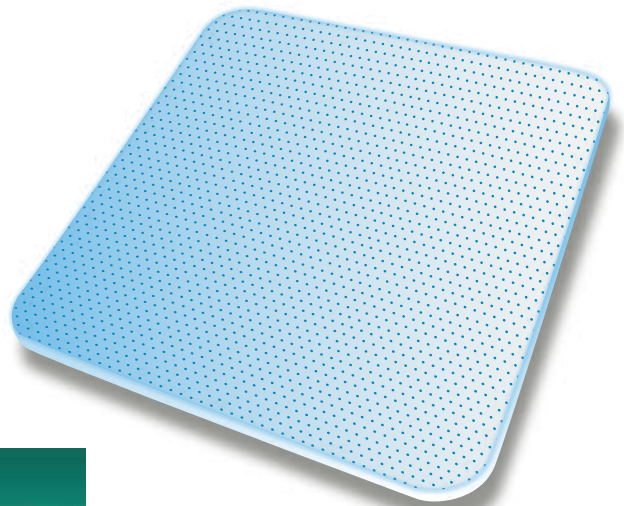

latex free



rinfrescante
refreshing



non emana
cattivi odori
does not release
unpleasant odours

bassa
essudazione
low exudate



media
essudazione
moderate exudate

Medicazione sterile in gel ad alto contenuto d'acqua
Sterile dressing with high water content gel
Gel amorfo idrofilo sterile trasparente • Sterile transparent amorphous gel

Hydromed gel

Hydromed gel è un gel amorfo, viscoso, sterile e trasparente, costituito da > 70% di acqua, alginato di calcio, carbossimetilcellulosa. Ha proprietà isotoniche, ipoallergeniche, lenitive. Applicato sulla lesione reidrata i tessuti necrotici rimuovendoli delicatamente, facilita il "debridement" autolitico ed assorbe l'eccesso di essudato dalla ferita.

Il gel ricrea un ambiente umido sulla superficie della lesione, impedendo la formazione di escare ed accelerando la migrazione delle cellule epiteliali.

Hydromed gel non è aderente e può essere rimosso tramite irrigazione con soluzione fisiologica, senza danneggiare il tessuto fragile neoformato o causare traumi al paziente. Hydromed gel è utilizzato per la detersione autolitica delle lesioni cutanee, quali ulcere da decubito e degli arti inferiori, ferite cavitare, e sedi di trapianto cutaneo, per il trattamento di lesioni con tessuti necrotici e fibrinosi. Può essere utilizzato nelle ustioni di primo e secondo grado.

Hydromed gel è latex free.

Sterile transparent amorphous gel suitable for the removal of necrotic tissue.

The gel creates a moist wound environment, preventing eschar formation and encouraging healing. By keeping fragile granulation tissue moist, the gel helps to create a moist wound healing environment, allowing the migration of epithelializing cells.

Hydromed gel is latex free.

Features

- Debriding action: Hydromed gel rehydrates necrotic tissue and aids debridement.
- Desloughing action: Hydromed gel absorbs slough and exudate without damaging fragile granulation tissue.
- Creates moist wound healing environment: Hydromed gel helps to create an optimal moist wound management environment, which promotes healing, reduces the likelihood of scarring and helps soothe pain.
- Stable and counteract leakage and maceration.
- Easy to remove. The gel is easy to remove due to high cohesion even after absorption of debris and exudate.
- Good donation properties.
- High viscosity.

Indications

- Hydromed gel is primarily intended for the treatment of necrotic and sloughy wounds, e.g. leg ulcers, pressure ulcers, cavity wounds, leg ulcers, and non-infected diabetic foot ulcers.
- Hydromed gel may also be used on 1st and 2nd degree burns.



articolo item no. ♀ misure size ♀ conf. pkg.

501705

Tubo da 15 gr

1 pz/pkg

bassa essudazione
low exudate



idratante
hydrating



latex free



Hydromed

Medicazione sterile in gel ad alto contenuto di acqua
Sterile dressing with high water content gel

Indicazioni

- Grazie alla sua struttura tridimensionale e all'alto contenuto di acqua, Hydromed viene utilizzato per ulcere con fondo fibrinoso o necrotico, per il "debridement" del tessuto necrotico, per ustioni di I e II grado, radiodermiti, ferite torpide, ustioni solari, lifting facciale o altre procedure di chirurgia plastica.

Controindicazioni


- Hydromed non deve essere utilizzato su ferite infette né ustioni di terzo grado. Inoltre esso non deve essere utilizzato su ferite altamente essudanti né su muscoli o ossa e tendini sporgenti.

Indications

- Suitable for treatment of chronic and slow healing wounds in granulation epitheliazation phase.
- Due to a three dimensional structure and high water content Hydromed is suitable for use in debriding and for secondo-degree burns.

Contraindications

- Hydromed should not be used on infect wounds nor on third degree burns.
- Also they should not be used on highly exuding wounds nor on exposed muscle, bones nor tendons.

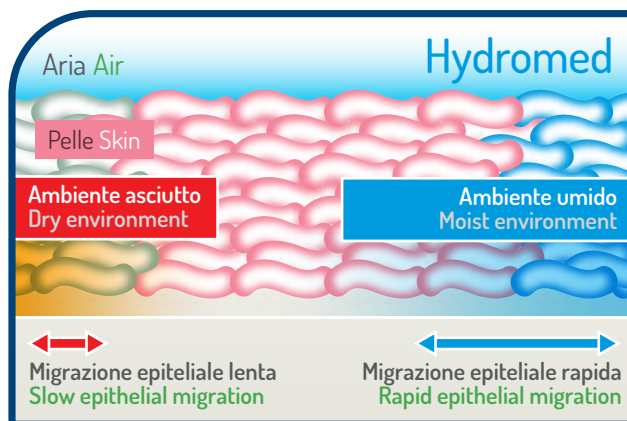

Hydromed gel

Gel amorfo idrofilo sterile trasparente costituito da acqua, alginato di calcio, carbossimetilcellulosa

Sterile transparent amorphous gel suitable for the removal of necrotic tissue

Vantaggi

- Facile da applicare e da rimuovere.
- Reidrata i tessuti necrotici, rimuovendoli delicatamente.
- Assorbe l'eccesso di essudato dalla lesione.
- Biocompatibile.
- Trasparente.

Precauzioni e avvertenze

- Utilizzare il prodotto solo per uso esterno e solo in confezione integra.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Leggere attentamente il foglio d'istruzioni prima dell'uso contenuto nella confezione di vendita.
- Non utilizzare su pazienti notoriamente sensibili ai componenti del prodotto.
- In caso di segnali di infezione, l'uso di Hydromed gel è consigliato solo sotto controllo medico.

Controindicazioni

- Hydromed gel non è indicato nei casi di ustioni di terzo grado o di impianto chirurgico.

Benefit


- Aids autolytic debridments facilitating faster healing rates.
- Minimises the need for sharp debridment.
- Easy to apply: remains in situ.

Precautions and warnings


- May be used on patients with local and systemic infection under the discretion of healthcare professional.
- In case of allergic reactions, please discontinue use directly and consult your doctor.
- For external use only
- Do not reuse the product. Reuse may pose risk of infection.
- If packaging is broken do not use or re-sterilize product.

Contraindications

- Full thickness burns.

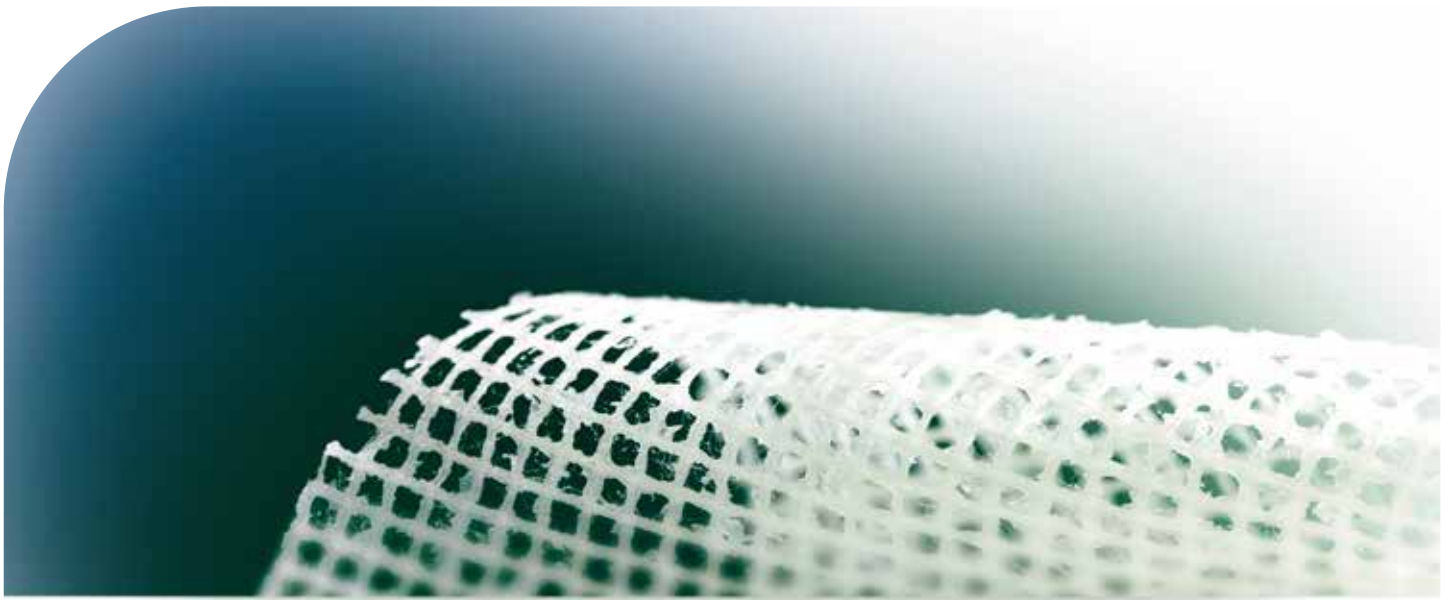

Euronet paraffin

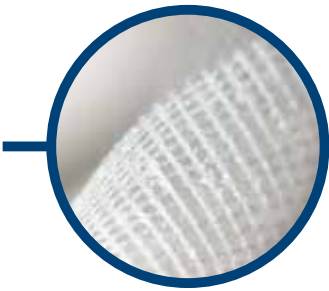

Medicazione sterile di garza grassa

ad armatura aperta (trama larga) fatta con 100% cotone assorbente, sbiancato e purificato, impregnato da una bianca morbida paraffina. I fili della garza sono intrecciati per ridurre al minimo la sfilacciatura e per garantire la penetrazione del versamento, che viene così assorbito da una seconda benda senza potersi asciugare sulla superficie della ferita. Quest'ultima rimane asciutta e pulita durante tutto il periodo dell'applicazione riducendo il rischio di infezione. Euronet paraffin è latex free.

Euronet Paraffin

is a 100 % absorbent cotton thread gauze, impregnated with white soft paraffin ointment. The gauze makes it a non-adherent and non-allergenic dressing. Euronet Paraffin is used as a primary wound contact layer in the treatment of burns, ulcers, skin grafts and a variety of traumatic injuries. The material is also used as a transfer medium for skin during grafting. Euronet Paraffin is latex free.



Euronet paraffin

Destinazione d'uso:

- Per la medicazioni di ferite superficiali a diretto contatto: blister, escoriazioni, abrasioni e piccole ustioni.
- Come strato di contatto primario nel trattamento delle ulcere, innesti cutanei (come strato per lo spostamento delle parti di tessuto donatore durante il trapianto) e lesioni traumatiche.

Vantaggi:

- Euronet Paraffin è ipoallergenica.
- Non aderisce ai tessuti sui quali viene applicata.
- Viene rimossa in modo atraumatico e senza rilascio di residui.
- La paraffina svolge un'azione protettiva creando uno strato separato tra la ferita e la stoffa di cotone.
- Garantisce una rimarginazione veloce della ferita, proteggendo allo stesso tempo il tessuto neoformato.
- E' una medicazione semplice da applicare, monouso, sicura e igienica.
- Si può tagliare in pezzi della misura necessaria.

Modalità d'uso:

- Lavare le mani prima dell'uso.
- Aprire la busta singola dalla zona facilitata all'apertura.
- Rimuovere la carta protettiva da tutte e due le parti della medicazione.
- Tenere la medicazione con una pinzetta asettica.
- Applicare sulla ferita.
- Coprire con una seconda benda assorbente.
- Fissare la benda con una medicazione aderente.

Avvertenze:

- Monouso.
- Utilizzare solo a confezione integra.
- Non utilizzare la medicazione dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Features:

- Individually packed in peel-able Aluminium pouches.
- Sterilized by gamma irradiation.
- Euronet Paraffin made of aperture leno cotton gauze that allows wound exudates to pass through.

Benefits:

- Euronet Paraffin is Impregnated with paraffin ointment which form a separate layer between wound and gauze preventing sticking with the wound and provide fast recovery.
- Protects newly formed tissue and minimize patient pain during changing the dressing.
- The leno-weave gauze allows the passage of the exudates to be absorbed by the secondary dressing, so the exudates do not dry on the wound bed.
- Can be cut to different sizes.

Indications:

- Euronet Paraffin is used as a primary wound contact layer in the treatment of burns, ulcers, skin grafts and a variety of traumatic injuries. The material is also used as a transfer medium for skin during grafting.
- Under the medical supervision of a healthcare professional, Euronet Paraffin can be used to manage infected wounds or wounds in which there is an increased risk of infection.
- Euronet Paraffin should be stored in a dry and cool place.

Contraindications:

- Although there are no contra-indications to the use of Euronet Paraffin, if the dressing is placed upon a heavily exuding wound its semi-occlusive nature may cause tissue maceration by preventing the free movement of exudates away from the surface of the wound.
- If Euronet Paraffin is left in position for prolonged periods of time, it can become adherent and cause tissue damage upon removal.

Medicazione sterile di garza grassa Gauze with soft paraffin ointment

Application:

- Open the pouch and take out the product.
- Remove the protector paper on both sides of the product and discard.
- Handle the impregnated gauze using an aseptic technique/using a forceps.
- Apply to the wound site.
- Cover with an absorbent secondary dressing e.g. Euroderm Foam.
- Fix using a fixation bandage or use Euroderm Foam Plus with adhesive border to eliminate the need for a fixation bandage.




articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf.pkg.	♀ astucci box
560001		cm 5 x cm 5	150 pz/pcs	16
560002		cm 5 x cm 10	100 pz/pcs	16
560003		cm 5 x cm 15	100 pz/pcs	16
560004		cm 5 x cm 20	50 pz/pcs	16
560010		cm 7,5 x cm 10	100 pz/pcs	16
560015		cm 7,5 x cm 15	50 pz/pcs	16
560020		cm 7,5 x cm 20	50 pz/pcs	16
560110		cm 10 x cm 10	100 pz/pcs	16
560115		cm 10 x cm 15	50 pz/pcs	16
560120		cm 10 x cm 20	50 pz/pcs	16
560140		cm 10 x cm 40	30 pz/pcs	16
560215		cm 20 x cm 15	50 pz/pcs	16
560220		cm 20 x cm 20	50 pz/pcs	16
560240		cm 20 x cm 40	30 pz/pcs	16
560315		cm 15 x cm 15	50 pz/pcs	16
560340		cm 15 x cm 40	30 pz/pcs	16
561005		cm 5 x cm 100	1 pz/pcs	48
561007		cm 7,5 x cm 100	1 pz/pcs	48
561010		cm 10 x cm 100	1 pz/pcs	48
561015		cm 15 x cm 100	1 pz/pcs	48
561020		cm 20 x cm 100	1 pz/pcs	48
562010		cm 10 x cm 200	1 pz/pcs	48
562015		cm 15 x cm 200	1 pz/pcs	48
562020		cm 20 x cm 200	1 pz/pcs	48
567007		cm 7,5 x cm 700	1 pz/pcs	24
567010		cm 10 x cm 700	1 pz/pcs	24
567015		cm 15 x cm 700	1 pz/pcs	24




latex free

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com



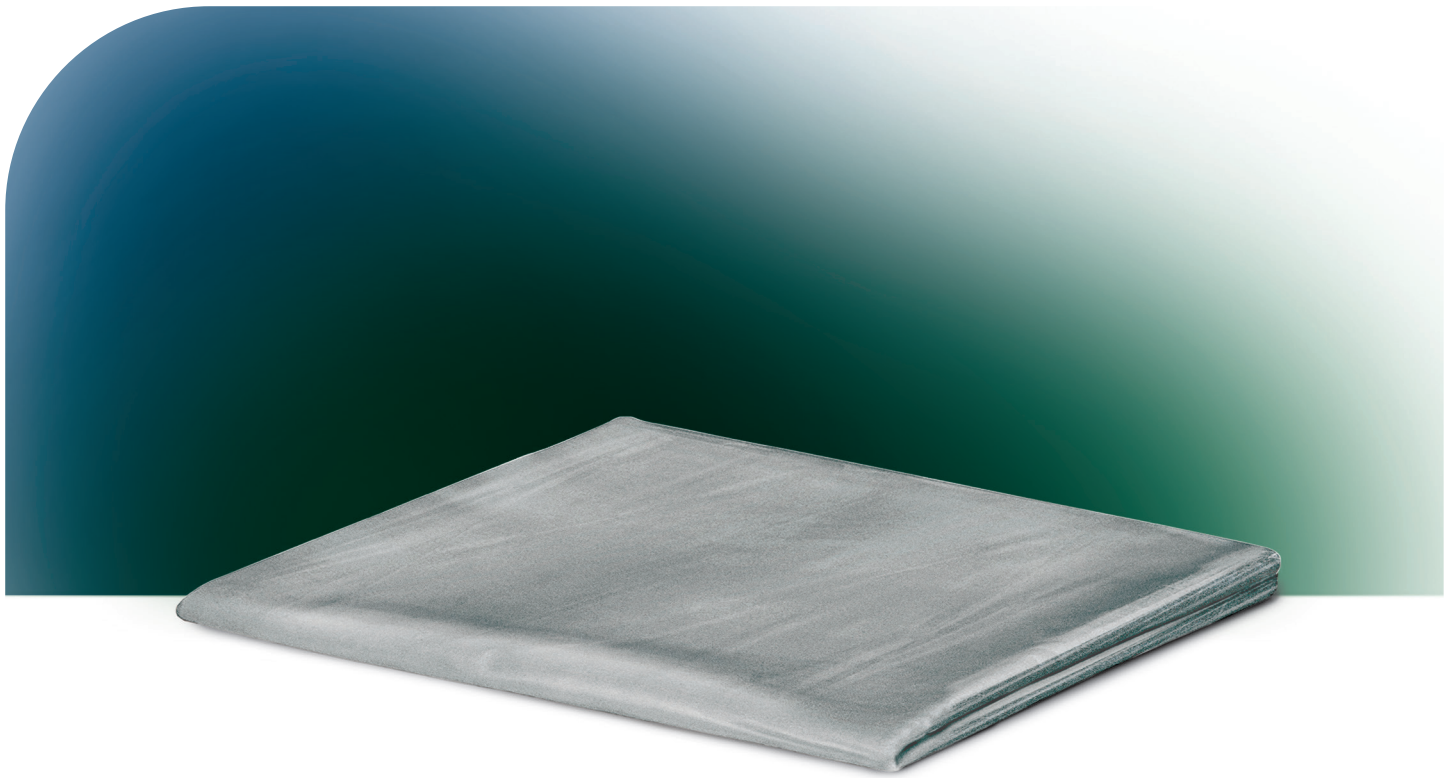

Lenzuolino metal

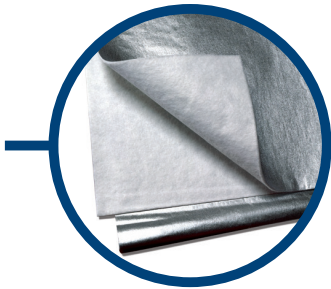

Lenzuolino per la medicazione di ferite e ustioni.

Lenzuolino in TNT e Viscosa, non aderente, sterile, traspirante, morbido, altamente assorbente, ipoallergenico, con un film esterno vaporizzato con alluminio purissimo, capace di garantire una cicatrizzazione più rapida.

Il Lenzuolino metal è latex free.

Eurodressing metal-KZ

Sterile dressing for large wounds and burns.

Eurodressing Metal - kz is a king size sterile dressing for large wounds and burns. Not adherent, hypoallergenic, breathable, antibacterial, excellent absorption capacity and soft. Composed by an Aluminium wound contact layer and an absorbent layer, greatly reduces the risk of infection.

Eurodressing metal - kz is latex free.



Lenzuolino per la medicazione di ferite e ustioni

Sterile dressing for large
wounds and burns



Lenzuolino metal

Il Lenzuolino metal è adatto per la medicazione di ferite o ustioni di medie e grandi dimensioni, abrasioni, ulcere, anche da decubito, e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti. Non aderisce alla ferita.

Permette la traspirazione e assorbe.

Eurodressing metal-KZ

The aluminium layer, in direct contact with the wound or with the burn, allows the passage of exudate or blood without the aluminium layer sticking to the wound.

It promotes epithelialization and guarantees a rapid healing. Thanks to its fast and great absorption capacity, but not adherent, facilitates dressing change.

Non-adherent surface.

Highly absorbent and breathable.

articolo	item no.	⊙ misure size	⊙ conf. pkg.
501006		cm 60 x cm 80	1 pz/pcs
501007		cm 73 x cm 120	1 pz/pcs
501008		cm 80 x cm 120	1 pz/pcs
501009		cm 75 x cm 250	1 pz/pcs



latex free



facile da rimuovere
easy to remove



traspirante
breathable




Euromed

Medicazione adesiva
post-operatoria sterile
Post-operative island
dressing



Euromed I.V. kit

Kit di fissaggio sterile
con inserzione longitudinale
Sterile kit intended for
insertion sites

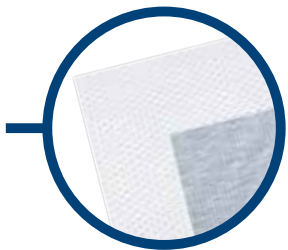

Eurometal

Medicazione alluminizzata
adesiva post-operatoria
Aluminised post-operative
island dressing





Euromed

Euromed è una medicazione post-operatoria adesiva sterile con una compressa centrale in viscosa non aderente, altamente assorbente, ipoallergenica, radiotrasparente, rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui, permeabile all'aria e al vapore acqueo permettendo la traspirazione della pelle.

Euromed è particolarmente indicata per l'assorbimento degli essudati e per tenere sotto controllo il microambiente della ferita.

Il supporto adesivo estensibile è altamente conformabile, consente un'agevole applicazione su articolazioni e contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle.

La medicazione Euromed viene prodotta in una vasta gamma di misure con angoli arrotondati, disponibile con il confezionamento in busta singola e pronta all'uso.

La chiusura ermetica e la sterilizzazione all'ossido di etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in termini di sterilità. Euromed assicura un fissaggio delicato senza provocare strappi, irritazioni o alterazioni cutanee. Euromed è latex free.



articolo	item no.	⊗	misure	size	⊗	conf. pkg.
----------	----------	---	--------	------	---	------------

717800			cm 5 X cm 7			100 pz/pcs
717801			cm 6 X cm 7			100 pz/pcs
717802			cm 6 X cm 9			50 pz/pcs
717803			cm 10 X cm 10			50 pz/pcs
717804			cm 12 X cm 7			50 pz/pcs
717805			cm 15 X cm 8			50 pz/pcs
717806			cm 20 X cm 10			50 pz/pcs
717807			cm 25 X cm 10			50 pz/pcs
717808			cm 30 X cm 10			50 pz/pcs
717809			cm 35 X cm 10			100 pz/pcs
718003			cm 10 x cm 8			50 pz/pcs

Euromed is a sterile post-operative island dressing with a absorbent central pad. The polyethylene wound contact layer enables the passage of blood or exudates into the absorbent pad while maintaining a good healing environment and minimal pain upon dressing removal.

Euromed is hypoallergenic, radiotranslucent, and breathable.

It consents a painless removal.

The high adaptability of the elastic backing material allows an excellent degree of fit to the skin and to irregular anatomical parts of the body.

To be used as mechanical barrier and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, burns and skin abrasions in general.

Euromed is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use.

Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas.

Euromed ensures gentle fixation without causing skin irritation or cutaneous alterations.

Euromed is latex free.



bassa essudazione
low exudate



traspirante
breathable



conformabile
conformable



latex free



Medicazione adesiva post-operatoria sterile • Post-operative island dressing
Kit di fissaggio sterile con inserzione longitudinale • Sterile kit intended for insertion sites

Euromed I.V. kit

Kit di fissaggio composto da una medicazione adesiva sterile, radiotrasparente e ipoallergenica, con inserzione longitudinale che determina la formazione di due lembi di cerotto paralleli. Al centro della zona adesiva vi è una compressa di garza costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere assorbente capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle e garantendo un distacco indolore grazie ad un particolare film antiaderente. Inoltre, la confezione contiene al suo interno un tampone di garza aggiuntivo da posizionare sotto il sondino per un maggior comfort, e una striscia di nastro adesivo per il fissaggio del sondino stesso, per una maggiore sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell'ago. Euromed I.V. è latex free.

Euromed I.V. is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by a sterile, radiotranslucent non-woven 100% polyester net with central pad, an extra pad anti-decubitus for superior comfort and an adhesive stripe in polyester net for the of the cannula that offer greater protection against accidental releases of the needle. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters. Euromed I.V. is latex free.



articolo	item no.	♀	misure	size	♀	conf.pkg.
717820			cm 9 X	cm 8		100 pz/pcs
718009			cm 6 X	cm 9		100 pz/pcs



bassa essudazione
low exudate



traspirante
breathable



conformabile
conformable



latex free





Medicazione adesiva alluminizzata Aluminised island dressing

Eurometal

Medicazione alluminizzata adesiva post operatoria sterile in TNT di poliestere, con tampone centrale assorbente vaporizzato con alluminio purissimo capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. Il tampone centrale non aderisce alla ferita permettendo un distacco indolore senza rilascio di residui. La compressa Eurometal è ipoallergenica, radiotrasparente, permeabile all'aria, traspirante. L'alta conformabilità e adattabilità del supporto estensibile consente un'agevole applicazione su articolazioni e contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. Prodotta in una vasta gamma di misure, Eurometal viene fornita confezionata in busta singola e pronta all'uso. La chiusura ermetica e la sterilizzazione ad ossido di etilene conferiscono al prodotto la massima sicurezza in termini di sterilità. Eurometal è latex free.

Eurometal is a sterile post-operative island dressing with a non-adherent highly absorbent aluminised central pad that does not stick to the wound thanks to a particular non-adherent layer. The aluminised central pad enables a rapid healing process. Eurometal is hypoallergenic, radiotranslucent, air-permeable and allows the transpiration of skin with a painless removal. The high adaptability of the elastic backing material allows an optimal fit of the plaster to the skin and to irregular anatomical parts of the body. To be used as mechanical barrier against bacteria and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, burns and skin abrasions in general. Eurometal is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use. Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas. Eurometal is latex free.

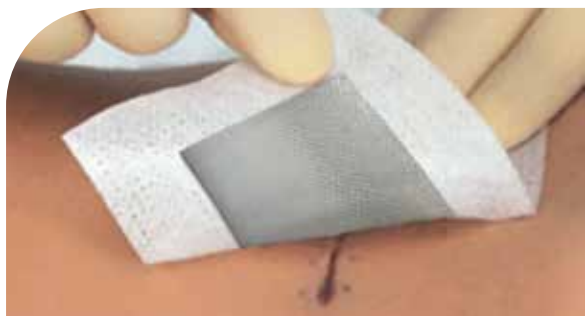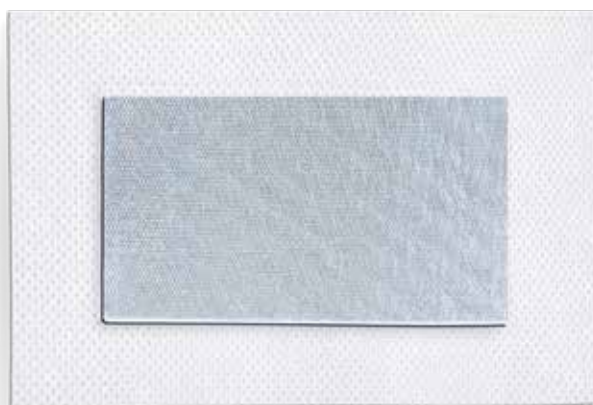

articolo	item no.	♀ misure	size	♀ conf.	pkg.
720000		cm 5 x cm 7,2		100 pz/pcs	
720001		cm 6 x cm 7		100 pz/pcs	
720002		cm 9 x cm 6		50 pz/pcs	
720003		cm 10 x cm 8		50 pz/pcs	
720004		cm 12 x cm 7		50 pz/pcs	
720005		cm 15 x cm 8		50 pz/pcs	
720006		cm 20 x cm 10		50 pz/pcs	
720007		cm 25 x cm 10		50 pz/pcs	
720008		cm 30 x cm 10		50 pz/pcs	

dermatologicamente testato
dermatologically tested



latex free



bassa essudazione
low exudate



favorisce la cicatrizzazione
promotes healing



traspirante
breathable



conformabile
conformable



Euromed

Medicazione adesiva post-operatoria sterile Sterile post-operative island dressing

Proprietà e vantaggi

- Radiotrasparente.
- Ipoallergenica.
- Facile da applicare.
- Morbida e adattabile.
- Non limita i movimenti della pelle.
- Traspirante.
- Permette il cambio atraumatico della compressa senza rilascio di residui.
- Altamente assorbente.

Destinazione d'uso


- Indicata per l'assorbimento degli essudati e per tenere sotto controllo il microambiente di una ferita.
- Per proteggere le ferite post-operatorie, piccoli tagli, abrasioni e lacerazioni.
- Come medicazione secondaria su gel, pomate e altre medicazioni primarie.

Benefits

- Radiotranslucent.
- Hypoallergenic.
- Easy to remove to avoid skin trauma. It does not release residues of glue.
- Easy to apply.
- Very soft and conformable.
- Does not affect skin movements.
- Breathable.
- Atraumatic dressing change.
- Highly absorbent.

Intended use

- Indicated for the absorption of exudates and to keep under control the wound microenvironment.
- Prophylaxis against infection especially for wounds at high risk of infection.
- Biocompatible and complying to ISO 10993.

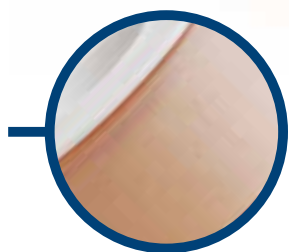

Euroreel

Cerotto in rocchetto su tela in cotone 100% con massa adesiva all'ossido di zinco per fissaggio

Rigid 100% cotton tape with pressure - sensitive zinc oxide adhesive mass for fixation



Eurosilk

Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca adatto al fissaggio


Rigid 100% acetate fabric with silky appearance, suitable for fixation



Europor

Cerotto in tessuto non tessuto bianco ideale per il fissaggio

White non-woven adhesive tape, suitable for fixation

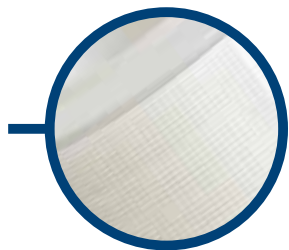

Eurotrasp

Cerotto adesivo trasparente in polietilene microforato che permette una completa visibilità

Transparent and micro-perforated polyethylene adhesive tape



Euroreel

Euroreel è un cerotto in rocchetto su tela in cotone 100% con massa adesiva all'ossido di zinco per il fissaggio di cannule, compresse, bende, cateteri venosi e sonde. È perfettamente aerato, ben tollerato dalla cute, idrorepellente, altamente ipoallergenico ed anelastico. L'elevato grado di permeabilità al vapore acqueo è assicurato dalla massa adesiva spalmata in maniera uniforme in sottilissime linee longitudinali, micrometricamente distanziate. Radiotrasparente, strappabile con le mani, facilmente rimuovibile dalla cute in modo atraumatico, senza rilascio di residui. Non provoca irritazione cutanea. I bordi non presentano sfilacciature. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene. Non aderisce ai guanti di lattice durante l'utilizzo.

Euroreel è disponibile sia versione perforata (Euroreel perforato) che garantisce una maggiore aerazione con fori da 3 mm, sia nella versione in tessuto acetato di cellulosa 100% (Euroreel acetato). Euroreel è latex free.

Euroreel is a rigid 100% cotton tape with pressure -sensitive zinc oxide adhesive mass for the fixation of cannulas, absorbent pads, bandages, venous catheters and probes. Euroreel is perfectly ventilated, hydrophobic and highly hypoallergenic which is well tolerated by the skin. The high degree of permeability to water vapour is guaranteed by the exclusive lined coating technic of the adhesive mass, which is uniformly coated in micrometrical spaced longitudinal lines. Radiotranslucent, tearable by hand in both direction, ease to remove from the skin avoiding skin trauma without the release of adhesive residues. It does not cause skin irritation. It has smooth edges.

Plastic spool guarantees hygiene. It does not adhere to latex gloves during use. Euroreel is also available in a 3 mm holes perforated version called Euroreel Perforato, which guarantees greater ventilation. Euroreel is also available in 100% acetate fabric version called Euroreel Acetato.

Euroreel is latex free.

	articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.	
Euroreel	white	skin-colour			
	701001	704001	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs	
	701002	704002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs	
	701005	704005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs	
	701007	704007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs	
	701010	704010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs	
	701031	704011	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs	
	701032	704012	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs	
	701035	704015	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs	
	701037		cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs	
	701040	704018	cm 10 x m 9,14	6 pz/pcs	
	Euroreel perforato		705002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
			705005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
		705007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs	
		705010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs	
		705018	cm 18 x m 5	1 pz/pcs	
Euroreel acetato	703001		cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs	
	703002		cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs	
	703005		cm 5 x m 5	12 pz/pcs	
	703007		cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs	
	703010		cm 10 x m 5	6 pz/pcs	
	703101		cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs	
	703102		cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs	
	703105		cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs	



latex free

Eurosilk

Cerotto in rocchetto in seta artificiale bianca particolarmente adatto al fissaggio di medicazioni, bende, cannule, cateteri venosi e sonde. Eurosilk è anelastico, altamente ipoallergenico, presenta una buona adesività, è ben tollerato dalla cute sensibile ed è facilmente lacerabile con le mani in senso longitudinale e trasversale.

È radiotrasparente, permeabile all'aria e al vapore acqueo permettendo così la traspirazione cutanea, è rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui. Non aderisce ai guanti durante l'operatività. La massa adesiva, costituita da polimeri in dispersione acquosa, viene spalmata senza l'aggiunta di alcun solvente chimico, garantendo così il massimo livello di sicurezza contro eventuali reazioni allergiche come pure di semplice dermosensibilità. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene. Eurosilk è latex free.

Eurosilk is a rigid and 100% acetate fabric with silky appearance, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous catheters and medical probes. Eurosilk uses a special polyacrylic adhesive mass without the addition of any chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions. Eurosilk is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, it is well tolerated by sensitive skin and very easy to tear by hand lengthwise and crosswise. It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues. It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene. Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation. Eurosilk is latex free.

articolo	item no.	♀ misure	size	♂ conf.	pkg.
----------	----------	----------	------	---------	------

707001		cm	1,25 x m 5	36	pz/pcs
707002		cm	2,5 x m 5	24	pz/pcs
707005		cm	5 x m 5	12	pz/pcs
707007		cm	7,5 x m 5	6	pz/pcs
707010		cm	10 x m 5	6	pz/pcs
707011		cm	1,25 x m 9,14	36	pz/pcs
707012		cm	2,5 x m 9,14	24	pz/pcs
707015		cm	5 x m 9,14	12	pz/pcs
707017		cm	7,5 x m 9,14	6	pz/pcs
707020		cm	10 x m 9,14	6	pz/pcs



latex free



Cerotti in rocchetto per fissaggio Fixation tape

Europor

Cerotto in Tessuto non tessuto bianco ideale per il fissaggio di cannule, compresse, bende, cateteri venosi e sonde. Europor è costituito da un supporto in fibre di cellulosa ed è perfettamente aerato, ben tollerato dalla cute, idrorepellente altamente ipoallergenico ed anelastico. È radiotrasparente, strappabile con le mani, rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza rilascio di residui. Presenta un' elevata tollerabilità cutanea anche su cute sensibile e danneggiata. Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene. Europor è latex free.

Europor is a white non-woven adhesive tape, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous catheters and medical probes. Europor uses a special polyacrylic adhesive mass without the addition of any chemical solvent. It is water-soluble, thus, ensuring the maximum level of security against allergic reactions. Europor is highly hypoallergenic, has good adhesion strength, suitable for sensitive skin and very easy to tear by hand. It is also radiotranslucent, permeable to air and water vapour, thus, allowing the skin to breath. Suitable for sensitive skin. It does not cause skin irritation. Painless removal without release of adhesive residues. It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene. Europor is latex free.

articolo **item no.**  misure **size**  conf. **pkg.**

706001	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
706002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
706005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
706007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs
706010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs
706011	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
706012	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
706015	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs
706017	cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs
706020	cm 10 x m 9,14	6 pz/pcs



latex free



Eurotrasp

Eurotrasp è un cerotto adesivo trasparente in polietilene microforato che permette una completa visibilità della superficie coperta. Ideale per il fissaggio di cannule, compresse, bende, cateteri venosi e sonde.

Rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui.

Eurotrasp è radiotrasparente, ipoallergenico, impermeabile ai liquidi, traspirante.

La massa adesiva poliacrilica non allergizzante assicura un fissaggio ottimale per ogni tipo di medicazione, ed un facile distacco senza irritazione cutanea.

Eurotrasp può essere utilizzato per molteplici usi grazie alla possibilità di essere facilmente strappato, anche indossando guanti chirurgici, in senso trasversale, longitudinale, nonché centralmente.

Il rocchetto di plastica rigida con salvabordi conferisce al cerotto maggiore garanzia di igiene.

Eurotrasp è latex free.

Eurotrasp is a transparent and micro-perforated polyethylene adhesive tape, suitable for the fixation of dressings, bandages, tubes, venous catheters and medical probes. The transparency allows a complete visibility of the covered surface. It is quick and easy to tear - even when using surgical gloves - both in transversal and longitudinal way, as well as in the middle. Eurotrasp is coated with a hypoallergenic polyacrylic adhesive mass. Permeable to air and to water vapour but impermeable to liquids.

Eurotrasp it has a very good adhesion strength. It is also radiotranslucent, highly permeable to air and water vapour, thus, allowing the skin to breath. Painless removal without release of adhesive residues.

It does not adhere to gloves during use. Plastic spool guarantees hygiene.

Eurotrasp is latex free.

articolo **item no.** misure **size** conf. **pkg.**

512001	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
512002	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
512005	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs
512007	cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs
512101	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
512102	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
512105	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
512107	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs



latex free




Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com





Eurofix

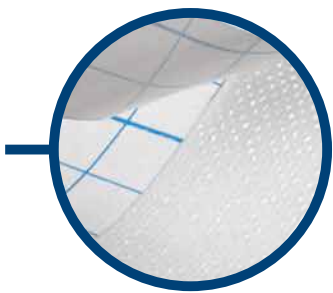

Cerotto estensibile in poliestere retinato altamente permeabile all'aria e al vapore acqueo, morbido, dermatofilo, ipoallergenico ed atossico

La sua estensibilità in senso trasversale permette la massima adattabilità del cerotto su articolazioni e su parti anatomiche irregolari del corpo non limitando i movimenti. Lo speciale adesivo di Eurofix non viene indebolito da acqua e secreti e pertanto il cerotto conserva intatte le sue caratteristiche originali di fissaggio. La carta siliconata, a protezione del lato adesivo, è provvista di pretaglio per facilitarne il distacco. Eurofix è latex free.

Elastic adhesive fixation plaster

Eurofix is an elastic adhesive polyester net, highly breathable.

It is very soft, skin respectful and highly hypoallergenic. Its crosswise elasticity allows the maximum adaptability of the plaster to the skin and to irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture and vapor permeability and correct dressing fixation. Water or secretions do not weaken the special adhesive mass of Eurofix and therefore the plaster keeps intact its original fixation characteristics.

The precut blue squared printed-paper protects the adhesive side.

Eurofix have been especially designed for an easy fixation of primary dressings helping an accurate cut of the plaster in one's favorite size.



Cerotto estensibile in poliestere retinato
Elastic adhesive fixation plaster

Eurofix

Proprietà e vantaggi

- Rimuovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui.
- Ipoallergenico, atossico.
- Permette un'agevole applicazione su articolazioni e contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti.
- Radiotrasparente.
- Altamente permeabile all'aria e vapore acqueo, permettendo così la traspirazione cutanea.
- Delicato sulla pelle.

Destinazione d'uso

- Per il fissaggio di ogni tipo di medicazione, sondini e canule.
- Ideale per il copribendaggio.

Benefits

- Easy to remove to avoid skin trauma. It does not release residues of glue.
- Highly hypoallergenic.
- Easy to apply on joints and difficult body contours, does not restrict or limit body movement.
- Radiotranslucent.
- Highly permeable to air and water vapor. Highly breathable.
- Gentle to the skin.

Intende use

- Ideally for the fixation of any type of medication, catheters and cannulas.



articolo **item no.** ♀ misure **size** ♀ conf. **pkg.**

715001	cm 5 x m 10	1 pz/pcs
715002	cm 10 x m 10	1 pz/pcs
715003	cm 15 x m 10	1 pz/pcs
715004	cm 20 x m 10	1 pz/pcs
715006	cm 30 x m 10	1 pz/pcs



latex free



conformabile
conformable



traspirante
breathable



pelli delicate
delicate skin

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com

 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES



Euroderm roll



Film adesivo di poliuretano trasparente in rotolo flessibile ed impermeabile a liquidi e batteri

Euroderm roll è un film adesivo di poliuretano trasparente in rotolo che unisce la qualità del film euroderm alla praticità d'uso.

Euroderm roll è flessibile e impermeabile ai liquidi e ai batteri.

Adattabile a zone anatomiche irregolari in quanto può essere agevolmente tagliato nella misura desiderata. Assicura un fissaggio ottimale a tutti i tipi di medicazione e garantisce un'elevata traspirazione cutanea.

La carta siliconata, a protezione del lato adesivo, è provvista di pretaglio per facilitarne il distacco. Euroderm roll è latex free.

Transparent polyurethane film roll, very flexible and impermeable to liquids and bacteria

Euroderm roll is an adhesive, transparent, waterproof and highly breathable Polyurethane film roll. Very flexible and conformable to irregular parts of the body, easy to cut in any required size.

Euroderm roll is impermeable to liquids and bacteria.

Designed for an easy fixation of primary dressings, it allows the skin to breath.

The pre-cut silicone paper provides protection to the adhesive side and facilitates removal. Euroderm roll is latex free.



Film adesivo di poliuretano trasparente
Transparent polyurethane film roll

Euroderm roll

Proprietà e vantaggi

- Rimovibile in modo atraumatico e senza rilascio di residui.
- Riduce il rischio di infezioni secondarie da microrganismi.
- Permeabile ai vapori .
- Impermeabile ai liquidi e ai batteri.
- Adattabile e flessibile anche a zone anatomiche irregolari e difficili.
- Il supporto trasparente consente un continuo monitoraggio della ferita senza che sia necessario rimuoverlo.
- Assicura un fissaggio ottimale a tutti i tipi di medicazione.
- Garantisce un'elevata traspirazione cutanea.
- L'impermeabilità e la resistenza all'acqua offrono al paziente la possibilità di svolgere le regolari attività di igiene quotidiana.

Destinazione d'uso

- Per il fissaggio di medicazioni primarie.
- Per il fissaggio di cateteri e cannule.
- Per la protezione della pelle nei punti di frizione di sacche per drenaggio, sacche per stomia.

Contro indicazioni

- Non deve essere utilizzato direttamente sulla cute lesa.

Benefits

- Easy to remove to avoid skin trauma. It does not release residues of glue.
- Reduces the risk of secondary infections by microorganisms.
- Vapour permeable.
- Impermeable to liquids and bacteria.
- Adaptable and flexible to irregular and difficult anatomical part of the body.
- The transparent support allows continuous monitoring of the wound, limiting the need of dressing change.
- Ensures optimal adhesion to all types of primary dressings.
- Highly breathable.
- Waterproof. It offers the patient the opportunity to perform regular and daily hygiene activities.

Intende use

- Primary dressing's fixation.
- Catheters and cannulas fixation.
- It grants the ideal skin protection when using drainage bags and ostomy bags.

Contraindications

- Euroderm roll should not be used directly on injured skin.



articolo	item no.	♀ misure	size	♂ conf.	pkg.
----------	----------	----------	------	---------	------

715600		cm 2,5 x m 10			408 pz/pcs
715601		cm 5 x m 10			204 pz/pcs
715602		cm 10 x m 10			102 pz/pcs
715603		cm 15 x m 10			72 pz/pcs
715604		cm 20 x m 10			52 pz/pcs



latex free



conformabile
conformable



traspirante
breathable

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com


 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES



Euroderm

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano altamente impermeabile a liquidi e batteri

Transparent sterile adhesive dressing made of a highly resistant thin polyurethane film

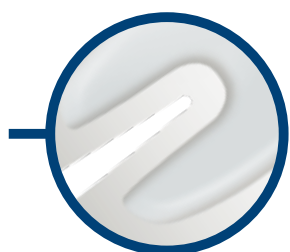

Euroderm I.V.

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano 100%, con taglio longitudinale per fissaggio di cannule e cateteri

Polyurethane transparent film dressing for cannula fixation



Euroderm I.V. R

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano e poliestere retinato per fissaggio avanzato

Highly flexible and resistant polyurethane film reinforced with a non-woven polyester fabric support



Euroderm

Medicazione adesiva sterile, sottile, in film di poliuretano, estensibile e trasparente, ipoallergenica, radiotrasparente e trascrivibile. Poiché Euroderm è altamente impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore acqueo e all'ossigeno, mantiene umido il microambiente della ferita, non facendo macerare la cute. E' facilmente rimuovibile in modo atraumatico senza rilascio di residui, inoltre L' alta conformabilità del supporto consente un'agevole applicazione su articolazioni e contorni difficili del corpo. La sua trasparenza consente un continuo monitoraggio della ferita senza che sia necessario rimuovere la medicazione, la sua impermeabilità e resistenza all'acqua forniscono al paziente la possibilità di fare regolarmente doccia o bagno. La medicazione Euroderm può essere lasciata in situ per periodi di tempo superiori alla media. Euroderm è latex free.

Destinazione d'uso: Da utilizzare per proteggere il sito di inserzione catetere venoso e arterioso o altri dispositivi percutanei, per ustioni di I e II grado, per proteggere la cute a rischio di decubito o nei siti soggetti ad arrossamento per immobilizzazione prolungata, per fissare altre medicazioni.

Transparent sterile adhesive dressing made of a highly resistant thin polyurethane film. Stretchable, hypoallergenic and radiotranslucent. Euroderm is Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent moisture vapour transmission rate, creating an ideal environment for wound healing and reduces the risk of skin maceration. It is easy to remove in a non-traumatic manner; it does not release residues of adhesive on the skin. The high conformability of the support enables an easy application on joints and difficult body contours. Its transparency allows continuous monitoring of the wound without having to remove the dressing. Euroderm's waterproof polyurethane support allows patients the opportunity to do regular shower and bath. Euroderm can be left in place for periods greater than average dressing. Euroderm is latex free.

Intended use: To be used for the protection of insertion site for venous and arterial catheter or other percutaneous devices. I and II degree burns. Protect the skin at risk of decubitus or subject to redness sites for prolonged immobilization. Secondary fixation of other dressings.



articolo	item no.	♀ misure	size	♀ conf.	pkg.
----------	----------	----------	------	---------	------

717505		cm 4 x cm 5		100 pz/pcs	
717507		cm 6 x cm 7		100 pz/pcs	
717510		cm 10 x cm 10		50 pz/pcs	
717512		cm 10 x cm 12		50 pz/pcs	
717520		cm 15 x cm 20		10 pz/pcs	
717521		cm 20 x cm 25		100 pz/pcs	
717522		cm 20 x cm 30		100 pz/pcs	
717525		cm 10 x cm 25		10 pz/pcs	



latex free



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



dermatologicamente testato
dermatologically tested



traspirante
breathable

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano altamente impermeabile
Transparent sterile adhesive dressing made of a highly resistant thin polyurethane film

Euroderm I.V.

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano 100%, Euroderm I.V. è trasparente, impermeabile ai liquidi e ai batteri, ma permeabile al vapore acqueo e all'ossigeno. Queste caratteristiche evitano la macerazione della pelle nell'area perilesionale, la trasparenza del film consente un continuo monitoraggio del sito di inserzione senza che sia necessario rimuovere la medicazione. La flessibilità e la conformabilità del film garantiscono un maggiore comfort al paziente e la particolare forma della medicazione con taglio longitudinale rende l'applicazione facile per il fissaggio e la protezione dei punti di inserzione di cannule e cateteri venosi. L'impermeabilità ai liquidi consente al paziente di svolgere le regolari attività di igiene quotidiana. La medicazione può essere rimossa in modo atraumatico e senza rilascio di residui. Euroderm I.V. può essere lasciato in situ per periodi di tempo superiori alla media grazie alla capacità di traspirazione e alla riduzione del rischio di macerazione della pelle.

Euroderm I.V. è latex free.

Destinazione d'uso: Da utilizzare per il fissaggio di cannule e cateteri.

Euroderm I.V. is a polyurethane transparent film dressing for cannula fixation. Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent moisture vapour transmission rate reduces the risk of skin maceration. Its transparency enables the observation of the puncture site without having to remove it. Highly flexible and resistant polyurethane film provides greater comfort to patient. The longitudinal cut makes the application easy for the fixation and protection of the insertion of cannula and venous catheters. Waterproof polyurethane support allows patient to perform regular hygiene activities. The dressing can be removed in a non-traumatic manner and without the release of adhesive residues. Euroderm I.V. is latex free.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
717550		cm 6 x cm 7	100 pz/pcs
717552		cm 8 x cm 9	100 pz/pcs
717560		cm 10 x cm 12	50 pz/pcs



traspirante
breathable



dermatologicamente testato
dermatologically tested



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



latex free



Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano per fissaggio avanzato
Polyurethane film reinforced with a non-woven polyester fabric support

Euroderm I.V. R

Medicazione adesiva sterile in film di poliuretano e poliestere retinato per fissaggio avanzato.

Impermeabile ai liquidi e ai batteri, ma permeabile al vapore acqueo e all'ossigeno, garantisce un'elevata traspirabilità evitando la macerazione della pelle nell'area perilesionale. La trasparenza della medicazione in corrispondenza del sito d'inserzione catetere consente il monitoraggio continuo senza richiederne la rimozione. La robustezza del poliestere retinato assicura un'eccellente bloccaggio distribuendo la forza generata dai cateteri centrali, dai cateteri periferici, dai deflussori e tubi su una superficie più resistente, riducendo di conseguenza il rischio di fuoriuscita dei dispositivi.

Euroderm I.V. R è dotato di 2 strisce di fissaggio utili sia per la trascrizione della data d'inserzione sia per aumentare l'ancoraggio del dispositivo. Euroderm I.V. R è latex free.

Highly flexible and resistant polyurethane film, reinforced with a non-woven polyester fabric support for extra strength ensuring reliable fixation for intravascular devices and cannulas. The reinforced non-woven polyester fabric provides an excellent fastening by distributing the power generated by the central and peripheral catheters from infusion sets and tubes on a highly resistant surface, thereby reducing the risk of outflow of devices.

Water and bacteria proof but permeable to water vapour and oxygen, guarantees an excellent moisture vapour transmission rate and reduces the risk of skin maceration. Being transparent, Euroderm I.V. R makes monitoring of the insertion site easier without having to remove the dressing. Euroderm I.V. R comes with 2 fastening strips useful for the transcription of the insertion date and to increase the anchorage of the device.

- Reliable and secure fixation for intravascular devices.
- Transparent for easy monitoring of insertion site.
- Excellent moisture vapour transmission rate lets skin moisture to evaporate.
- Easy to apply even when using gloves.

Euroderm I.V. R is latex free.



articolo	item no.	misure size	conf. pkg.
717570		cm 5 x cm 5,7	100 pz/pcs
717571		cm 8 x cm 9	100 pz/pcs
717572		cm 8,5 x cm 11,5	100 pz/pcs
717573		cm 10 x cm 12	100 pz/pcs



latex free



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



dermatologicamente testato
dermatologically tested



traspirante
breathable



Euroderm plus



Medicazione post-operatoria adesiva sterile
in poliuretano 100%

Post-operative island dressing in transparent
polyurethane film

Euroderm I.V. plus



Kit per il fissaggio di cannule e cateteri
in poliuretano 100%

Sterile kit intended for a safe and functional
management of insertion sites





Euroderm plus

Medicazione post-operatoria adesiva sterile in poliuretano 100%, estensibile, conformabile, trasparente, impermeabile ai liquidi e ai batteri e permeabile al vapore acqueo. Presenta al centro della zona adesiva una compressa assorbente di garza in TNT di viscosa, radiotrasparente e ipoallergenica, facilmente rimovibile dalla cute in modo atraumatico grazie ad un particolare film antiaderente. E' dotata di un elevato potere assorbente capace di trattenere gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle.

L'impermeabilità di Euroderm Plus e la sua resistenza all'acqua offrono al paziente la possibilità di fare regolarmente doccia o bagno. Facile da applicare, non si lacera e presenta un'ottima tenuta nel posizionamento. Euroderm Plus può essere lasciata sulla ferita per periodi di tempo superiori alla media (3/4 giorni nella prima settimana, 4/6 giorni nella seconda).

Euroderm Plus è latex free.

Euroderm Plus is a post-operative island dressing in transparent polyurethane film with absorbent central pad. The absorbent and non-adherent pad absorbs exudates, minimizing the risk of skin maceration, and allows a painless removal of the dressing. The film transparency enables the observation of the exudates in the pad without having to remove the dressing. The thin film is highly resistant but flexible. It conforms to all body contours and guarantees an excellent moisture vapour transmission rate, creating an ideal environment for wound healing. Moreover, the film protects the wound from bacteria and virus contaminations.

Euroderm Plus is latex free.



articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
717600		cm 5 x cm 7	100 pz/pcs
717601		cm 6 x cm 7	100 pz/pcs
717602		cm 6 x cm 9	50 pz/pcs
717603		cm 10 x cm 10	50 pz/pcs
717604		cm 12 x cm 7	50 pz/pcs
717605		cm 15 x cm 8	50 pz/pcs
717606		cm 10 x cm 20	50 pz/pcs
717607		cm 10 x cm 25	50 pz/pcs
717608		cm 10 x cm 30	50 pz/pcs
717609		cm 10 x cm 35	50 pz/pcs



latex free



bassa essudazione
low exudate



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



dermatologicamente testato
dermatologically tested



traspirante
breathable

Medicazione post-operatoria adesiva sterile • Post-operative island dressing Kit per il fissaggio di cannule e cateteri Sterile kit intended for a safe and functional management

Euroderm I.V. plus

Kit per il fissaggio di cannule e cateteri, composto da una medicazione sterile adesiva in film di poliuretano 100% con inserzione longitudinale, estensibile, trasparente, impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore, radiotrasparente, ipoallergenica, facilmente rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui. Al centro della medicazione vi è un tampone di garza ad elevato potere assorbente e non aderente che trattiene gli essudati riducendo al minimo il rischio di macerazione della pelle. La confezione contiene inoltre al suo interno un tampone di garza aggiuntivo da posizionare sotto il sondino, per il maggior comfort del paziente. La striscia di nastro in tessuto non tessuto (poliestere) consente il fissaggio del deflussore, al fine di garantire una maggior sicurezza contro fuoriuscite accidentali dell'ago. La medicazione mantiene il microambiente umido ottimale in modo da favorire la cicatrizzazione della ferita.

Destinazione d'uso: da utilizzare per il fissaggio di cannule e cateteri. Euroderm I.V. Plus è latex free.

Euroderm I.V. Plus is a sterile kit intended for a safe and functional management of insertion sites. It is composed by a sterile polyurethane film dressing with an absorbent central pad, an extra pad antidecubitus and a stripe in polyester net for the fixation of tubing. The lengthwise cut allow a safe position of cannula and catheters. Euroderm I.V. Plus it is extensible, transparent, impermeable to liquids and bacteria but permeable to vapour, radiotranslucent, hypoallergenic, easy to remove from the skin in a non-traumatic manner. It does not release adhesive residues on the skin. The highly absorbent and non-adherent pad retaining exudate minimizing the risk of skin maceration. The pressure sore prevention pad can be placed under the tube, for greater patient comfort. The adhesive stripe in polyester non-woven fabric allows the fastening of the infusion set, in order to ensure greater safety against premature release of the needle. The dressing maintains an ideal moist wound microenvironment and promote healing. The polyurethane and transparent IV dressing allows keeping the insertion site visible and controlling the microenvironment of the wound.

Intended use: to be used for fixing cannulas and catheters. Euroderm I.V. Plus is latex free.

articolo **item no.** misure **size** conf. **pkg.**

717620 cm 9 x cm 8 100 pz/pcs



latex free



traspirante
breathable



dermatologicamente testato
dermatologically tested



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



bassa essudazione
low exudate



Euroderm plus

Medicazione post operatoria adesiva sterile Post-operative island dressing

Descrizione

- Medicazione protettiva, radiotrasparente, trasparente, ideale per la gestione di essudati da scarsi a media entità.
- Film in poliuretano impermeabile ai liquidi e ai batteri ricoperto da uno strato di adesivo ipoallergenico.
- La carta protettiva è pretagliata con una compressa centrale che consente una facile applicazione.
- Sterilizzata ad ossido di etilene e fornita di una compressa centrale non aderente.

Benefici

- Mantiene l'ambiente ideale per la guarigione della ferita.
- Molto facile da applicare.
- Mantiene il microambiente umido della ferita in modo da promuovere la cicatrizzazione e ridurre il dolore.
- Permette al paziente di fare regolarmente la doccia o il bagno.
- E' permeabile al vapore acqueo e all'aria evitando la macerazione della pelle e può essere lasciato fino a 5 giorni.

Indicazioni

- Medicazione per la gestione di essudati da scarsi ad abbondanti.
- Per il fissaggio di cateteri.
- Protezione dall'acqua e dai batteri.
- Protezione di ferite post-operatorie.

Destinazione d'uso

- Da utilizzare in particolare dove è necessaria una medicazione permeabile al vapore acqueo: ferite post-operatorie, abrasioni, ferite superficiali, ustioni minori, piaghe da decubito e per la protezione della cute nell'area perilesionale.

Description

- Radiotranslucent and transparent protective wound dressing for light to moderately secreting wounds.
- Made of polyurethane bacteria proof, virus proof and waterproof film coated with hypoallergenic adhesive.
- The polyurethane film backing paper is kiss cut into an outer frame and central window for easy application.
- Ethylene oxide gas sterilized, supplied with a central non-adherent pad.

Benefits

- Maintains the undisturbed state of the wound.
- Very easy to apply.
- Provides moist wound environment to enhance healing and decrease pain.
- Patient can shower without risk.
- PU Frame style allows wounds to breathe and water vapour to escape protecting skin against maceration where dressing can be left in place for 5 days minimizing interference at wound site.

Indication

- Wound dressing for primary and secondary care of light to moderately secreting wounds.
- Fixation of I.V. catheters.
- Antibacterial and waterproof coverage of wounds.
- Post-operative dressings to protect clean closed wounds.

Linea Aloe

Aloe Vera product line

○ Long fix aloe

Cerotto adesivo da taglio con compressa in Aloe Vera.

Adhesive continuous length plaster with an Aloe Vera absorbent central pad.

○ Eurostrips aloe

Cerotti in polietilene microforato rosa, altamente aerati, con compressa impregnata di Aloe Vera.

Polyethylene plasters with an Aloe Vera absorbent central pad.

Long fix aloe

Cerotto adesivo da taglio con compressa in Aloe Vera, indicato per pelli sensibili. Traspirante, elastico, ipoallergenico, lenitivo. **L'aloè Vera svolge un'azione cicatrizzante e antisettica.**
È ritagliabile secondo le diverse esigenze.

Adhesive continuous length plaster with an Aloe Vera absorbent central pad. Suitable for sensitive skins. Any minor wound needs a suitable plaster to help the healing process. Aloe Vera pad technology promotes healing and is capable of performing an exceptional epithelizing and antiseptic action.



con aloè
with aloe











latex free



bassa essudazione
low exudate



favorisce la cicatrizzazione
promotes healing

articolo item no.	misure size	cont. pkg.	cod. paraf	cod. ean
861002	m 0,5 x cm 6	1 pz/pcs.	 A970434155	8  057681 909476
861003	m 0,5 x cm 8	1 pz/pcs.	 A970434167	8  057681 909483
861005	m 1 x cm 6	1 pz/pcs.	 A970434179	8  057681 909506
861006	m 1 x cm 8	1 pz/pcs.	 A970434181	8  057681 909513

Eurostrips aloe

Cerotti in polietilene microforato rosa, altamente aerati, estensibili, traspiranti, **idrorepellenti**. La compressa, collocata al centro della zona adesiva, ha un elevato potere assorbente ed è impregnata di **Aloe vera nota per le sue proprietà riepitelizzanti, lenitive e antisettiche**. La compressa non aderisce alla ferita grazie ad un particolare strato antiaderente, consentendo un distacco indolore del cerotto.

Polyethylene plasters with an Aloe Vera absorbent central pad. Suitable for sensitive skins. Any minor wound needs a suitable plaster to help the healing process. Aloe Vera pad technology promote healing and is capable of performing an exceptional epithelizing and antiseptic action. It is indicated for for first aid, medication, wellness, for the cure of small wounds and for fingers or other parts of the body.



con aloe
with aloe



latex free



antisettico
antiseptic




favorisce la cicatrizzazione
promotes healing



articolo item no.	● misure size	● cont. pkg.	● cod. paraf	● cod. ean
826051	mm19 x mm72	20 pz/pcs.	 A970177301	 8 057681 909407
826056	mm19 x mm72 mm25 x mm72	20 pz/pcs.	 A971060114	 8 057681 909773
826055	assortiti assorted	20 pz/pcs.	 A971060090	 8 057681 909766



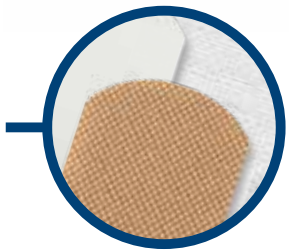

Eurostrips

Cerotto adesivo con compressa centrale assorbente


First aid adhesive plaster with central absorbent pad



Eurostrips injection

Rotolo di strips pretagliati in tessuto non tessuto rosa, facilmente separabili, atossici, altamente aerati

Dispenser with pre-cut first-aid strips in skin coloured non-woven fabric, easy to cut off

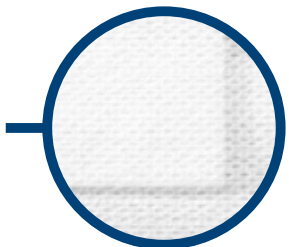

Eurostrips emo

Cerotto adesivo emostatico con compressa centrale super assorbente

Haemostatic adhesive strip with super-absorbent central pad





Eurostrips

Eurostrips è una vastissima famiglia di cerotti adesivi in confezione singola, sterili e non, adatti alle medicazioni di piccole ferite e punti di prelievo.

Eurostrips sono disponibili in varie misure e formati: con supporto adesivo in polietilene rosa o trasparente, in tessuto non tessuto rosa o in poliestere retinato bianco e in cotone, tutti con compressa centrale non aderente e assorbente.

Eurostrips is a vast family of first aid adhesive plasters with a central absorbent pad.


Sterile and non-sterile version are available.

Eurostrips are available different sizes and formats:

- Skin coloured Polyethylene.
- Transparent Polyethylene film.
- White non-woven Polyester Fabric.
- Skin colour non-woven paper fabric.

Individually wrapped.

Eurostrips is latex free.

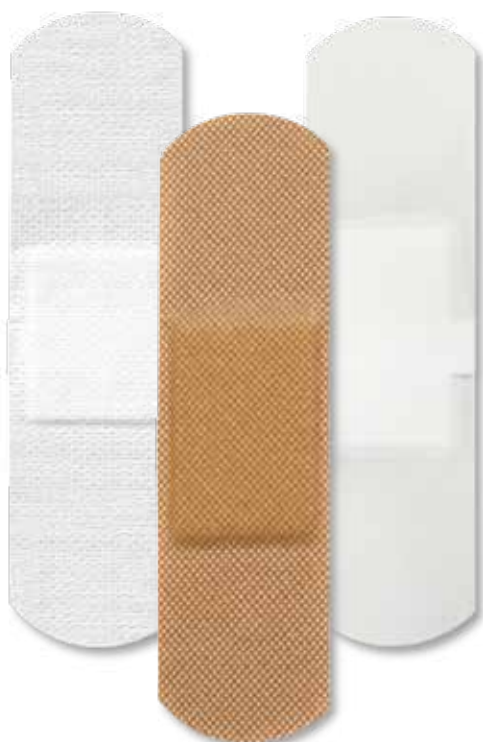

	articolo item no.		misure size	conf. pkg.
	non sterile sterile			
Tessuto non tessuto rosa Non woven skin colour	726001	726201	mm 19 x mm 72	1000 pz/pcs
	726002	726202	mm 25 x mm 72	1000 pz/pcs
	726003	726203	mm 31 x mm 72	1000 pz/pcs
	726051	726251	mm 19 x mm 72	100 pz/pcs
	726052	726252	mm 25 x mm 72	100 pz/pcs
Poliestere retinato bianco White elastic net non-woven (100% polyester)	731001	731201	mm 19 x mm 72	1000 pz/pcs
	731002	731202	mm 25 x mm 72	1000 pz/pcs
	731003	731203	mm 31 x mm 72	1000 pz/pcs
	731061	731261	mm 19 x mm 72	100 pz/pcs
	731062	731262	mm 25 x mm 72	100 pz/pcs
	731063	731263	mm 31 x mm 72	100 pz/pcs
PE rosa PE skin colour	724001	724201	mm 19 x mm 72	1000 pz/pcs
	724002	724202	mm 25 x mm 72	1000 pz/pcs
	724003	724203	mm 31 x mm 72	1000 pz/pcs
	724016	-----	mm 40 x mm 40	500 pz/pcs
	724017	-----	Ø mm 22	1000 pz/pcs
	724051	724251	mm 19 x mm 72	100 pz/pcs
	724052	724252	mm 25 x mm 72	100 pz/pcs
724053	724253	mm 31 x mm 72	100 pz/pcs	

altri formati disponibili su richiesta

other sizes available on request



latex free



ipoallergenico
hypo-allergenic



elastico
elastic



traspirante
breathable

Cerotto adesivo con compressa centrale assorbente
Rotolo di strips pretagliati, separabili, atossici, altamente aerati
First aid adhesive plaster with central absorbent pad
Dispenser with pre-cut first-aid strips, easy to cut off

Eurostrips injection

Rotolo da 250 strips pretagliati in tessuto non tessuto rosa, facilmente separabili, atossici, altamente aerati.
Offrono sicure garanzie di ipoallergenicità, escludendo fenomeni di sensibilizzazione cutanea.
Il tampone centrale, ad elevato potere assorbente, non si attacca alla ferita grazie ad un particolare strato antiaderente, consentendo un distacco indolore.
È ipoallergenico, permeabile all'aria, radiotrasparente.
I cerottini Eurostrips injection in tnt rosa sono latex free.

Dispenser with 250 pre-cut first-aid strips in skin coloured non-woven fabric,
easy to cut off thanks to its pre-cut format.

Offer secure guarantees of hypoallergenicity avoiding skin irritation.

Non-adherent and absorbent central pad that does not stick to the wound thanks to the polyethylene
outer net layer allowing painless removal.

Eurostrips injection are skin friendly, radiotranslucent and air permeable.
Eurostrips injection are latex free.

articolo **item no.**  **misure size**  **conf. pkg.**

726124 mm 40 x mm 20 250 pz/pcs



traspirante
breathable



elastico
elastic



ipoallergenico
hypo-allergenic



latex free



Cerotto adesivo emostatico con compressa centrale super assorbente
Haemostatic adhesive strip with super-absorbent central pad

Eurostrips emo

Eurostrips Emo è una famiglia di cerotti emostatici disponibili in varie misure e formati in confezionamento sterile e non.

La speciale garza posta al centro della zona adesiva è costituita da fibre super assorbenti che incrementano rapidamente il proprio volume all'assorbimento del sangue ed effettuano di conseguenza un'azione emostatica che ne blocca la fuoriuscita.

Eurostrips Emo is a family of haemostatic strips available in several sizes and formats.

Sterile packaging and not sterile are both available.

The central pad is composed by super-absorbent fibres that rapidly increase its volume immediately after blood absorption and should therefore effect a compressive action on the wound with fast stop of the bleeding.

articolo	item no.	♀ misure	size	♂ conf.	pkg.
724281		mm 19 x mm 72	(in PE)	100 pz/pcs	
724282		mm 25 x mm 72	(in PE)	100 pz/pcs	
724283		mm 31 x mm 72	(in PE)	100 pz/pcs	
724271		mm 40 x mm 40	(in PE)	100 pz/pcs	
731284		mm 40 x mm 40	(in Poliestere retinato)	100 pz/pcs	

altri formati disponibili su richiesta
other sizes available on request



latex free



ipoallergenico
hypo-allergenic



elastico
elastic




traspirante
breathable



emostatico
haemostatic



Enteralfix

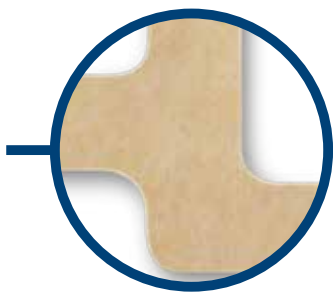

Cerotto per il fissaggio di sondini nasogastrici

Enteralfix è un cerotto adesivo in TNT rosa poroso conformabile costituito da un supporto in fibre di cellulosa, per il fissaggio alla cute di sondini nasogastrici per alimentazione enterale.

Enteralfix è ipoallergenico con massa adesiva a base di acrilati, presenta elevata tollerabilità cutanea. Il cerotto è radiotrasparente, presagomato, pronto all'uso ed è rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui, altamente permeabile all'aria e al vapore acqueo. Enteralfix è latex free.

Nasogastric plasters for nose tube fixing

Enteralfix is a skin colour, non-woven nasogastric plasters for the fixation of nasogastric tubes for enteral supply.

The high elasticity allows easy application and high conformability.

Enteralfix has excellent adhesion properties resulting in long lasting wear time without causing pain on removal, from even the most delicate skin.

No residue is left after removal.

Skin friendly.

Air and water vapor permeable.

Radiotranslucent.

Enteralfix is latex free.

Cerotto per il fissaggio di sondini nasogastrici
Nasogastric plasters

Enteralfix



articolo item no. misure size conf.pkg.

non sterile sterile

724501 724551 mm 62 x mm 50 100 pz/pcs

724502 724552 mm 37,2 x mm 30 100 pz/pcs

Destinazione d'uso:


da utilizzare per il fissaggio alla cute di sondini per alimentazione enterale.

Intended use:

Fixation of nasogastric tubes for enteral supply.



latex free

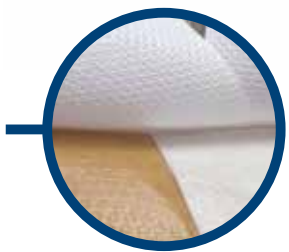


Long bend

Cerotto adesivo in tela a metraggio con compressa longitudinale non aderente
Continuous length adhesive plaster with a central non-adherent and highly absorbent wound pad



Long fix

Cerotto adesivo in TNT a metraggio con compressa di garza longitudinale assorbente e non aderente
Continuous length adhesive plaster in white non-woven polyester net with an absorbent central pad

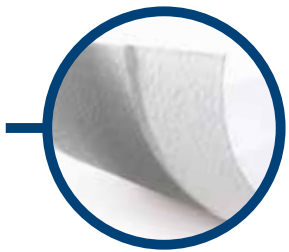

Long fix metal

Cerotto adesivo in TNT a metraggio con compressa di garza vaporizzata con alluminio purissimo
Continuous length adhesive plaster in white non-woven polyester net with an absorbent central alluminized pad





Long bend

Long bend, pratico cerotto adesivo a metraggio con compressa longitudinale non aderente, adattabile a diverse applicazioni. La compressa centrale in tela rosa, unica per tutte le versioni di Long bend, è costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere assorbente. Il cerotto Long Bend non si attacca alla ferita, viene rimosso in maniera atraumatica, è ipoallergenico può essere tagliato nella misura desiderata. E' disponibile in un'ampia gamma di versioni e formati. Long bend è latex free.

Long bend is a continuous length adhesive plaster with a central, non-adherent and highly absorbent wound pad. The excellent quality of the special fibers of viscose constituting the absorbent pad reduces the adherence of the dressing to the wound and permits a rapid absorption. Long bend is available in non-woven skin color with polyacrylic adhesive mass. 100% Rigid cotton in skin color with zinc oxide adhesive mass. Elastic cotton/polyamide with zinc oxide adhesive mass. Long bend is skin friendly and air permeable. Can be cut in one's favourite size. Long bend is available in a wide range of sizes. Long bend is latex free.



articolo item no.			misure size	conf.pkg.
non tessuto non woven	tessuto color pelle skin-colour fabric	tessuto elastico elastic fabric		
736001	738001	741001	4 cm x 0,5 m	36 pz/pcs
736002	738002	741002	6 cm x 0,5 m	36 pz/pcs
736003	738003	741003	8 cm x 0,5 m	36 pz/pcs
736004	738004	741004	4 cm x 1 m	36 pz/pcs
736005	738005	741005	6 cm x 1 m	36 pz/pcs
736006	738006	741006	8 cm x 1 m	36 pz/pcs
736007	738007	741007	4 cm x 5 m	132 pz/pcs
736008	738008	741008	6 cm x 5 m	90 pz/pcs
736009	738009	741009	8 cm x 5 m	72 pz/pcs



latex free

Cerotti adesivi a metraggio Continuous length adhesive plaster

Long fix

Pratico cerotto in TNT a metraggio con compressa di garza longitudinale, collocata al centro della zona adesiva, costituita da speciali fibre di viscosa ad elevato potere assorbente. Non aderisce alla ferita, consente un distacco indolore, conformabile ed adattabile a diverse parti anatomiche del corpo, ipoallergenico, radiotrasparente, permeabile all'aria, permette la traspirazione della pelle e può essere tagliato nella misura desiderata.

Non lascia residui sulla pelle al momento del distacco.

Long fix è latex free.

Long-Fix is a continuous length adhesive plaster in white non-woven polyester net with a central, non-adherent and highly absorbent wound-pad.

Longfix is skin friendly and air permeable, allows a comfortable fit of the plaster to the skin and to the other particularly irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture permeability.

The plaster can be cut in one's favourite size.

Long Fix is suitable as barrier for minor wounds and general abrasions.

Long fix is latex free.

articolo	item no.	misure size	conf. pkg.
740001		cm 4 x m 0,5	36 pz/pcs
740002		cm 6 x m 0,5	36 pz/pcs
740003		cm 8 x m 0,5	36 pz/pcs
740004		cm 4 x m 1	36 pz/pcs
740005		cm 6 x m 1	36 pz/pcs
740006		cm 8 x m 1	36 pz/pcs
740007		cm 4 x m 5	132 pz/pcs
740008		cm 6 x m 5	90 pz/pcs
740009		cm 8 x m 5	72 pz/pcs
740056		cm 6 x m 25	20 pz/pcs
740058		cm 8 x m 25	16 pz/pcs



favorisce la cicatrizzazione
promotes healing



bassa essudazione
low exudate



latex free



Long fix metal

Pratico cerotto a metraggio, con compressa di garza centrale costituita da speciali fibre di viscosa, vaporizzata con alluminio purissimo. La compressa ad elevato assorbimento, non aderisce alla ferita e grazie allo strato di alluminio crea una barriera all'azione dei batteri consentendo una rapida cicatrizzazione.

Long fix metal è ipoallergenico, permeabile all'aria, radiotrasparente, permette la traspirazione della pelle e può essere tagliato nella misura desiderata.

L'alta conformabilità e adattabilità del supporto elastico consente un'agevole applicazione su articolazioni e contorni difficili del corpo non limitando i movimenti della pelle.

Long fix metal è latex free.

Long-Fix Metal is a continuous length adhesive plaster in white non-woven with a central, non-adherent and highly absorbent wound-pad. The excellent quality of the aluminized layer in the pad reduces the adherence of the dressing to the wound, and permits good skin transpiration, a rapid absorption of blood and exudates into the dressing and consequently keeps dry the wound surface.

Longfix Metal, skin friendly and air permeable, it allows a comfortable fit of the plaster to the skin and to the other particularly irregular anatomical parts of the body, ensuring the highest moisture permeability.

The plaster, which can be cut in one's favourite size acts as bacteria barrier for minor wounds and general abrasions. Promotes healing.

Long fix metal is latex free.



articolo	item no.	misuresize	conf.pkg.
740101		cm 4 x m 0,5	36 pz/pcs
740102		cm 6 x m 0,5	36 pz/pcs
740103		cm 8 x m 0,5	36 pz/pcs
740104		cm 4 x m 1	36 pz/pcs
740105		cm 6 x m 1	36 pz/pcs
740106		cm 8 x m 1	36 pz/pcs
740107		cm 4 x m 5	132 pz/pcs
740108		cm 6 x m 5	90 pz/pcs
740109		cm 8 x m 5	72 pz/pcs
740156		cm 6 x m 25	20 pz/pcs
740158		cm 8 x m 25	16 pz/pcs



latex free




favorisce la cicatrizzazione
promotes healing



bassa essudazione
low exudate



Eurosuture

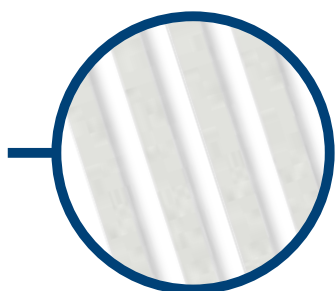

Cerotto sterile per suture cutanee

Strips sterili per suture cutanee in tessuto non tessuto, resistenti alla trazione, conformabili, in poliestere e poliammide rinforzato, atossici ed altamente aerati offrono sicure garanzie di ipoallergenicità, escludendo fenomeni di sensibilizzazione cutanea. Possono essere utilizzati al posto della sutura tradizionale, su tutte le ferite lineari soggette a basse tensioni della pelle riducendo così il rischio d'infezioni ed eliminando gli antiestetici segni dei punti e minimizzando la formazione di cicatrici.

Grazie alle sue estremità arrotondate lo strip non si arriccia, non forma pieghe, evita il distacco prematuro dai lembi della ferita. Gli strips sono fissati su una card di supporto per una più facile applicazione. Eurosuture è latex free.

Sterile adhesive suture strips

Eurosuture are adhesive sterile strips for skin sutures, resisting to tensile stresses, conformable, made of reinforced non-woven fabric in polyester and polyamide. It is non-toxic highly breathable and hypoallergenic, excluding skin irritation.

They can be used to replace traditional suture, on all linear wounds subjected to low strain of the skin, thus, reduce the risk of infection, eliminate the unaesthetic signs of the suture punctures and minimizing the formation of scars.

Due to the unique rounded edges of the strip, Eurosuture will not curl or form crinkles avoiding premature detachment from the wound edges. Placed on a support paper for an easy application.

Eurosuture is latex free.



Cerotto sterile per suture cutanee Sterile adhesive suture strips

Eurosuture



articolo	item no.	♀ misure	size	♀ conf.	pkg.
717410		mm 3 x mm 75	(5 strips)	50 card	(250 strips)
717420		mm 6 x mm 38	(6 strips)	50 card	(300 strips)
717430		mm 6 x mm 75	(3 strips)	50 card	(150 strips)
717440		mm 6 x mm 100	(10 strips)	50 card	(500 strips)
717450		mm 13 x mm 100	(6 strips)	50 card	(300 strips)
717460		mm 25 x mm 100	(4 strips)	50 card	(200 strips)

Proprietà e vantaggi

- Disponibile in un' ampia varietà di formati. I bordi arrotondati prevengono l'arricciamento degli strips.
- Veloci e facili da applicare.
- Tessuto traspirante, poroso, possono essere utilizzati sulle aree del corpo difficili o dove avvengono pieghe e movimenti.
- Ipoallergenici.
- Riducono i rischi d'infezione.
- Riducono la formazione di cicatrici evitando i segni antiestetici dei punti di sutura.
- Semitrasparenti a contatto con la pelle per un migliore effetto estetico.

Property and benefits

- Breathable, porous, can be used on contoured body areas or where bending and movement occur.
- Faded colour for a cosmetically pleasing appearance.
- Eliminates puncture marks for better cosmetic result than sutures or staples.
- Fast and easy to apply to save time.
- Uses a hypoallergenic adhesive.
- Available in a variety of sizes to meet your needs.
- Rounded edges help prevent roll-up, curls or crinkles. Available in sealed pouches E.O sterilized.

Uses

- For use in highly contoured areas or body areas of musculoskeletal movements like joints.
- Providing wound support following early suture or staple removal.
- Useful for wound support post operatively and following suture removal.

For use in

- Emergency Rooms.
- Operating Rooms.
- Clinics and physician's offices.



latex free



dermatologicamente testato
dermatologically tested




ipoallergenico
hypo-allergenic






Eurodressing

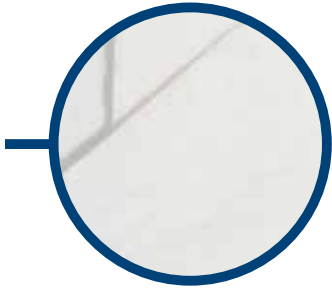

Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno in polietilene 100%

Eurodressing is a sterile and hypoallergenic absorbent non-woven dressing


Eurodressing metal

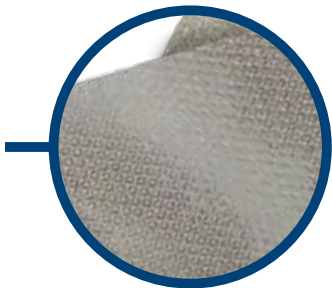

Compressa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno vaporizzato con alluminio purissimo

Sterile, hypoallergenic, aluminised and primary dressing with highly absorbent viscose fibre central layer



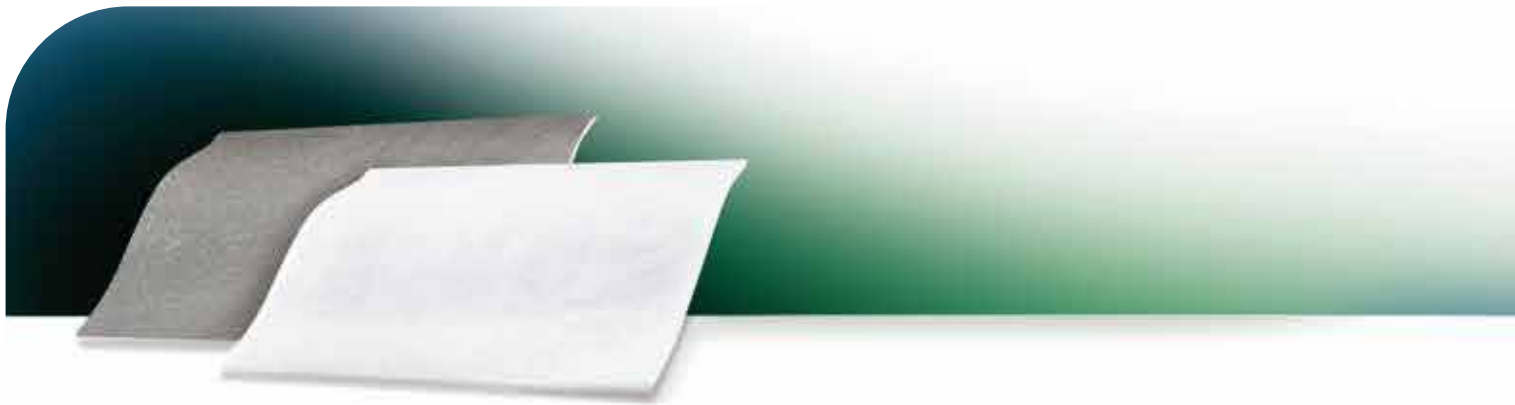

Eurodressing

Compresa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno in polietilene 100% che ricopre tutta la superficie.

Questo permette di utilizzare la compresa da entrambi i lati. Particolarmente morbida, non disperde fibre, è indicata sia per la pulizia delle ferite che per la loro medicazione. Non aderisce alla ferita rispetto alle tradizionali garze in cotone e viene rimossa in maniera atraumatica.

Eurodressing è latex free.

Destinazione d'uso: Da utilizzare in chirurgia per la medicazione di ferite, abrasioni, ulcere, anche da decubito e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti, favorito anche dal cambio assolutamente atraumatico della compresa.

Eurodressing is a sterile and hypoallergenic absorbent non-woven dressing.

Eurodressing is composed by 3 layers:

- 100% Polyethylene external layer applied on both sides: non-adherent open net for a fast absorption.
- 100% Viscose absorbent in the middle.
- Particularly used in surgery for the treatment of wounds, abrasions, ulcers as well as bedsores, and in every case of special medications instead of gauze.
- The dressing facilitates the absorption of blood and secretions, and it does not require a particular care when replaced, whereas the standard gauze requires a slow and gradual removal since they stick to the wound.
- Eurodressing is latex free.



articolo	item no.	♀	misure size	♀	conf. pkg.
----------	----------	---	-------------	---	------------

722001			cm 5 x cm 5		100 pz/pcs
--------	--	--	-------------	--	------------

722002			cm 5 x cm 7,5		100 pz/pcs
--------	--	--	---------------	--	------------

722003			cm 10 x cm 10		50 pz/pcs
--------	--	--	---------------	--	-----------

722004			cm 10 x cm 20		50 pz/pcs
--------	--	--	---------------	--	-----------



latex free



ipoallergenico
hypo-allergenic



bassa essudazione
low exudate



traspirante
breathable

Compresa in TNT di viscosa
Sterile non-woven dressing

Eurodressing metal

Compresa in TNT di viscosa, non aderente, sterile, altamente assorbente, ipoallergenica con un film esterno vaporizzato con alluminio purissimo, capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. Utilizzata per la medicazione di qualunque tipo di lesione (escoriazioni, ustioni, ferite chirurgiche e di primo intervento), riduce il rischio di adesione alla ferita, viene rimossa in maniera atraumatica. Eurodressing metal è latex free.

Destinazione d'uso: Eurodressing metal è particolarmente indicato in chirurgia dove lo strato alluminizzato a diretto contatto con la ferita, promuove ed accelera i processi di cicatrizzazione, epitelizzazione e la veloce formazione del tessuto di granulazione. Adatto per la medicazione di ferite, abrasioni, ulcere, anche da decubito e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti, favorito anche dal cambio assolutamente atraumatico della compresa.

Sterile, hypoallergenic, aluminised and primary dressing with highly absorbent viscose fibre central layer
Eurodressing Metal is a sterile primary dressing composed by 3 layers:

- 100% Polyethylene aluminised wound contact layer, non-adherent open net for a fast absorption.
- 100 % Polyethylene external layer applied.
- 100% Viscose absorbent fibres in the middle.
- Eurodressing metal does not stick to the wound thanks to a particular non-adherent layer. The aluminised central pad enables a rapid healing process and acts as bacteria barrier.
- Eurodressing metal is hypoallergenic, radiotranslucent, air-permeable and allows the transpiration of skin with a painless removal.
- To be used as mechanical barrier against bacteria and to control the microenvironment of the wound, ulcer of the low parts of the body, burns and skin abrasions in general.
- Eurodressing metal is supplied in a wide range of sizes with rounded edges, available in single envelope and ready to use.
- Individually packed in a peel away pouch and sterilized by E.O. gas
- Eurodressing metal is Latex Free.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
722300		cm 5 x cm 5	100 pz/pcs
722301		cm 5 x cm 7,5	100 pz/pcs
722302		cm 10 x cm 8	50 pz/pcs
722303		cm 10 x cm 10	50 pz/pcs
722304		cm 10 x cm 12	50 pz/pcs
722305		cm 10 x cm 20	50 pz/pcs



traspirante
breathable



bassa essudazione
low exudate



favorisce la cicatrizzazione
promotes healing




latex free



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com



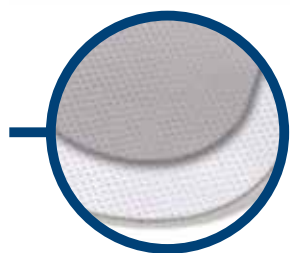

Europtical occlusivo

Medicazione oculare occlusiva
adesiva sterile, in tessuto non tessuto

Non-woven sterile eye plaster, ready for use,
with an occlusive pad



Europtical non occlusivo

Medicazione oculare non occlusiva
adesiva sterile, in tessuto non tessuto

Non-woven sterile eye plaster with a white,
absorbent, non-occlusive pad



Tampone oculare

Tampone oculare sterile, non adesivo
anatomico

Sterile and non-adhesive anatomic eye pad





Europtical occlusivo

Medicazione oculare adesiva sterile, in Tessuto Non Tessuto (TNT) retinato di poliestere, pronta all'uso, ipoallergenica da utilizzare per lo strabismo e per la profilassi ed il trattamento dell'ambliopia. Grazie alla sua forma anatomica permette una facile e corretta applicazione. Il supporto ha un elevato indice di porosità e rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione della stessa, evitando così un ristagno di calore nella cavità oculare. La compressa di garza al centro della zona adesiva, costituita da speciali fibre di cellulosa e da uno schermo nero, è impenetrabile alla luce e consente una terapia ortottica appropriata, associata ad una perfetta tollerabilità del prodotto da parte del paziente, senza rinunciare alla componente estetica. Europtical occlusivo è latex free.

Europtical is a non-woven sterile eye plaster, ready for use, with an occlusive pad, ideal for the correction of strabismus and for the prophylaxis and treatment of amblyopia. The highly porous non-woven backing material preserves the physiological functions of the skin and reduces the risk of maceration. Besides, the high permeability both to air and to water vapour avoids heat congestion in the eye socket. Its anatomical shape enables easy and accurate applications, even when worn beneath glasses. The pad in the middle of the adhesive area is composed by especial cellulose fibres and from a black occlusive pad making Europtical Occlusivo impenetrable to light and allowing an appropriate orthoptist therapy. Highly tolerable by the patient without sacrificing the aesthetic element. Europtical occlusive is latex free.



articolo	item no.	♀	misure	size	♀	conf.	pkg.
----------	----------	---	--------	------	---	-------	------

717200			cm 5,2 x cm 6,4			50 pz/pcs	
--------	--	--	-----------------	--	--	-----------	--

717201			cm 5,7 x cm 8,2			50 pz/pcs	
--------	--	--	-----------------	--	--	-----------	--

717202			cm 8,5 x cm 11			50 pz/pcs	
--------	--	--	----------------	--	--	-----------	--



latex free



pronto all'uso
ready to use

Euoptical non occlusivo

Medicazione oculare adesiva sterile, in Tessuto Non Tessuto (TNT) retinato con compressa interna assorbente, molto morbida per non produrre irritazioni, pronta all'uso e ipoallergenica.

Utilizzata sia per la medicazione dell'occhio che per la protezione di orbita e sopracciglio.

La sua forma anatomica ovoidale permette una facile e corretta applicazione.

Il supporto adesivo retinato garantisce una rimozione atraumatica, ha un elevato indice di porosità e rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione ed evitando un ristagno di calore nella cavità oculare.

Euoptical non occlusivo è latex free.

Non-woven sterile eye plaster with a white, absorbent, non-occlusive pad. It is ideal for the post-operative protection of the eye.

The highly porous non-woven backing material preserves the physiological functions of the skin and reduces the risk of maceration. Besides, the high permeability both to air and to water vapour avoids heat congestion in the eye socket. Its anatomical shape enables easy and accurate applications, even when worn beneath glasses. It ensures atraumatic removal.

Euoptical non-occlusive is latex free.

articolo	item no.	♀ misure	size	♂ conf.	pkg.
----------	----------	----------	------	---------	------

717210		cm 5,2 x cm 6,4		50 pz/pcs	
--------	--	-----------------	--	-----------	--

717211		cm 5,7 x cm 8,2		50 pz/pcs	
--------	--	-----------------	--	-----------	--

717212		cm 8,5 x cm 11		50 pz/pcs	
--------	--	----------------	--	-----------	--




pronto all'uso
ready to use



latex free





Tampone oculare sterile anatomico
Sterile and anatomic eye pad

Tampone oculare

Tampone oculare sterile, non adesivo, particolarmente indicato per la profilassi ed il trattamento oculare. La forma anatomica permette una facile e corretta applicazione. Il tampone di garza, costituito da speciali fibre di cellulosa, offre un elevato comfort per il paziente, un'alta protezione e un elevato assorbimento. Evita il formarsi di sudorazione nella ferita, permette la traspirazione cutanea, Il bordo è saldato lungo tutta la circonferenza del tampone, evitando così la fuoriuscita di essudato. Europtical tampone è indicato per la medicazione dell'occhio in tutti i casi di interventi post-operatori, di ferite corneali o di medicazioni. Europtical tampone oculare è latex free.

Sterile and non-adhesive eye pad, particularly suitable for the prophylaxis and eye treatment. The anatomical shape allows an easy and correct application. The pad, made of special cellulose fibres, offers protection, high absorption and comfort for the patient. Prevents the formation sweating in the wound allowing skin perspiration. The edge is welded along the whole circumference of the pad, thus avoiding the leakage of exudate. Tampone oculare is indicated for the eye dressing for post-operative interventions, for corneal wounds or medication of all kinds. Europtical tampone oculare is latex free.

articolo **item no.**  misure **size**  conf. **pkg.**

717240	cm 5,2 x cm 6,4	50 pz/pcs
717241	cm 5,7 x cm 8,2	50 pz/pcs
717242	cm 8,5 x cm 11	50 pz/pcs
717243	cm 7 x cm 8,5	50 pz/pcs



latex free



pronto all'uso
ready to use




Tracheopad



Compresa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per medicazioni di tracheotomie

Aluminised non-woven dressing especially designed for use around tracheotomies

Drenapad

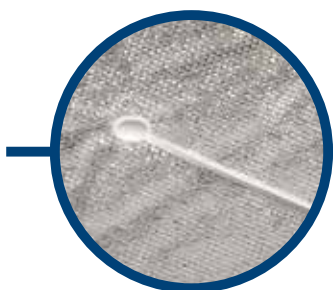

Compresa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per ferite da drenaggi

Aluminised non-woven dressing especially designed for infusion catheters





Tracheopad

Compresa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato, non aderente e assorbente, studiata per la medicazione di tracheotomie, nefrastomie e drenaggi di rilevante entità. Il pretaglio centrale e quelli minori che dipartono a raggiera dal foro centrale (Ø da 12 mm a 20 mm) permettono che la compresa si conformi facilmente al tubo di tracheotomia, garantendo il massimo comfort al paziente. L'eccellente qualità dello strato alluminizzato svolge una funzione cicatrizzante e di barriera alla contaminazione batterica, minimizzando l'aderenza della compresa alla zona peristomiale, riducendo il trauma del paziente durante l'uso e al momento della rimozione. La porosità del supporto garantisce un rapido assorbimento del sangue e degli essudati e consente una buona traspirazione cutanea all'ossigeno e al vapore acqueo. Tracheopad è latex free.

Tracheopad is an aluminised non-woven dressing, especially designed for use around tracheotomies, nephrostomies and large calibre drains. The pre-cut and minor slits radiating from the central hole (Ø from 12 mm to 20 mm) allows a perfect fit around the tracheotomy tube assuring the maximum comfort to the patient. The excellent quality of the aluminised wound contact layer performs a healing function and it reduces the adherence of the dressing either to the peristome skin or to the tracheotomy tube, minimizing trauma for the patient during the removal. Furthermore, the high porosity of this layer permits good skin transpiration, allows a rapid absorption of blood and exudates into the dressing and consequently keeps the wound surface dry. Tracheopad acts as a reliable barrier against bacterial contamination. Tracheopad is latex free.



articolo	item no.	♀ misure	size	♀ conf.	pkg.
717310		cm 8 x cm 9,3		100	pz/pcs
717320		cm 8 x cm 9,3		50	pz/pcs



latex free



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



bassa essudazione
low exudate


Compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato
Aluminised non-woven dressing

Drenapad

Drenapad è una compressa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato da utilizzare su ferite dovute a drenaggi di piccola e media entità e cateteri per infusione. Il pre-taglio centrale e quelli minori che dipartono a raggiera dal foro centrale (Ø da 5 mm a 12 mm) fanno sì che la compressa si conformi facilmente attorno all'area del drenaggio. Lo strato alluminizzato della compressa è altamente poroso, non aderente alla zona peristomiale ed al drenaggio ed ha un alto potere di assorbimento, garantendo così confort al paziente. L'alto potere di assorbimento del supporto mantiene asciutta la superficie della ferita riducendo così il rischio di infezione. Drenapad è confezionato singolarmente, sterilizzato con ossido di etilene e pronto all'uso. Drenapad è latex free.

Drenapad is a non-woven aluminised dressing especially designed for use on wounds produced by small and medium calibre drains and infusion catheters, or around suture. The pre-cut and minor slits radiating from the central hole (Ø from 5 mm to 12 mm) allow a perfect fit around the drain assuring the maximum comfort to the patient. The excellent quality of the aluminised wound contact layer reduces the adherence of the dressing either to the peristome skin or to the drain. It minimises the trauma for the patient during the removal. Furthermore, the high porosity of this layer permits good skin transpiration, allows a rapid absorption of blood and exudates into the dressing and consequently keeps the wound surface dry. Drenapad acts as a reliable barrier against bacterial contamination. Drenapad is latex free.

articolo item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
717300	cm 6 x cm 7	50 pz/pkg

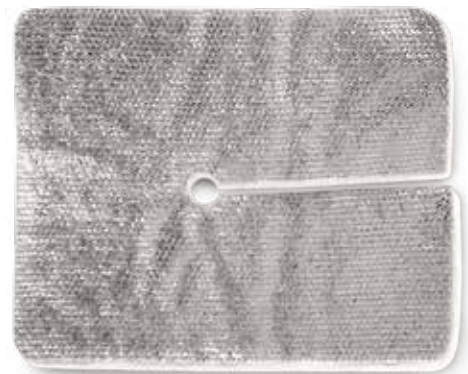

bassa essudazione
low exudate



barriera contro batteri, impermeabile
acts as bacteria barrier and waterproof



latex free



Tracheopad

Compresa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per medicazioni di tracheotomie
 Aluminised non-woven dressing especially designed for use around tracheotomies

Proprietà e vantaggi

- Permeabile all'aria e al vapore acqueo.
- Buon drenaggio.
- Morbida e adattabile.
- Garantisce comfort al paziente.
- Rapido assorbimento dell'essudato.
- Facile da applicare e rimuovere.
- Non aderisce alla ferita, facilitando il distacco atraumatico della medicazione.

Features and benefits

- Permeable to air and water vapour.
- Good drainage.
- Soft and adaptable.
- Ensures patient comfort.
- Rapid absorption of exudate.
- Easy to apply and remove.
- Does not stick to the wound, facilitating atraumatic removal of the dressing.

Drenapad

Compresa sterile in tessuto non tessuto alluminizzato per ferite da drenaggi
 Aluminised non-woven dressing especially designed for infusion catheters

Proprietà e vantaggi

- Permeabile all'aria e al vapore acqueo.
- Buon drenaggio.
- Morbida e adattabile.
- Garantisce comfort al paziente.
- Rapido assorbimento dell'essudato.
- Facile da applicare e rimuovere.
- Non aderisce alla ferita, facilitando il distacco atraumatico della medicazione.

Features and benefits

- Permeable to air and water vapour.
- Good drainage.
- Soft and adaptable.
- Ensures patient comfort.
- Rapid absorption of exudate.
- Easy to apply and remove.
- Does not stick to the wound, facilitating atraumatic removal of the dressing.



Euroathletic® sport tape



Cerotto adesivo per bendaggi funzionali

Cerotto adesivo per bendaggi funzionali Euroathletic sport tape è un cerotto adesivo anelastico, bianco, altamente ipoallergenico costituito da un supporto in viscosa al 100% e una massa adesiva a base di ossido di zinco. Presenta una spalmatura a righe che gli conferisce una maggiore traspirabilità. Strappabile con le mani in senso longitudinale e trasversale per una facile e rapida applicazione. La resistenza alla trazione e la forte adesività, fanno di Euroathletic sport tape il cerotto di elezione nell'allestimento di bendaggi funzionali dei muscoli, legamenti e articolazioni in ambito ospedaliero e sportivo. Euroathletic sport tape è latex free.

Rigid strapping zinc oxide tape for functional and sports bandaging

Rigid strapping zinc oxide tape for functional and sports bandaging in 100% viscose with hypoallergenic zinc oxide adhesive. It provides strong and efficient stabilisation of joint structures. It is hand tearable for quick and easy application. Indicated for functional bandaging of muscles ligaments and joints injuries. Euroathletic sport tape is latex free.



Cerotto per bendaggi funzionali
Rigid strapping zinc oxide tape for
functional and sports bandaging

Euroathletic® sport tape

Proprietà e vantaggi

- Idrorepellente.
- Forte adesività per una maggiore durata del bendaggio in condizioni di forti sollecitazioni.
- Facile da applicare.
- Strappabile con le mani in entrambe le direzioni.

Destinazione d'uso


- Bendaggio funzionale per ridurre i movimenti dei muscoli, dei legamenti e delle articolazioni.
- Lesioni dei legamenti e delle articolazioni.
- Bendaggi di sostegno in caso di distorsioni, slogature o traumi articolari.
- Per immobilizzazioni ortopediche e per il fissaggio di stecche gessate.
- Taping per la medicina dello sport.

Property and advantages

- Water repellent.
- Strong adhesion for longer application of the bandage under high stress conditions.
- Easy to apply.
- Easy to tear by hand in both directions.

Intended use

- Functional bandaging to reduce the movements of the muscles, ligaments and joints.
- Injury ligaments and joints.
- Support bandaging in case of sprains, dislocations or joint injuries.
- For orthopaedic immobilization and for the fixation of splint plasters.
- Commonly used for taping in sports medicine.

articolo **item no.**  misure **size**  conf. **pkg.**

746032	mt 10 x cm 2,5	24 pz/pcs
746033	mt 10 x cm 3,8	18 pz/pcs
746035	mt 10 x cm 5	12 pz/pcs
746036	mt 14 x cm 2,5	48 pz/pcs
746037	mt 14 x cm 3,8	32 pz/pcs
746038	mt 14 x cm 5	24 pz/pcs
746039	mt 20 x cm 2,5	30 pz/pcs
746040	mt 20 x cm 3,8	20 pz/pcs
746041	mt 20 x cm 5	15 pz/pcs



latex free




ideale per tutti gli sport
ideal for all sports





Euroathletic® KLS

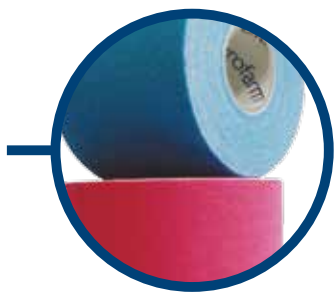


Kinesio Lymphathic Sport

Bendaggio adesivo elastico per la cura e la prevenzione naturale di traumi, infiammazioni muscolari e articolari

il Kinesiology Taping è utilizzato da medici sportivi e fisioterapisti per il trattamento di dolori muscolari, dolori articolari e disturbi simili. I muscoli si estendono e si contraggono in continuazione entro certi limiti; tuttavia, quando tali limiti vengono superati, i muscoli posti sotto stress possono infiammarsi. Quando un muscolo è infiammato, gonfio o rigido perchè affaticato, lo spazio tra pelle e muscolo appare "compresso" e il risultato è una limitazione alla circolazione del fluido linfatico. Questa compressione comporta inoltre una pressione sui recettori dolorifici localizzati sotto la pelle, con conseguente dolore. Tale tipo di dolore è definito "mialgia" o più semplicemente "dolore muscolare". Euroathletic kls per Kinesiology Taping, correttamente applicato, allevia il dolore e facilita il drenaggio linfatico mediante un'azione sul tessuto cutaneo che incrementa lo spazio interstiziale, riducendo la pressione sul flusso linfatico e sui recettori dolorifici, grazie alla formazione di particolari convoluzioni sulla pelle.

Elastic adhesive tape for the treatment and natural prevention of trauma as well as joint and muscle inflammation

Kinesiology taping is used by sports doctors and physiotherapists to treat muscle and joint pain and similar disorders. Muscles stretch and contract continuously within certain limits. However, when these limits are exceeded, the muscles under stress become inflamed. When a muscle is inflamed, swollen or stiff because fatigued, the space between the skin and the muscle is "compressed" and the result is a restriction on the movement of lymphatic fluid. This compression involves even the pressure on pain receptors located under the skin, resulting in pain. This type of pain is called "myalgia" or simply "muscle pain". When properly applied, Euroathletic kls for kinesiology taping relieves pain and facilitates lymphatic drainage through an action on the skin that increases the interstitial space, reducing the pressure on lymph flow and pain receptors, due to the formation of particular convolutions on the skin.

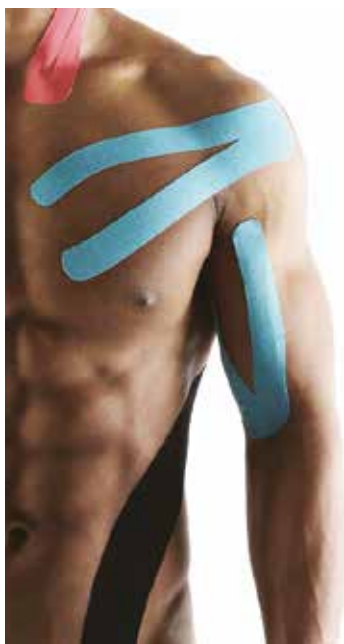

Bendaggio adesivo elastico
Elastic adhesive tape

Euroathletic® KLS

Allevia il dolore • Corregge la funzione muscolare e articolare • Favorisce la circolazione linfatica • Aiuta la riabilitazione • Cura piccoli edemi ed ematomi sottocutanei

VANTAGGI: Euroathletic kls per Kinesiology Taping si adatta bene ai contorni del corpo, non ostacola i movimenti delle articolazioni garantendo libertà di movimento. È radiotrasparente, dermatofilo, altamente ipoallergenico, permeabile all'aria e al vapore acqueo, grazie alla particolare spalmatura ad onde. Non contiene farmaci. Favorisce il drenaggio linfatico, facilita il riallineamento articolare, normalizza le funzioni muscolari. È utilizzato anche in piscina, perchè resistente all'acqua.

INDICAZIONI: Indicato per Kinesiology Taping, per il fissaggio di medicazioni sulle articolazioni, nei casi di dolore e strappi muscolari, per fissaggi leggeri o in caso di necessità di compressioni. Può essere utile nella prevenzione di infortuni e traumi.

AVVERTENZE: Monouso • Non applicare sulla cute lesa • Il cerotto può indurre un leggero arrossamento della parte al momento della rimozione dello stesso • In caso di intolleranza al cerotto, rimuoverlo e lavare accuratamente la zona di applicazione.

MODALITÀ D'USO: Da utilizzare sotto la guida di un medico specialista in medicina dello sport o di un fisioterapista che ne conoscano le modalità di applicazione.

FREQUENZA DI SOSTITUZIONE: Può restare in situ per diversi giorni dal momento dell'applicazione, data l'alta traspirabilità e la totale libertà di movimento. La frequenza di sostituzione va stabilita secondo il parere dello specialista.

Relieves pain • Corrects muscle and joint function • Promotes lymphatic circulation
• Helps rehabilitation • Heals small subcutaneous edemas and hematomas

ADVANTAGES: Euroathletic kls for kinesiology taping adapts well to the contours of the body and does not hinder the movements of the joints, thus ensuring freedom of movement. It is radiolucent, dermatophyte, highly hypoallergenic, permeable to air and water vapor, due its special wave coating. It contains no drugs. It promotes lymphatic drainage, facilitates joint realignment and normalizes muscle functions. Can also be used in the pool, as it is water resistant.

WARNINGS: Disposable • Do not use on injured skin • The patch may cause a slight reddening of the area at the time of removal • In case of intolerance to the patch, remove it and wash the application area.

HOW TO USE: To be used under the guidance of a doctor specializing in sports medicine or a physiotherapist who know how to apply it.

FREQUENCY OF REPLACEMENT: It can remain in situ for several days from the time of application, given the high permeability and total freedom of movement. The frequency of replacement should be established based on the opinion of the specialist.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
520305	Pelle/Skin	cm 5 x m 5	1 pz/pcs
520325	Blu/Blue	cm 5 x m 5	1 pz/pcs
520335	Nero/Black	cm 5 x m 5	1 pz/pcs
520355	Rosa/Pink	cm 5 x m 5	1 pz/pcs



latex free



ideale per tutti gli sport
ideal for all sports



Eurelasto

Benda adesiva elastica
con ossido di zinco

Adhesive bandage of durable elasticity
with zinc oxide



Eurelasto L

Benda elastica coesiva estensibile
con e senza lattice

Cohesive elastic bandage of durable elasticity
with and without latex



Eurobandage

Benda elastica ad uso
universale con ganci

Elastic bandage for universal
use with clips





Eurelasto

Benda adesiva elastica in senso longitudinale a media estensibilità ipoallergenica in cotone 100% con pasta all'ossido di zinco, spalmato in modo poroso al fine di garantire la massima traspirabilità e tollerabilità.

E' dotata di filo guida colorato al centro per favorire il bendaggio e di bordi soffici arrotondati non sfilacciabili e non adesivizzati per evitare azioni di taglio sulla cute. Particolarmente indicata per bendaggi compressivi nel trattamento del complesso varicoso e nella profilassi della trombosi, come bendaggio funzionale nella terapia delle lesioni muscolari e tendinee, distorsioni, lussazioni e strappi. Eurelasto è anche disponibile nelle versioni:

Eurelasto H (cotone 82% e poliammide 12%) caratterizzato da una maggiore elasticità.

Eurelasto F extraforte caratterizzata da una maggiore adesività e robustezza del supporto. Particolarmente indicato nel rugby e in tutte le applicazioni ove è richiesta una forte adesione alla cute. Eurelasto è latex free.

Lengthwise elastic adhesive bandage of medium stretchability. Made of 100% cotton with zinc oxide hypoallergenic adhesive paste, porously coated in order to guarantee maximum breathability and skin tolerability.

Off-white (with red middle-thread). Soft and smooth uncoated edges to avoid skin cut. Particularly suitable for permanent compression for the treatment of complex varicose and thrombosis prophylaxis. Also used as functional dressings in the therapy of muscle and tendon injuries, sprains and dislocations.

Eurelasto is also available in:

Eurelasto H (hospital) version (82% cotton and 12% polyamide) characterized by a greater elasticity.

Eurelasto F plaster bandage with extra strong hypoallergenic, synthetic adhesive containing zinc oxide, for permanent compression and functional dressings, particularly suitable for contact sport, mixed martial arts, rugby among others.

Eurelasto is latex free.



	articolo	item no.	misure in tensione	size	conf.pkg.
Eurelasto	508006		cm 6 x m 4,5		72 pz/pcs
	508008		cm 8 x m 4,5		72 pz/pcs
	508010		cm 10 x m 4,5		36 pz/pcs
Eurelasto H	508106		cm 6 x m 4,5		64 pz/pcs
	508108		cm 8 x m 4,5		64 pz/pcs
	508110		cm 10 x m 4,5		64 pz/pcs
Eurelasto F	508016		cm 6 x m 4,5		8 pz/pcs
	508018		cm 8 x m 4,5		8 pz/pcs
	508020		cm 10 x m 4,5		8 pz/pcs



latex free



conformabile
conformable



morbido
soft


Benda adesiva elastica con ossido di zinco
 Adhesive bandage of durable elasticity with zinc oxide
 Benda elastica coesiva estensibile con e senza lattice
 Cohesive elastic bandage of durable elasticity with and without latex

Eurelasto L

Benda elastica coesiva, impregnata di emulsione di lattice, estensibile in senso longitudinale. È capace di fissarsi su se stessa senza l'utilizzo di ganci. Non aderisce sui peli, sulla pelle e sui tessuti, è ipoallergenica, resistente allo scorrimento, porosa, permeabile all'aria e traspirante senza rischio di macerazioni e irritazioni cutanee. Non si strappa né si lacera, non si deforma e viene rimossa senza provocare dolore. Particolarmente utilizzata per fissaggi e per applicazioni in parti difficili del corpo (testa, mani, braccia, gambe e caviglie), per bendaggi compressivi post traumatici, come bendaggio antiscivolo sotto un bendaggio compressivo o come fissaggio post-medicazione. La sua struttura aerata assicura un ottimale scambio termico e di umidità. **È disponibile anche nella versione Eurelasto L latex free (LF).**

Cohesive bandage of durable elasticity with a short stretch for fixation, support and relief dressings. Euroelasto L comes impregnated with latex emulsion, stretchable in the longitudinal direction, without adhesive, capable of fixating on itself without the use of clips. It does not stick on the hair or the skin. Highly hypoallergenic, resistant to sliding, porous, permeable to air and breathable avoiding the risk of maceration and skin irritation. Particularly used for fastenings were applications in difficult parts of the body (head, hands, arms, legs and ankles) is required. Also used for post-traumatic compression dressing, under compression bandage or as post-medication dressing. Its ventilated structure ensures an optimal thermal and moisture exchange. **Eurelasto L is also available in latex free version, Eurelasto LF.**



	articolo	item no.	misure in tensione	size	conf. pkg.
Eurelasto L  conformabile conformable	516002		cm 2,5 x m 4		12 pz/pcs
	516004		cm 4 x m 4		12 pz/pcs
	516006		cm 6 x m 4		12 pz/pcs
	516008		cm 8 x m 4		12 pz/pcs
	516010		cm 10 x m 4		12 pz/pcs
	516012		cm 12 x m 4		12 pz/pcs
	516104		cm 4 x m 20		1 pz/pcs
	516106		cm 6 x m 20		1 pz/pcs
	516108		cm 8 x m 20		1 pz/pcs
	516110		cm 10 x m 20		1 pz/pcs
	516112		cm 12 x m 20		1 pz/pcs
	Eurelasto LF  latex free	516202		cm 2,5 x m 4	
516204			cm 4 x m 4		10 pz/pcs
516206			cm 6 x m 4		10 pz/pcs
516208			cm 8 x m 4		10 pz/pcs
516210			cm 10 x m 4		10 pz/pcs
516212			cm 12 x m 4		10 pz/pcs
516304			cm 4 x m 20		1 pz/pcs
516306			cm 6 x m 20		1 pz/pcs
516308			cm 8 x m 20		1 pz/pcs
516310			cm 10 x m 20		1 pz/pcs
516312			cm 12 x m 20		1 pz/pcs



Benda elastica con ganci
Elastic bandage with clips

Eurobandage

Benda elastica ad uso universale in poliestere e cotone di colore bianco o rosa, anallergica e traspirante. Non scivola dopo l'applicazione, riutilizzabile e resistente a ripetute trazioni e lavaggi.

Da utilizzare come fissaggio di medicazioni a protezione della cute, come bendaggio funzionale nelle terapie delle lesioni muscolari e tendinee, distorsioni, contusioni e per il trattamento dopo fratture ove è richiesta una compressione moderata. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. Dotata di 2 ganci per il fissaggio ferma bende è resistente agli olii e alle pomate.

Eurobandage è latex free.

Polyester and cotton elastic bandage for universal use in white or skin colour, hypoallergenic and breathable. Does not slip after application. It is reusable and resistant to repeated washings and tractions.

To use as application of dressings and skin protection, as a functional bandage in the treatment of muscle injuries and tendon, sprains, bruises, and for the treatment where moderate compression required.

Soft texture that guarantees skin transpiration. It does not causes skin irritation. Supplied with two clips.

Resistant to oils and ointments. Eurobandage is latex free.



articolo	item no.	misure in tensione	size	conf. pkg.
	bianco white		rosa pink	
519005	519105	cm 5 x m 4,5		12 pz/pcs
519007	519107	cm 7,5 x m 4,5		12 pz/pcs
519010	519110	cm 10 x m 4,5		12 pz/pcs
519012		cm 12 x m 4,5		12 pz/pcs
519015	519115	cm 15 x m 4,5		12 pz/pcs
519020	519120	cm 20 x m 4,5		12 pz/pcs

conformabile
conformable



morbido
soft




lavabile
washable




latex free



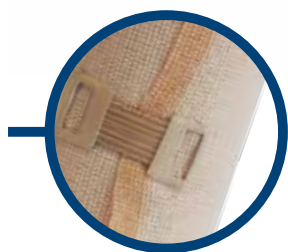


Flebimed short

Benda elastica compressiva non aderente a corta estensibilità
Non-adhesive elastic compression bandage with short stretch

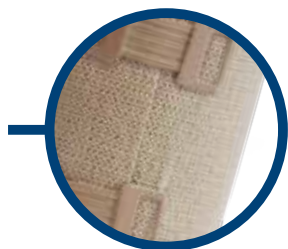


Flebimed media

Benda elastica compressiva non aderente a media estensibilità
Non-adhesive elastic compression bandage with medium stretch

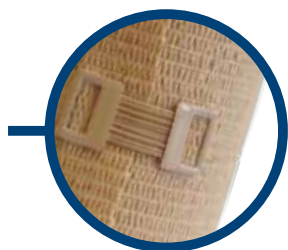

Flebimed forte

Benda elastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità
Non-adhesive elastic compression bandage with long stretch

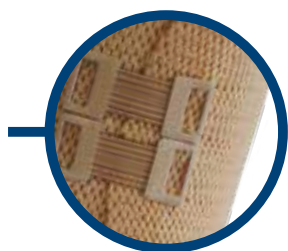

Flebimed bielast

Benda bielastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità in senso longitudinale e trasversale
Non-adhesive dual-elastic compression bandage with long stretch both lengthwise and widthwise



Flebimed short

Benda elastica compressiva non aderente a **corta estensibilità (<40%)** in cotone e poliammide di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza provocare pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli oli e alle pomate. Latex free.


Destinazione d'uso: • Da utilizzare per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, distorsioni, lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione contro gli ematomi in caso di ferite muscolari.

• Adatta anche ad utilizzo flebologico (edemi, linfedemi, ulcus cruris, complesso sintomatico varicoso).

Non-adhesive elastic compression bandage with **short stretch (<40%)** in cotton and polyamide, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Non-deformable and non-tear, it unrolls easily without creasing. The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.

Intended use: • For use as support and relief bandages for contusions, sprains, dislocations and in the case of tendon problems, to immobilise joints, to protect against haematoma in the case of muscle injuries.

• Also suitable for phlebologic use (oedema, lymphoedema, ulcus cruris, varicosis).

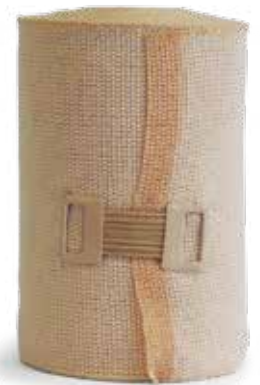

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf.pkg.
527004		mt 5 x cm 4	1 pz/pcs
527006		mt 5 x cm 6	1 pz/pcs
527008		mt 5 x cm 8	1 pz/pcs
527010		mt 5 x cm 10	1 pz/pcs
527012		mt 5 x cm 12	1 pz/pcs

Flebimed media

Benda elastica compressiva non aderente a **media estensibilità** in puro cotone di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Di facile applicazione, non si deforma né si lacera. Consente una perfetta aderenza alle diverse conformazioni anatomiche. Si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli oli e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso: • Da utilizzare per il trattamento dell'insufficienza venosa cronica, in caso di varicosi primaria e secondaria, ulcere degli arti inferiori, edema, tromboflebiti, ebotrombosi, dopo terapia vaso sclerosante.

Non-adhesive elastic compression bandage with **medium stretch**. Made of pure cotton, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Easy to apply, it is non-deformable and non-tear. Allows perfect adhesion to the various anatomical forms. It unrolls easily without forming creases. The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.

Intended use: • To be used for treatment of chronic venous insufficiency, primary and secondary varicosis, leg ulcers, oedema, thrombophlebitis, phlebothrombosis, after vein surgery, after sclerotherapy.



articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf.pkg.
527106		mt 5 x cm 6	1 pz/pcs
527108		mt 5 x cm 8	1 pz/pcs
527110		mt 5 x cm 10	1 pz/pcs
527112		mt 5 x cm 12	1 pz/pcs



confortevole
comfortable



lavabile
washable

Bende elastiche compressive non aderenti con valori di estensibilità diversificati
 Non-adhesive, elastic compression bandages with a variety of stretch values

Flebimed forte



Benda monoelastica compressiva non aderente ad **elevata estensibilità (170%)** in cotone e poliuretano di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile.

Dotata di fermagli. Di facile applicazione, ha un elasticità permanente, non si deforma, non si lacera, si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso: • Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante, ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.

- Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

Non-adhesive single-elastic compression bandage with long stretch (170%)

in cotton and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable.

With fasteners. Easy to apply, it is permanently elastic, non-deformable, non-tear, unrolls easily without forming creases.

The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.

Intended use: • Support bandage with strong, constant compression, ideal for the treatment of varicosis in general.

- Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, and to support and sustain sprains, dislocations, contusions and light fractures.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
----------	----------	---------------	--------------

527206		mt 7 x cm 6	1 pz/pcs
--------	--	-------------	----------

527208		mt 7 x cm 8	1 pz/pcs
--------	--	-------------	----------

527210		mt 7 x cm 10	1 pz/pcs
--------	--	--------------	----------

527212		mt 7 x cm 12	1 pz/pcs
--------	--	--------------	----------

Flebimed bielast



Benda bielastica compressiva non aderente ad **elevata estensibilità in senso longitudinale e trasversale** in cotone, poliammide e poliuretano, di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza provocare pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee.

È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso: • Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante, per bendaggi compressivi post trattamento chirurgico, ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.

- Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni. L'estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

Non-adhesive dual-elastic compression bandage with long stretch both lengthwise and widthwise.

Made of cotton, polyamide and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Non deformable and

non-tear, it unrolls easily without creasing. The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments.

Intended use: • Support bandage giving strong, constant compression, for postsurgical treatment bandages, ideal for treatment of varicosis.

- Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, and to support and sustain sprains and dis locations. The fact that it extends in all directions makes it particularly suitable as a bandage for joints.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
----------	----------	---------------	--------------

527306		mt 7 x cm 6	1 pz/pcs
--------	--	-------------	----------

527308		mt 7 x cm 8	1 pz/pcs
--------	--	-------------	----------

527310		mt 7 x cm 10	1 pz/pcs
--------	--	--------------	----------

527312		mt 7 x cm 12	1 pz/pcs
--------	--	--------------	----------


Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com






Eurozinc

Benda rigida medicata assorbente,
impregnata con pasta all'ossido di zinco
Rigid medicated bandage,
impregnated with zinc oxide paste

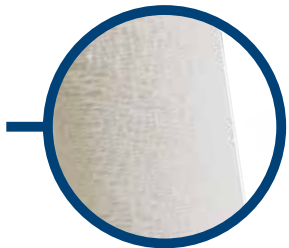

Eurozinc elast

Benda elastica medicata assorbente,
impregnata con pasta all'ossido di zinco
Elastic medicated bandage, impregnated
with zinc oxide paste

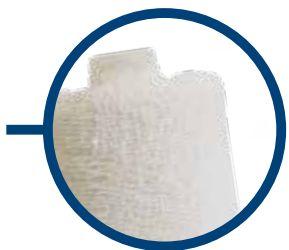

Eurozinc bielast

Benda medicata elastica in senso longitudinale e trasversale,
assorbente, impregnata con pasta all'ossido di zinco
Elastic medicated bandage in both direction lengthwise
and crosswis, impregnated with zinc oxide paste



Eurozinc alginate

Benda semirigida con pasta all'ossido
di zinco e alginato di calcio
Semi-rigid bandage with zinc oxide paste
and calcium alginate



Eurozinc

Benda rigida medicata pronta all'uso, impregnata con pasta all'ossido di zinco con spiccate attività antinfiammatorie, garantisce un ambiente umido e non si asciuga durante l'uso. Di facile applicazione, è ben tollerata dalla pelle, con effetto rinfrescante dopo l'applicazione.

È facilmente modellabile ed adattabile ad ogni tipo di articolazione. Indicata per la terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso), per il trattamento di distorsioni o come benda di supporto.

Favorisce l'assorbimento di ematomi, contusioni ed edema. Ogni benda è confezionata singolarmente in una busta di alluminio che ne garantisce lo stato umido nel tempo. Eurozinc è latex free e non è sterilizzabile.

Eurozinc is a rigid medicated bandage ready to use. Impregnated with zinc oxide paste with extraordinary anti-inflammatory properties. It is able to guarantee a moist environment and will not dry during use.

Easy to apply and well tolerated by the skin. It has a skin refreshing effect after application.

Very easy to cast and adaptable to every type of body contour. Indicated for the treatment of ulcers of the lower limbs caused by venous insufficiency (varicose veins, post-phlebitis syndrome and venous edema) also commonly used for the treatment of distortions or as a support bandage.

It promotes the absorption of bruises, contusions and edema.

Each bandage is individually wrapped in a aluminium foil pouch that guarantees its wet condition over shelf life time. Eurozinc is latex free and cannot be sterilized.



articolo	item no.	♀ misure	size	♀ conf.	pkg.
507005		cm 10 x m 5		10 pz/pcs	
507007		cm 10 x m 7		10 pz/pcs	
507010		cm 10 x m 10		10 pz/pcs	
507106		cm 8 x m 6		10 pz/pcs	



latex free

Benda medicata con pasta all'ossido di zinco Medicated bandage impregnated with zinc oxide paste

Eurozinc elast

Benda elastica medicata pronta all'uso, impregnata con pasta all'ossido di zinco con spiccate attività antinfiammatorie, garantisce un ambiente umido e non si asciuga durante l'uso.
Di facile applicazione e ben tollerata dalla pelle, con effetto rinfrescante dopo l'applicazione.
È facilmente modellabile ed adattabile ad ogni tipo di articolazione.
È indicata nella terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso), per il trattamento di distorsioni o come benda di supporto.
Favorisce l'assorbimento di ematomi, contusioni ed edema.
Ogni benda è confezionata singolarmente in una busta di alluminio che ne garantisce lo stato umido nel tempo.
Eurozinc elast è latex free e non è sterilizzabile.

Eurozinc elast is an elastic medicated bandage ready to use. Impregnated with zinc oxide paste with extraordinary anti-inflammatory properties. It is able to guarantee a moist environment and will not dry during use.
Easy to apply and well tolerated by the skin. It has a skin refreshing effect after application.
Very easy to cast and adaptable to every type of body contour.

Indicated for the treatment of ulcers of the lower limbs caused by venous insufficiency (varicose veins, post-phlebitis syndrome and venous edema) also commonly used for the treatment of distortions or as a support bandage. It promotes the absorption of bruises, contusions and edema. Each bandage is individually wrapped in a aluminium foil pouch that guarantees its wet condition over shelf life time. Eurozinc elast is latex free and cannot be sterilized.

articolo	item no.	♀ misure	size	♂ conf.	pkg.
506005		cm 10 x m 5		10 pz/pcs	
506007		cm 10 x m 7		10 pz/pcs	
506010		cm 10 x m 10		10 pz/pcs	



latex free



Benda medicata con pasta all'ossido di zinco
Medicated bandage impregnated with zinc oxide paste

Eurozinc bielast

Benda medicata pronta all'uso, elastica sia in senso longitudinale che trasversale, assorbente, impregnata con pasta all'ossido di zinco con spiccate attività antinfiammatorie, garantisce un ambiente umido e non si asciuga durante l'uso. Di facile applicazione, è ben tollerata dalla pelle.

È facilmente modellabile ed adattabile ad ogni tipo di articolazione.

È indicata nella terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso), per il trattamento di distorsioni o come benda di supporto. Favorisce l'assorbimento di ematomi, contusioni ed edema. Ogni benda è confezionata singolarmente in una busta di alluminio che ne garantisce lo stato umido nel tempo.

Eurozinc bielast è latex free e non è sterilizzabile

Eurozinc bielast is an elastic medicated bandage in both direction lengthwise and crosswise ready to use. Impregnated with zinc oxide paste with extraordinary anti-inflammatory properties. It is able to guarantee a moist environment and will not dry during use. Easy to apply and well tolerated by the skin. It has a skin refreshing effect after application. Very easy to cast and adaptable to every type of body contour.

Indicated for the treatment of ulcers of the lower limbs caused by venous insufficiency (varicose veins, post-phlebitis syndrome and venous edema) also commonly used for the treatment of distortions or as a support bandage. Each bandage is individually wrapped in a aluminium foil pouch, thus, guarantees its wet condition over shelf life time. Eurozinc bielast is latex free and cannot be sterilized.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
506103		cm 6 x m 5	10 pz/pcs
506104		cm 8 x m 5	10 pz/pcs
506105		cm 10 x m 5	10 pz/pcs
506107		cm 10 x m 7	10 pz/pcs
506110		cm 10 x m 10	10 pz/pcs



latex free



Benda medicata con pasta all'ossido di zinco Medicated bandage impregnated with zinc oxide paste

Eurozinc alginate

Benda semirigida con pasta all'ossido di zinco e alginato di calcio, refrigerante ed elastica .
Utile per il trattamento della fase acuta di traumi articolari, muscolari, dei legamenti e dei tendini.
E' facilmente modellabile ed adattabile ad ogni tipo di articolazione. Eurozinc Alginate è indicata anche per la terapia delle ulcere degli arti inferiori causate dall'insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso) o come benda di supporto.

Eurozinc alginate è inoltre indicata come primo soccorso nei traumi sportivi. La matrice idrocolloidale garantisce un effetto rinfrescante per circa 4 ore. L'alginato di sodio consente una refrigerazione anche dei tessuti cutanei profondi, ottenendo una guarigione ed un sollievo dal dolore più rapido. Una volta che la benda è asciutta, l'effetto refrigerante può essere incrementato conservando la benda in frigorifero.
Eurozinc alginate è latex free e non è sterilizzabile.

Eurozinc alginate is a semi-rigid bandage with zinc oxide paste and calcium alginate. coolant and supple. Useful for the treatment of the acute phase of joint injuries, muscle, ligaments and tendons. Very easy to cast and adaptable to every type of body contour. Eurozinc alginate is also indicated for the treatment of leg ulcers caused by venous insufficiency (varicose veins, post-phlebitis syndrome and venous edema) or as a support bandage. Eurozinc alginate is also indicated as first aid in sports injuries.

The hydrocolloidal properties ensures a refreshing effect for about 4 hours. Sodium alginate allows cooling effect also up to deep skin resulting in healing and quicker relief from pain. Once the bandage is dry, the cooling effect can be increased by conserving the bandage in a fridge. Each bandage is individually wrapped in a aluminium foil pouch, thus, guarantees its wet condition over shelf life time.
Eurozinc alginate is latex free and cannot be sterilized.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
----------	----------	---------------	--------------

506035		cm 8 x m 5	10 pz/pcs
--------	--	------------	-----------

506025		cm 10 x m 5	10 pz/pcs
--------	--	-------------	-----------

506027		cm 10 x m 7	10 pz/pcs
--------	--	-------------	-----------



latex free



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com





Eurocast f



Benda gessata con substrato
in fibra di vetro conformabile e flessibile
Fiberglass support intended for
use in the construction of most common
orthopaedic casts

Eurocast p



Benda gessata in poliestere
a presa rapida conformabile e flessibile
Polyester support intended
for use in the construction of most
common orthopaedic casts



Eurocast f

Benda gessata con substrato in fibra di vetro, impregnata con resine poliuretaniche biocompatibili, che necessita di essere imbibita prima dell'uso.

Eurocast F è leggera ma resistente, radiotrasparente, traspirante, facile da utilizzare e resistente all'umidità. La sua eccellente conformabilità e flessibilità garantiscono confort al paziente. Permeabile all'aria, previene i cattivi odori e i fenomeni di irritazione cutanea. Facile da rimuovere senza produzione di polvere.

Destinazione d'uso: da utilizzare per la realizzazione di apparecchi gessati rigidi per il trattamento di traumi distorsivi, contusivi, lussazioni, fratture e strappi muscolari.

Eurocast F è latex free.

Eurocast F is an excellent fiberglass support intended for use in the construction of most common orthopaedic casts. Eurocast F is comprised of knitted fiberglass fabric impregnated with a water-activated polyurethane resin, providing superlative performance of molding for its casting applications.

Eurocast F is latex free.



articolo	item no.	⚙️ misure	size	⚙️ conf.	pkg.
----------	----------	-----------	------	----------	------

511101		cm 2,5 x m 1,8		10 pz/pcs	
--------	--	----------------	--	-----------	--

511102		cm 5 x m 3,6		10 pz/pcs	
--------	--	--------------	--	-----------	--

511103		cm 7,5 x m 3,6		10 pz/pcs	
--------	--	----------------	--	-----------	--

511104		cm 10 x m 3,6		10 pz/pcs	
--------	--	---------------	--	-----------	--

511105		cm 12,5 x m 3,6		10 pz/pcs	
--------	--	-----------------	--	-----------	--



latex free

Benda gessata con substrato in fibra di vetro
Fiberglass support intended for use orthopaedic

Benda gessata in poliestere a presa rapida
Polyester support intended for use orthopaedic

Eurocast p

Benda gessata sintetica in poliestere a presa rapida, impregnata con resine poliuretatiche biocompatibili a bassa appiccicosità, che necessita di essere imbibita prima dell'uso.

Eurocast P è leggera ma resistente, radiotrasparente, traspirante, facile da utilizzare e resistente all'umidità. La sua eccellente conformabilità e flessibilità garantiscono comfort al paziente. Permeabile all'aria, previene i cattivi odori e i fenomeni di irritazione cutanea. Facile da rimuovere senza produzione di polvere.

Destinazione d'uso: da utilizzare per bendaggi semirigidi di traumi distortivi, contusivi, lussazioni, fratture e strappi muscolari.
Eurocast P è latex free.

Eurocast P is an excellent Polyester support intended for use in the construction of most common orthopaedic casts. Eurocast P is comprised Eco-Friendly of knitted Polyester fabric impregnated with a water-activated polyurethane resin, providing superlative performance of moulding for casting applications.
Eurocast P is latex free.

articolo	item no.	♀ misure size	♀ conf. pkg.
----------	----------	---------------	--------------

511201		cm 2,5 x m 1,8	10 pz/pcs
511202		cm 5 x m 3,6	10 pz/pcs
511203		cm 7,5 x m 3,6	10 pz/pcs
511204		cm 10 x m 3,6	10 pz/pcs
511205		cm 12,5 x m 3,6	10 pz/pcs
511206		cm 15 x m 3,6	10 pz/pcs



latex free



Eurocast f

Benda gessata con substrato in fibra di vetro

Fiberglass support intended for use orthopaedic

Caratteristiche

- Benda gessata in fibra di vetro di alta qualità.
- Pulita, sicura e facile da applicare.

Benefici

- Traspirante.
- Leggera ma altamente resistente.
- Buona permeabilità all'aria, previene i cattivi odori.
- Previene le irritazioni della pelle.
- Non si appiccica alle dita.
- Avvolgere la benda nella parte interessata, modellando senza esercitare tensione.
- Radiotrasparente.
- Il tempo di presa è di circa 3-5 minuti, la resistenza funzionale si raggiunge entro 20 minuti.
- Facile da rimuovere senza produrre polvere.

Characteristic:

- High quality Fiberglass knitted fabric.
- Safe, clean, easy to apply.
- Low price guarantee.

Patient's benefits:

- Breathable.
- High strength yet lightweight.
- Durability.
- Good Air-Permeability, it prevents unpleasant smells.
- Prevents skin irritation.

User's benefits:

- Tack-free resin (Non-sticky to fingers)
- Secure end lamination.
- Radiotranslucent.
- Weight-bearing in 20 minutes.
- Easy to remove without producing dust.

Eurocast p

Benda gessata in poliestere a presa rapida

Polyester support intended for use orthopaedic

Caratteristiche

- Benda gessata in fibra di vetro di alta qualità.
- Pulita, sicura e facile da applicare.
- In poliestere impregnata di resine poliuretatiche.
- Resistente all'umidità.

Benefici

- Traspirante.
- Leggera ma altamente resistente.
- Buona permeabilità all'aria, previene i cattivi odori.
- Previene le irritazioni della pelle.
- Non si appiccica alle dita.
- Avvolgere la benda nella parte interessata, modellando senza esercitare tensione.
- Radiotrasparente.
- Il tempo di presa è di circa 3-5 minuti, la resistenza funzionale si raggiunge entro 20 minuti.
- Facile da rimuovere senza produrre polvere.

Characteristic:


- Safe, clean, easy to apply.
- Low price guarantee.
- Eco-Friendly (Polyester).

Patient's benefits:

- Breathable
- High strength yet lightweight
- Durability
- Good Air-Permeability, it prevents unpleasant smells.
- Prevents skin irritation.


User's benefits:

- Tack-free resin (Non-sticky to fingers)
- Secure end lamination.
- Radiotranslucent
- Weight-bearing in 20 minutes.
- Easy to remove without producing dust.

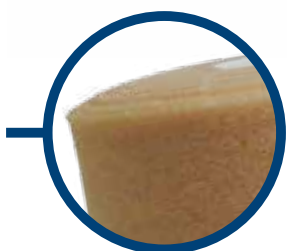

Eurosave

Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano
Underpadding material in thin
polyurethane foam

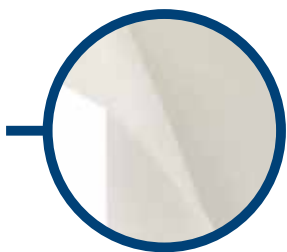

Eurosoft

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso
Undercast padding material made of
100% polyester fibres



Eurotrac

Kit completo per la trazione cutanea degli arti
Complete kit for skin traction of limbs



Eurocollar

Collare cervicale
Cervical collar





Eurosave

Benda salvapelle in schiuma sottile di poliuretano, elastica, morbida, pressochè trasparente, resistente ed altamente porosa.

Viene utilizzata sotto un bendaggio rigido adesivo per avere una rimozione indolore.

Può essere modellata secondo l'anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza scivolamenti e senza isole di spessore incostante.

Eurosave inoltre risulta la soluzione migliore per garantire il massimo del comfort allo sportivo durante le competizioni. Può essere utilizzata come imbottitura nei bendaggi gessati.

Eurosave è latex free.

Underpadding material in thin polyurethane foam, elastic, soft, durable and highly porous.

It is commonly used under a rigid adhesive bandage to have painless removal.

It can be shaped according to the anatomy of the body and it adheres well to the skin without slippage and without causing inconstant thickness.

Eurosave, also is the best solution to ensure athletes comfort during competitions.

It can be used as undercast padding.

Eurosave is latex free.

articolo [item no.](#) [misure size](#)

514002

cm 7 x m 27



latex free



Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso Undercast padding material made of 100% polyester fibres

Eurosoft

Ovatta in poliestere per imbottitura sottogesso, composta da fibre sintetiche, facilmente strappabile con le mani ma resistente alle normali tensioni, maneggevole alla fasciatura. L'ovatta è radiotrasparente, molto morbida e soffice soprattutto nei punti di sovrapposizione, gradevole sulla pelle e traspirante.

Garantisce comfort al paziente anche dopo lungo tempo, grazie alla consistenza della sua trama. Può essere modellata secondo l'anatomia del corpo e aderisce bene sulla pelle, senza isole di spessore incostante. E' idrorepellente per facilitare la rapida asciugatura del gesso, non viene inattivata dall'acqua o dai liquidi corporei e continua a svolgere la sua attività di protezione anche quando entra a contatto con essi.

L'elevata conformabilità fa sì che l'imbottitura risulti ottimale già con una sola sovrapposizione di bendaggio, consentendo in tal modo l'allestimento di perfetti apparecchi gessati.

Eurosoft può essere sterilizzata in autoclave.

Eurosoft è latex free.

Eurosoft is a undercast padding material made of 100% Polyester fibres. The construction of the bandage is designed to ease removal of the cast by limiting penetration of the cast material into the padding. It is also extra soft and highly conformable to deliver a smooth finish. It is hydrophobic in order to facilitate the rapid drying of the plaster, is not inactivated by water or by body fluids and continues to play its activities when exposed to liquids.

The high conformability ensures that the padding is perfect just with one overlay, thereby allowing the preparation of a perfect casts.

Some key characteristics of Eurosoft are: strong, yet easy to tear • high degree of self-adherence for convenient application • outstanding cushioning to protect vulnerable areas • compression resilience • it ensures patient comfort even after a long time, thanks to the consistency of its warp • radiotranslucent • Eurosoft can be sterilized by autoclave.

Eurosoft is latex free.

articolo **item no.**  misure **size**

505001	cm 10 x m 3
505002	cm 15 x m 3
505003	cm 20 x m 3
505004	cm 7,5 x m 3
505005	cm 5 x m 3
505006	cm 12 x m 3



latex free



Kit completo per la trazione cutanea degli arti Complete kit for skin traction of limbs

Eurotrac

Kit completo per la trazione cutanea degli arti costituito da un cerotto ad estensione in tessuto adesivo trasversalmente elastico e permeabile al vapore acqueo, da una imbottitura di schiuma di poliuretano per la protezione della caviglia e dei lati del piede, da una piastrina di attacco con fori centrali per il passaggio dei cavi di trazione intrecciati e realizzati in materiale resistente ed anti abrasivo, e da una speciale benda elastica di fissaggio. Eurotrac è un kit pronto per l'uso e grazie alla superficie adesiva del cerotto ad estensione, aderisce perfettamente alla gamba senza formare pieghe, senza muoversi e scivolare.

Destinazione d'uso: da utilizzare per le trazione degli arti, per l'allineamento scheletrico e per la displasia congenita dell'anca nei neonati.
Eurotrac è latex free.

Complete kit for skin traction of limbs. Composed by a transversely elastic adhesive fabric permeable to water vapour. A polyurethane foam padding to protect the ankle and foot. It uses a plate with central holes for the passage of the traction cables made of durable and abrasion-proof material and by a special elastic fixation bandage. Eurotrac is a ready for use kit. Thanks to the elastic adhesive fabric adheres perfectly to the leg without forming folds, avoiding movement and slipping.
Intended use: to be used for traction of the limbs, for skeletal alignment and for congenital hip dysplasia in infants.
Eurotrac is latex free.

articolo **item no.**  misure **size**

747101 Adulto	cm 8 x m 1,8
747102 Bambino	cm 6 x m 1,4



latex free





Collare cervicale
Cervical collar

Eurocollar


Collare cervicale, costituito da un'anima di soffice schiuma elastica di poliuretano e da uno strato rigido in poliuretano espanso, a densità ideale per un confortevole sostegno. Rivestito in soffice maglia in cotone 100%, anallergica, facilmente rimovibile e riapplicabile per consentire le operazioni di lavaggio, e permettere in tal modo un uso prolungato del collare.

Il fissaggio anteriore è costituito da due linguette in velcro che ne consentono una veloce e precisa applicazione e rimozione.

Destinazione d'uso: da utilizzare per le sindromi cervicali di diversa natura, come sostegno del capo nei casi in cui il movimento incontrollato delle vertebre cervicali provoca dolore, come conseguenza di traumi da collisione (colpi di frusta), torcicollo di origine reumatica, traumi sportivi. Eurocollar è latex free.

Cervical collar, the core is composed by the combination of elastic and soft polyurethane foam and a rigid layer in polyurethane foam creating the ideal density for a comfortable support. Covered in soft knitted 100% cotton, hypoallergenic, easy to remove and can be reapplied to allow washing thereby it enables prolonged use of the collar.

The front securing is constituted by two Velcro strips that allows a fast and precise application and removal.
Intended use: commonly used for cervical syndromes of different nature, such as support of the head when an uncontrolled movement of the cervical causes pain because of collision trauma (whiplash injury), stiff neck of rheumatic origin and sports injuries. Eurocollar is latex free.

articolo **item no.**  **misure size**

503002	Piccola
503003	Media
503004	Grande



lavabile
washable



latex free



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 eurofarm-spa.com

